

beurer

FC 76



CZ **Přístroj pro mikrodermální abrazi**
Návod k použití



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com



Obsah

1. K seznámení.....	3
2. Vysvětlení symbolů.....	4
3. Použití v souladu s určením.....	4
4. Varovné a bezpečnostní pokyny	5
5. Popis přístroje.....	6
6. Použití.....	7
6.1 Provedení testu pleti	7
6.2 Provedení aplikace.....	7
6.3 Aplikační oblasti.....	9
7. Údržba a čištění.....	10
8. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení.....	10
9. Likvidace	10
10. Technické údaje.....	10

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii, péči o krásu i o dítě.

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem

Váš tým Beurer

Obsah balení

- 1x FC 76
- 1x přesný nástavec
- 1x hrubý nástavec
- 1x jemný nástavec
- 20x jednorázový filtr
- 1x síťový adaptér
- tento návod k použití

VAROVÁNÍ



- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Příklad není vhodný pro osoby mladší než 18 let!
- Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Pokud je síťový přívodní kabel tohoto přístroje poškozen, musí být nahrazen opět speciálním přívodním kabelem, který je dostupný u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.








1. K seznámení

Příklad FC 76 umožňuje profesionální peeling obličejů na bázi péče o pleť mikroabrazivní technikou. Při této metodě se pomocí vysoce kvalitního safírového povrstvení velmi šetrně odstraňují přebytečné částičky kůže, použitím nejmodernější vakuové techniky se citelně zlepšuje kvalita pleti a podporuje se její prokrvování. Navíc je stimulována obnova buněk, takže se pleť zdá být celkově jemnější hladší.

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství

	NEBEZPEČÍ Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Upozornění Upozornění na důležité informace
	Dodržujte návod k použití
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Výrobce
	Používejte pouze v uzavřených prostorech

3. Použití v souladu s určením

Přístroj používejte výlučně na lidský obličej (kromě očních partií a úst) dospělých osob. Přístroj nepoužívejte na zvířatech!

Přístroj je určen pouze k účelu užívání popsáném v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

4. Varovné a bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.



NEBEZPEČÍ

Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



VAROVÁNÍ

Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE**:

- jestliže máte popraskanou pleť,
- na otevřených ranách,
- na oční partie nebo ústa,
- na tělo vyjma obličeje (kromě očních partií a úst),
- pokud trpíte kožními chorobami (např. opary, cévním onemocněním nebo zbytečným pokožky),
- pokud trpíte rakovinou kůže,
- pokud trpíte podrážděním pokožky,
- přímo po slunění nebo spálení kůže sluncem,
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy,
- jestliže užíváte léky na ředění krve,
- jestliže trpíte některou z následujících nemocí: roztroušenou sklerózou, cukrovkou nebo autoimunitním onemocněním.



VAROVÁNÍ

Přístroj proto používejte pouze se síťovým zdrojem, který je součástí dodávky, a připojte pouze k napětí uvedenému na síťovém zdroji,



POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.




VAROVÁNÍ

- Používejte přístroj jen v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ne ve vaně, v sauně).
- Nikdy nesahejte po přístroji, když spadne do vody. Okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí síťového kabelu.

- Zajistěte, aby síťový kabel a síťový adaptér nepřišly do styku s vodou, párou nebo dalšími tekutinami.

5. Popis přístroje

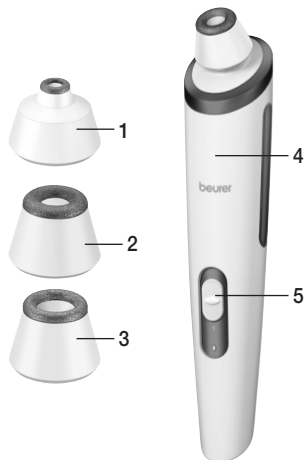

1. Přesný nástavec s jemným safírovým povrstvením, vhodný k preciznímu ošetření malých plošek (např. v oblasti nosu)
2. Jemný nástavec s jemným safírovým povrstvením, vhodný pro citlivou pokožku
3. Hrubý nástavec s hrubým safírovým povrstvením, vhodný na problematické oblasti, k intenzivní aplikaci
4. Ruční přístroj
5. Vypínač (ON/OFF) a nastavení stupňů intenzity 1–2

6. Použití

Upozornění

Než začnete přístroj používat, ujistěte se, že pleť obličeje je čistá, suchá a bez jakýchkoliv zbytků pudru, krému nebo make-upu.

6.1 Provedení testu pleti

Provedte 24 hodin před použitím test pleti s tímto přístrojem. Za tím účelem otestujte přístroj na nejnižší stupeň intenzity na malých, nenápadných místech na krku. Pokud by testované místo bylo po 24 hodinách zarudlé nebo bolavé, přístroj nepoužívejte.

VAROVÁNÍ


- Přístroj nepoužívejte častěji než jednou za týden.
- Přímo po aplikaci se může na ošetřované pokožce obličeje objevit mírné zarudnutí, ve velmi vzácných případech drobné kožní krvácení.
- Jeden den před aplikací a po ní se vyhněte činností vyvolávajícím pocení, sauně, soláriu nebo slunci.

Upozornění


U méně citlivé problematické pleti je možné přístroj používat i 2x týdně (s přestávkou mezi aplikacemi nejméně 48 hodin).

6.2 Provedení aplikace


1. Zapojte síťový adaptér do přístroje a do elektrické zásuvky.

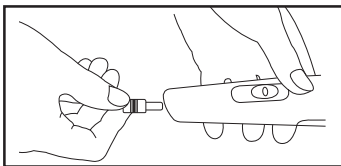


2. Vložte jednorázový filtr do hlavy přístroje.

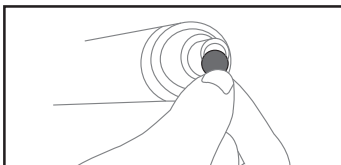

3. Na vrchol přístroje nasadte požadovaný nástavec.

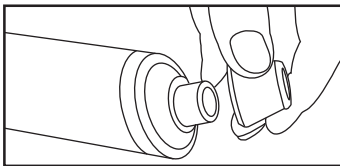

4. Pro zapnutí přístroje posuňte vypínač ON/OFF do polohy požadovaného stupně intenzity.

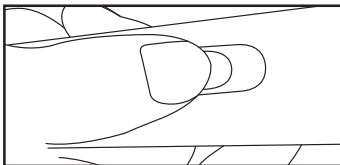


5. Přiložte přístroj na obličej a přežijdějte po pokožce obličeje. Dejte pozor, abyste přístrojem nepřejížděli hlavní obličejové partie více než jednou. Bližší podrobnosti o aplikování se dozvíte v kapitole „6.3 Aplikční oblasti“.

Upozornění

Tlak přístroje při aplikaci by měl být příjemný, neměl by být bolestivý. Po aplikaci by mělo být patrné mírné zčervenání.

6. Po ukončení aplikace přístroj vypněte stisknutím vypínače ON/OFF a vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

7. Jednorázový filtr po každé aplikaci vyměňte. Za tímto účelem vytáhněte nástavec směrem nahoru. Jednorázový filtr vyjměte pomocí pinzety.

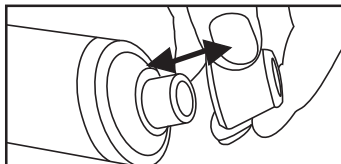

6.3 Aplikační oblasti

Upozornění

Dbejte na to, aby ošetřovaná oblast obličeje byla při přejíždění pokožky přístrojem napjatá. Toho docílíte tím, že budete volnou rukou pokožku napínat dolů nebo do strany.

Čelo:

Přejíždějte přístrojem pomalu a rovnoměrně od středu čela směrem ven. Dejte pozor, abyste žádnou část pokožky nepřejížděli víckrát.



Spánky:

Jeďte s přístrojem směrem ven k vlasové linii. Postup opakujte na levé a pravé straně nosu. Dbejte na to, aby přístroj byl vždy ve vzdálenosti nejméně 1 cm od očí.



Nos:

Přístrojem jeďte od horní části nosního hřbetu středem dolů. Postup opakujte na levé i pravé straně nosu.



Tváře:

Jeďte s přístrojem směrem ven podél tváří.



Kolem úst:

Jeďte s přístrojem nad horním rtem směrem od středu doleva a doprava. Přejíždějte s přístrojem od spodního rtu doleva a doprava nahoru. Dejte pozor, abyste se přímo nedotýkali rtů!



7. Údržba a čištění

- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiných kapalin!
- Po každém použití dezinfikujte nástavce běžným dezinfekčním prostředkem.
- Filtr na jedno použití po každé aplikaci vyměňte.
- Pokud je přístroj znečištěný, očistěte ho suchou utěrkou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

8. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu).

Uvedte příslušné objednávací číslo.

Náhradní díl	Číslo výrobku nebo objednávací číslo
10 filtrů na jedno použití	163.660

9. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



10. Technické údaje

Síťové napětí	Vstup: 100–240V AC / 50/60 Hz Výstup: 5V DC / 1A
Rozměry	190 x 40 x 39 mm
Hmotnost	~128 g

