



CZ **Péče proti stárnutí pleti**
Návod k použití

Obsah

1. K seznámení.....	4	6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení..	7
2. Popis přístroje	5	7. Co dělat v případě problémů?	7
3. Uvedení do provozu	5	8. Likvidace	7
4. Obsluha	5	9. Technické údaje	7
5. Údržba a čištění	6		

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii, péči o krásu i o dítě.

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem
Váš tým Beurer



Výstraha

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Příklad nesmí používat osoby se zdravotnickými implantáty (např. kardiostimulátory). Mohlo by dojít k negativnímu ovlivnění jejich funkce.
- Příklad nepoužívejte, jestliže vykazuje závady nebo řádně nefunguje. V takovém případě se ihned obraťte na zákaznický servis.

Obsah balení

1 péče proti stárnutí pleti FC 90

1 síťový adaptér

1 Intensive Cleansing Milk (30 ml) (čisticí mléko vhodné pro použití s přístrojem FC 90 lze objednat u našeho zákaznického servisu pod objednacím číslem 163.394.)

1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) (krém Advanced Hydro Lift Cream vhodný pro použití s přístrojem FC90 lze objednat u našeho zákaznického servisu pod objednacím číslem 163.392.)

1 návod k použití





Použití v souladu s určením

Péče proti stárnutí pleti FC 90 je určena pouze k používání na lidském obličejí. Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Přístroj používejte pouze předepsaným způsobem. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití, ne pro komerční účely.

Bezpečnostní pokyny

Přehled symbolů

V návodu k použití jsou použity následující symboly.

 Výstraha	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
	Upozornění na důležité informace.
	Likvidace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.

Důležitá bezpečnostní upozornění



Než začnete péči proti stárnutí pleti FC 90 používat, přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věčné škody. Uchovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším uživatelům. Předějte tento návod při předání přístroje jiné osobě.

- Jestliže dojde po použití ke zhoršení stavu kůže, k nežádoucím vedlejším účinkům nebo dlouhotrvajícímu zčervenání, přístroj již nepoužívejte a obraťte se na svého lékaře.
- Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE** na kůži s akutním nebo chronickým onemocněním (poranění nebo záněť), např. při bolestivých i nebolestivých zánětech, zarudnutí, vyrážce (např. alergii), na popáleninách, pohmožděninách, otocích a otevřených nebo hojících se ranách, na hojících se operačních jizvách.
- Chraňte přístroj před kontaktem s vodou.
- Používejte jen dodávaný síťový adaptér.

Zasažení elektrickým proudem



- Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i péče proti stárnutí pleti FC 90 opatrné a rozvážené používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.
- Přístroj používejte pouze s dodávaným síťovým adaptérem a jen s napětím uvedeným na typovém štítku.
- Síťový adaptér zapojujte do zásuvky vždy jen tehdy, je-li přístroj vypnutý.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady.
- Nepoužívejte přístroj, pokud vám spadl na zem nebo se do vnitřní části přístroje dostala voda.
- Nepoužívejte přístroj za bouřky.
- Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout síťový adaptér ze zásuvky.
- Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za síťový kabel.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí síťového kabelu.

- Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi síťovým adaptérem a teplým povrchem přístroje.
- Zajistěte, aby síťový kabel a síťový adaptér nepřišly do styku s vodou, párou nebo dalšími tekutinami.
- Nikdy nesahejte po přístroji, když spadne do vody. Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

Opravy



Varování!

- Přístroj se nesmí otevírat.
- Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Nebezpečí požáru



Výstraha

Při používání přístroje v rozporu s jeho určením, popř. při nedodržování návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!

- Při používání přístroj nezakrývejte, např. dekou nebo polštářem.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti lehce vznětlivých materiálů.
- Dbejte na to, aby nebyly ventilační štěrby zakryté.
- Nikdy neodkládejte přístroj, jestliže je zapnutý. Vždy přístroj nejdříve vypněte.
- Chraňte přístroj před vysokými teplotami.

1. K seznámení

Péče proti stárnutí pleti FC 90 je díky své multifunkční iontové technologii vhodná k čištění a ošetřování pleti. Ošetřující hlavice se podle volby nabíjí kladnými nebo zápornými ionty. Tyto nabité ionty pronikají na základě elektrochemické reakce pod povrch pokožky do hlouběji uložených vrstev kůže, popř. z hlouběji uložených vrstev kůže na její povrch.

Čištění desinkrustací:

Záporně nabitě částice čistícího mléka pronikají pomocí záporných iontů hluboko do kůže. Zde uvolňují nečistoty, které jsou pak pozitivním nábojem ošetřující hlavice dopravovány na povrch kůže.

Ošetření pleti proti stárnutí iontoforézou:

Jestliže je ošetřující hlavice záporně nabita, odrazí se z ní účinné látky krému Advanced Hydro Lift Cream, které jsou rovněž záporně nabitě, a proniknou hluboko do kůže. Zde se mohou optimálně projevit účinky ošetření proti stárnutí pleti.

Funkce ochlazování a zahřívání:

Péče proti stárnutí pleti FC 90 je doplněna funkcí ochlazování a zahřívání. Funkce zahřívání uvolňuje pokožku obličeje a podporuje její prokrvení. Díky tomu je vaše pleť vláčnější. Pomocí funkce ochlazování se redukuje otoky v obličeji, uzavírají póry a posiluje elasticitu kůže.

2. Popis přístroje

1. Ošetrující hlavice
2. LCD displej
3. Vypínač
4. Tlačítko pro záporné ionty
5. Tlačítko pro kladné ionty
6. Tlačítko funkce zahřívání
7. Tlačítko funkce ochlazování



3. Uvedení do provozu



Výstraha

Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

- Vyjměte přístroj z obalu a zkontrolujte, zda je přístroj a jeho příslušenství kompletní a nepoškozený.
- Síťový kabel zapojte do zdířky v dolní části přístroje.
- Síťový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Zapojte síťový adaptér do zásuvky.

4. Obsluha



Výstraha

Před prvním použitím proveďte test snášenlivosti pokožky, abyste zjistili, zda vaše pokožka bude dobře snášet čisticí mléko a krém Advanced Hydro Lift Cream. Postupujte takto:

- Mýdlem důkladně očistěte místo na vnitřní části paže, na očištěné místo naneste trochu čisticího mléka a krému Advanced Hydro Lift Cream a nechte ho vstřebat a zaschnout.
- Jestliže na pokožce během 48 hodin nedojde k žádné reakci, můžete testované prostředky bez obav použít.
- Jestliže během 48 hodin dojde k reakci kůže, neměli byste testované prostředky používat k aplikaci na obličej.
- Test snášenlivosti pokožky neprovádějte na očích.

S přístrojem můžete svou pleť čistit i ošetřovat.



Během aplikace držte přístroj tak, abyste rukou objali přístroj v místě dvou proužků chromové barvy. Při nedodržení tohoto pokynu nedojte k uzavření proudového okruhu a funkce iontů není možná.

Ošetřování









K zajištění optimálních účinků doporučujeme provádět čištění a ošetřování pleti proti stárnutí pouze s dodávanými produkty, neboť tyto produkty jsou optimálně vyvážené pro použití s přístrojem FC 90.

Doporučujeme ošetření pleti provádět ráno a čištění v kombinaci s ošetřením večer.

4.1 Ošetření (ráno):





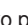

- Naneste krém Advanced Hydro Lift Cream na ošetřované místo obličeje.
- Stiskněte vypínač  na přístroji.
- Stiskněte nejdříve tlačítko funkce zahřívání  a pak tlačítko pro záporné ionty . Přístroj se nyní nachází 30 sekund v zahřívací fázi. Na displeji se zobrazí nápis „WAITING“. Jakmile nápis „WAITING“ zhasne, je přístroj připraven k použití.
- Jemnými krouživými pohyby nyní pohybujte ošetřující hlavicí po pokožce obličeje.
- Po dvouminutovém ošetřování stiskněte tlačítko funkce ochlazování  a tlačítko pro záporné ionty . Přístroj se nyní nachází 30 sekund v ochlazovací fázi. Na displeji se zobrazí nápis „WAITING“. Jakmile nápis „WAITING“ zhasne, je přístroj připraven k použití. Pokračujte s ošetřováním další dvě minuty.
- Přístroj vypněte stisknutím vypínače .

4.2 Čištění v kombinaci s ošetřením (večer):

Čištění:

Zahřívací fáze
30 sekund



- Na pokožku obličeje naneste čisticí mléko.
- Stiskněte vypínač  na přístroji.
- Stiskněte nejdříve tlačítko funkce zahřívání  a pak tlačítko pro záporné ionty . Přístroj se nyní nachází 30 sekund v zahřívací fázi. Na displeji se zobrazí nápis „WAITING“. Jakmile nápis „WAITING“ zhasne, je přístroj připraven k použití.
- Jemnými krouživými pohyby pak pohybujte ošetřující hlavicí po pokožce obličeje.
- Po třech minutách stiskněte tlačítko pro kladné ionty  a pokračujte s ošetřováním další minutu. Po fázi čištění opláchněte obličej vlažnou vodou.

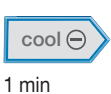
Ošetření:

Po ukončení fáze čištění pokračujte ošetřením pleti takto:


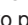

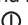
Zahřívací
fáze 30 sekund



Ochlazovací fáze 30 sekund



Postup opakujte 1x
od začátku

- Očistěte ošetřující hlavicí utěrkou nepouštějící vlákna tak, abyste odstranili veškeré zbytkyčisticího mléka.
- Naneste krém Advanced Hydro Lift Cream na ošetřované místo obličeje.
- Stiskněte nejdříve tlačítko funkce zahřívání  a pak tlačítko pro záporné ionty . Přístroj se nyní nachází 30 sekund v zahřívací fázi. Na displeji se zobrazí nápis „WAITING“. Jakmile nápis „WAITING“ zhasne, je přístroj připraven k použití.
- Jemnými krouživými pohyby nyní pohybujte ošetřující hlavicí po pokožce obličeje.
- Po jedné minutě ošetřování stiskněte tlačítko funkce ochlazování . Přístroj se nyní nachází 30 sekund v ochlazovací fázi. Na displeji se zobrazí nápis „WAITING“. Jakmile nápis „WAITING“ zhasne, je přístroj připraven k použití. Pokračujte s ošetřováním další minutu.
- Opakujte pak tuto ošetřování s funkcí zahřívání a ochlazování podle výše uvedeného popisu vždy jednu minutu. Naneste na obličej ještě trochu krému Advanced Hydro Lift Cream.
- Přístroj vypněte stisknutím vypínače .

5. Údržba a čištění

- Jestliže přístroj již nebudete používat, uschovejte jej na chladném, suchém a tmavém místě.
- Po každém použití opatrně očistěte přístroj jemnou utěrkou. V případě potřeby ji můžete lehce navlhčit. Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala voda.

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Mohli byste přístroj poškodit.
- V žádném případě nesmíte přístroj umývat pod vodou, protože by se do něj mohla dostat kapalina a poškodit jej.

6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu) Uvedte příslušné objednací číslo.

Výrobek	Číslo výrobku nebo objednací číslo
Advanced Hydro Lift Cream (30 ml)	163.392
Intensive Cleansing Milk (200ml)	163.394

7. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Odstranění
Na displeji se nic nezobrazuje	Síťový adaptér není správně zapojen.	Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně zapojen.
	Přístroj není zapnutý.	Stiskněte vypínač.
Nefunguje funkce zahřívání a ochlazování	Síťový kabel je poškozený.	Kontaktujte svého prodejce.
	Přístroj je poškozený.	

8. Likvidace

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



9. Technické údaje

Model č.	FC 90
Vstup	AC 100-240 V / 50~60 Hz / 0,5 A
Výstup	DC 6,5 V / 2,46 A ===

