

beurer

Velvet Skin Pro



CZ **Epilace**
Návod k použití

CE



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. Obsah balení	3
2. Znaký a symboly	3
3. Použití v souladu s určením	4
4. Varovné a bezpečnostní pokyny	4
5. Co je přístroj beurer Velvet Skin Pro?	7
6. Popis přístroje	9
6.1 Podrobný popis	9
7. Dříve než začnete	10
KROK 1: Zkontrolujte, zda je pro vás přístroj beurer Velvet Skin Pro vhodný	10
KROK 2: Test snášenlivosti pokožky	10
KROK 3: Pro nejlepší výsledky postupujte při epilaci přístrojem beurer Velvet Skin Pro podle plánu	11
KROK 4: Připravte ošetřované místo	12
KROK 5: Nastavte intenzitu energie / automatické rozpoznávání odstínu kůže	12
KROK 6: Seznámení s možnými vedlejšími účinky při použití přístroje beurer Velvet Skin Pro	12
KROK 7: Co mohou očekávat od ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro?	14
8. Používání přístroje beurer Velvet Skin Pro	14
8.1 První použití	14
8.2 Ošetření obličeje	16
8.3 Péče po ošetření obličeje	16
9. Péče o přístroj beurer Velvet Skin Pro	17
9.1 Čištění	17
10. Odstraňování chyb	17
11. Často kladené otázky	17
12. Likvidace	20
13. Technické údaje	20
14. Síťový adaptér	20

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich produktů. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, jemné manuální terapie, krevního tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže, péče o krásu a vzduchové terapie. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem
Váš tým Beurer

1. Obsah balení




- 1 beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 přesný nástavec
- 1 síťový adaptér
- 1 návod k použití
- 1 úložné pouzdro











VAROVÁNÍ

- Přístroj a adaptér jsou určeny pouze pro domácí nebo soukromé použití, nikoli pro komerční oblast.
- Přístroj není vhodný pro osoby mladší 18 let.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Před každým použitím zkontrolujte neporušenost přístroje a síťového kabelu. Je-li přístroj poškozen, nesmí být používán.
- Přístroj ani adaptér nesmí být mokré.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, umyvadel, sprch či jiných nádrží s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nikdy se nedívejte do světla.
- Do přístroje nezasunujte žádné předměty.
- Dbejte na to, aby nebyly ventilační štěrby přístroje zakryté.
- Nedotýkejte se žádných vnitřních součástí, jestliže je přístroj poškozen, abyste se vyvarovali úrazu elektrickým proudem.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru. Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

2. Znaky a symboly

V tomto návodu k použití a na přístroji lze nalézt následující symboly:

 VAROVÁNÍ	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
 POZOR	Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
 Upozornění	Upozornění na důležité informace

 NEBEZPEČÍ	Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana). Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Přečtěte si návod k použití.
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 2.
	Pozor: optické záření
	Používejte pouze v uzavřených prostorech
	Chraňte před vlhkem!
	Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od očí!
	Nepoužívejte na opálenou pokožku nebo po vystavení pokožky slunečnímu záření.
	Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.

3. Použití v souladu s určením

Přístroj beurer Velvet Skin Pro je určen k odstraňování nežádoucího ochlupení na těle dospělých. Ideálními místy na těle pro použití přístroje beurer Velvet Skin Pro jsou nohy, podpaží, třísla, hrudník, břicho a u žen obličej pod lícními kostmi. Přístroj není určen k odstraňování ochlupení na řitním otvoru, na genitáliích nebo prsních bradavkách. Používejte přístroj pouze v souladu s návodem k použití.

4. Varovné a bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a při používání přístroje beurer Velvet Skin Pro je přesně dodržujte. Nedodržení následujících pokynů může vést k poranění nebo k věcným škodám. Uchovejte tento návod k použití a poskytněte ho dalším uživatelům. Při předání přístroje třetím osobám dbejte na to, aby byl přiložen tento návod k použití.

- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze v případě, pokud jsou pod přiměřeným dohledem nebo pokud byly podrobně poučeny odpovědnou osobou.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro během těhotenství ani v době kojení.
- Pokud zjistíte na pokožce extrémní zarudnutí, tvorbu puchýřků nebo popáleniny, **OKAMŽITĚ PŘERUŠTE POUŽÍVÁNÍ!**
- 48 hodin před prvním použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro proveďte test snášenlivosti pokožky na malém kousku pokožky v zamýšlené ošetřované zóně (viz kapitola 7, krok 2: „Test snášenlivosti pokožky“).
- V žádném případě se nedívejte přímo do světla vystupujícího z IPL lampy. Tento produkt může vyzařovat nebezpečné optické záření. Dbejte na to, aby světelná plocha nástavce byla zcela v kontaktu s pokožkou.
- Nikdy se nepokoušejte vysílat světelný impuls do vzduchu!

- Pomocí tabulky barev ochlupení a typů pokožky na zadní straně tohoto návodu k použití zjistíte, které intenzity světla jsou nejvhodnější pro typ vaší pokožky a barvu vašeho tělesného ochlupení, resp. zda je tato metoda pro vás vůbec vhodná (pokud ne, bude tato skutečnost uvedena symbolem „X“ v tabulce).
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro na přirozeně tmavé pokožce. Ošetření tmavé pokožky pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro může mít škodlivé následky, jako například vznik popálenin, puchýřků a změny barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace).
- Přístroj beurer Velvet Skin Pro funguje nejlépe u tmavějších typů ochlupení nebo u chloupků, které obsahují více melaninu. Černé a tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe, a přestože hnědé a světlé hnědé ochlupení bude reagovat také, potřebuje obvykle více epilačních ošetření. Zrzavé ochlupení by mohlo vykazovat reakci. Bílé, šedé nebo světlé ochlupení obvykle na přístroj beurer Velvet Skin Pro nereaguje, přestože někteří uživatelé pozorovali výsledky po několika epilačních ošetřeních.
- Přístroj beurer Velvet Skin Pro může způsobit přechodnou pigmentaci.
- Nepokoušejte se otevírat či opravovat přístroj beurer Velvet Skin Pro. Při otevření přístroje beurer Velvet Skin Pro se můžete dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi nebo s impulzní světelnou energií, což může vést k vážným poraněním nebo k trvalému poškození zraku.

NEBEZPEČÍ

Přístroj beurer Velvet Skin Pro chraňte před kontaktem s vodou! beurer Velvet Skin Pro je elektrický přístroj. Nepokládejte jej do vody ani jej nenechte do vody či jiných kapalin spadnout.



Mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud se právě koupete.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud je vlhký nebo mokrý.
- Nesahejte pro přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud spadne do vody.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky a přístroje mokřkýma rukama!

Pokyny pro zacházení s akumulátory

- Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Chraňte akumulátory před nadměrným teplem.
- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním zcela nabijte akumulátor (kapitola 8.1).
- Pro dosažení co nejdélejší životnosti akumulátoru ho plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.

POZOR

Jak zabránit škodám

- Nepokoušejte se otevírat či opravovat přístroj beurer Velvet Skin Pro. Pokus o otevření přístroje beurer Velvet Skin Pro může způsobit poškození přístroje a povede k zániku jeho záruky.
- Nevystavujte přístroj během použití teplotám do 10 °C nebo nad 40 °C.
- Přístroj by neměl být nikdy ponechán bez dozoru, pokud je síťový adaptér zapojen do zásuvky.
- Používejte přístroj beurer Velvet Skin Pro pouze k určenému účelu použití a tak, jak je popsáno v návodu k použití.
- Neuvádějte přístroj beurer Velvet Skin Pro do provozu, pokud je kabel nebo zásuvka poškozená a udržujte síťový kabel v dostatečné vzdálenosti od zahřátých povrchů.
- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku přístroje beurer Velvet Skin Pro ze zásuvky.
- Po nabíjení akumulátoru vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro s nastavci nebo s příslušenstvím, které nebyly doporučeny společností beurer GmbH.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud během použití vidíte nebo cítíte kouř.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud správně nefunguje nebo pokud se zdá být poškozený.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud je snímač typu pleti pod světelnou plochou prasklý nebo zlomený.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud je vnější kryt prasklý nebo se rozpadá.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud je světelná plocha prasklá nebo zlomená či úplně chybí.
- Neuvádějte přístroj beurer Velvet Skin Pro do provozu, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka.
- Přístroj nabíjejte pouze s dodávaným adaptérem.
- Pokud použijete přístroj, jestliže je poškozený UV filtr u otvoru výstupu světla.
- Nepoužívejte přesný nastavec, jestliže je poškozený filtr.
- Dbejte na to, aby byl zajištěn ničím nerušený proud vzduchu větracími otvory.

VAROVÁNÍ

V žádném případě nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud trpíte jednou z následujících nemocí:

- Pokud máte nebo pokud jste měli rakovinu kůže.
- Pokud trpíte epilepsií.
- Pokud máte keloidní jizvy.
- Pokud máte herpes nebo lupénku.
- Pokud jste fotosenzitivní nebo trpíte jinou citlivostí na světlo jako například porfyrie, polymorfní světelná erupce, světelná urtikaria (kopřivka), lupus atd.
- Pokud trpíte metabolickou nemocí, jako je například diabetes.
- Pokud trpíte poruchou srážení krve.

V žádném případě nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud užíváte jeden z následujících léků:

- Pokud užíváte léky, které způsobují vyšší citlivost pokožky na světlo, včetně nesteroidních antirevmatik (například aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracykliny, fenothiaziny, thiazidová diuretika, sulfonyl močoviny, sulfonamidy, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxykyseliny (AHA), beta-hydroxykyseliny (BHA), Retin-A[®], Accutane[®] a/nebo topické retinoidy.
- Pokud jste nedávno byli nebo v současnosti jste léčeni kyselinou azelainovou.
- Pokud jste v posledních dvou týdnech brali tetracyklinová antibiotika.
- Pokud jste byli v posledních 6 měsících léčeni lékem Accutane[®] (isotretinoin).
- Pokud jste v posledních 3 měsících užívali steroidní přípravky.
- Pokud jste si v posledních 6–8 týdnech nechali udělat peeling pleti nebo jinou metodu vyhlazení pokožky.
- Pokud jste se v posledních 3 měsících podrobili ozařování nebo chemoterapii.

V žádném případě nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro na těchto místech:

- Nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.
- Nad aktivním implantátem, jako je například kardiostimulátor, zařízení pro případ inkontinence, inzulinová pumpa atd.
- Na obličeji nad linií tváře, kolem očí, obočí nebo řas, protože to může vést k závažnému poškození zraku.
- U mužů v celém obličeji a na krku.
- Na prsních bradavkách, genitáliích (mužských nebo ženských) nebo kolem řitního otvoru.
- Nad piercingem nebo jinými kovovými předměty, jako jsou například náušnice nebo šperky.
- Nad tetováním nebo permanentním make-upem v ošetřované oblasti.



- Nad tmavě hnědými nebo černými skvrnami, jako jsou například velké pihy, mateřská znaménka, jaterní skvrny, puchýřky nebo bradavice.
- Nad ekzémy, lupénkou, lézemi, otevřenými ranami nebo akutními infekcemi. Před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro počkejte, dokud se příslušné místo nezahojí.
- Na poškozené nebo popraskané pokožce nebo na místech, na kterých existuje riziko vzniku malignit.
- Na místě na těle, na kterém byste možná chtěli být v budoucnu ochlupeni.

Varovné upozornění na následky opalování před ošetřením a po ošetření!



Opalování před ošetřením

1. Po opalování počkejte minimálně 2 týdny, než přístroj použijete.
2. Před ošetřením zkontrolujte, zda nemáte spálenou pokožku. Pokud nejsou spáleniny zhojené, počkejte s použitím přístroje do té doby, než bude spálená pokožka zcela zahojená.
3. Na opálené kůži proveďte test snášenlivosti (viz kapitola 7, krok 2), abyste zjistili vhodnou intenzitu energie.

Opalování po ošetření

1. Po ošetření počkejte s opalováním minimálně 48 hodin. Zarudlou pokožku nevystavujte slunečním paprskům!
2. První dva týdny po ošetření zakrývejte pokožku na slunci oděvem nebo použijte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem (minimálně LSF 30).

Opalování umělým světlem


Pokyny z odstavce „Opalování před ošetřením“ a „Opalování po ošetření“ platí i pro opalování umělým světlem a mléky na opalování.

S použitím přístroje před návštěvou sauny/bazénu nebo po této návštěvě počkejte 24 hodin, chlór by totiž mohl způsobit podráždění pokožky.

i Upozornění


Tento seznam nevznášá nárok na úplnost. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás použití přístroje beurer Velvet Skin Pro bezpečné, obraťte se na svého lékaře nebo dermatologa.

5. Co je přístroj beurer Velvet Skin Pro?

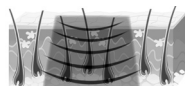

Před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro

Přístroj beurer Velvet Skin Pro funguje na bázi světla a slouží k epilaci ochlupení s dlouhodobým účinkem při osobním použití. Proces epilace na bázi laserového paprsku a světla je dobře známý a osvědčený. Celosvětové klinické používání po dobu více než 15 let prokázalo, že je bezpečným a účinným prostředkem pro dosažení dlouhodobého efektu epilace.

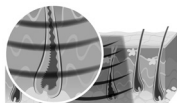


Během impulzu z přístroje beurer Velvet Skin Pro

Jakým způsobem dochází k epilaci pomocí světla?

Epilace na bázi světla je založena na teorii selektivní fototermolýzy, což je metoda, při níž je růst ochlupení deaktivován působením optické energie. Aby bylo dosaženo tohoto tepelného účinku, musí stvol chloupku selektivně absorbovat světelnou energii a přeměnit ji na teplo.

Této selektivity je dosaženo tehdy, když je optická energie, která se přenáší do tkáně, absorbována hlavně pigmentem stvolu chloupku, zatímco pokožka a okolní tkáň zůstávají chladné. Melanin je pigment ve stvolu chloupku, který je odpovědný za absorpci světla a generuje teplo, které deaktivuje růst ochlupení. Proto platí, že může být absorbováno tím více světla a tím efektivnější může toto světlo při epilaci být, čím více melaninu je v chloupkách obsaženo (to znamená, čím jsou chloupky tmavší).

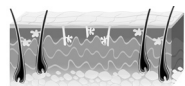

Po použití přístroje beurer Velvet Skin Pro

Jaký vliv má cyklus růstu ochlupení na epilaci založené na působení světla?



Anagenní fáze:
fáze růstu

Každý chloupek na našem těle prochází třemi fázemi cyklu růstu ochlupení: anagenní, katagenní a telogenní. Tyto fáze mají významný vliv na fungování epilace založené na působení světla.


Anagenní fáze je fáze růstu ochlupení, zatímco katagenní a telogenní jsou fázemi klidu.




Katagenní fáze:
přechodná fáze

Doba trvání kompletního cyklu růstu ochlupení se u jednotlivých lidí liší a závisí na místě ochlupení na těle, zpravidla však činí 18–24 měsíců. V určitém okamžiku je většina vlasových folikulů na jedné ploše pokožky v klidové fázi. Na tyto chloupky v klidu nemá použití přístroje beurer Velvet Skin Pro žádný účinek.

Avšak ochlupení v anagenní fázi růstu na použití přístroje beurer Velvet Skin Pro reaguje. Je bezpodmínečně nutné si uvědomit, že pro dosažení dlouho-trvající epilace s použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro je zapotřebí celého jednoho období cyklu růstu ochlupení.

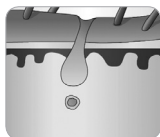

Telogenní fáze:
klidová fáze

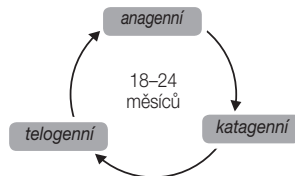

Přístroj beurer Velvet Skin Pro byl vyroben s prvořadým důrazem na bezpečnost

• Technologie IPL přístroje beurer Velvet Skin Pro – nejvyšší bezpečnost při nižší energetické úrovni

Pomocí technologie Intense Pulsed Light (IPL) lze dosáhnout dlouhodobých epilačních výsledků, a to při použití zlomku vynaložené úrovně v porovnání s jinými epilačními přístroji, které jsou založeny na působení světla. Nízká hladina energie, která se používá u přístroje beurer Velvet Skin Pro, snižuje potenciální možnost vzniku poškození nebo komplikací a přispívá k vaší celkové bezpečnosti.

• beurer Velvet Skin Pro chrání vaši pokožku

Epilace založená na působení světla není vhodná pro přirozeně tmavší odstíny pokožky nebo pro opálenou pokožku. Přístroj beurer Velvet Skin Pro je dodáván spolu se zabudovaným *snímačem typu pleť*, pomocí kterého lze změřit barvu ošetřované části pokožky, což umožňuje použití pouze na vhodných odstínech pokožky. Tato bezpečnostní funkce vám nedovolí ošetřit pokožku tehdy, pokud je příliš tmavá nebo příliš opálená. AplikáčnÍ okénko disponuje vestavěnou ochranou před UV zářením, díky které je blokováno škodlivé UV záření.



• beurer Velvet Skin Pro chrání vaše oči

Přístroj beurer Velvet Skin Pro má pro ochranu očí zabudovaný snímač kontaktu s pokožkou. Byl navržen tak, aby nebylo možné vysílat světelný impuls v době, kdy je přístroj držěn ve vzduchu. Záblesk světla se spustí teprve tehdy, jestliže bude snímač kontaktu s pokožkou pevně přiléhat ke kůži.

6. Popis přístroje

	1. Záblesková lampa
	2. Aplikační okénko
	3. Spouštěcí tlačítko (po spuštění 3 záblesků za sebou se nastaví režim „Auto-Flash“.)
	4. Ukazatel stupňů energie
	5. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
	6. Tlačítko pro nastavení stupně energie
	7. Tlačítko pro automatické rozpoznávání odstínu kůže
	8. Kontrolka
	9. Snímač odstínu kůže a kontaktu s pokožkou
	10. Zdířka pro nabíjení
	11. Charging socket

6.1 Podrobný popis

- Vypínač** – stisknutím vypínače  se přístroj zapíná a vypíná. Přístroj se automaticky vypne, když ho nebudete více než pět minut používat. Při zapnutí přístroje se krátce rozsvítí všechny kontrolky na ukazateli stupňů energie, poté přístroj přejde do nastavení stupně energie 1.
- Tlačítko pro automatické rozpoznávání odstínu kůže** – stisknutím tlačítka  můžete stanovit doporučený stupeň energie pro ošetření příslušného místa. Tlačítko se po stisknutí rozsvítí zeleně a tlačítka pro nastavení stupně energie blikají po dobu deseti sekund. Jestliže má snímač kontaktu s pokožkou úplný kontakt s požadovaným místem ošetření a vyše se světelný impuls, nastaví se doporučený stupeň energie (podle odstínu kůže na ošetřovaném místě) automaticky; na ukazateli stupňů energie se rozsvítí příslušná kontrolka.
Je třeba upozornit na to, že doporučený stupeň energie se navolí jen tehdy, jestliže stisknete příslušné tlačítko, ne když se změní odstín kůže nebo ošetřované místo.
- Tlačítka pro nastavení stupně energie** – tlačítko + (vyšší stupeň energie) a – (nižší stupeň energie) umožňují výběr šesti různých stupňů energie. Vždy volte stupeň energie podle osobních pocitů, popř. na základě provedeného testu snášenlivosti pokožky. Pro výběr optimálního stupně energie můžete pro každé ošetřované místo použít tlačítko pro automatické rozpoznávání odstínu kůže.
 - Stisknutím tlačítek + nebo - (po zapnutí přístroje) se energie zvýší nebo sníží o jeden stupeň. Každým dalším stisknutím se mění stupeň energie mezi nejnižším (označeným číslem „1“) a nejvyšším stupněm (označeným číslem „6“).
 - Podle zvoleného stupně energie svítí příslušný počet zelených kontrolků na ukazateli stupňů energie.
- Ukazatel stavu nabití akumulátoru** – tento ukazatel poskytuje informace o stavu nabití akumulátoru:
 - Červená – akumulátor se nabíjí.
 Upozornění: Jestliže zároveň s touto červenou kontrolkou svítí i kontrolka stupně energie 1, je přístroj zapnutý.
 - Zelená – akumulátor je plně nabitý a přístroj je připojen k externímu napájení.
 - Červená, pomalu blikající – nízký stav nabití akumulátoru (asi 30 procent).
 - Červená, rychle blikající – velmi nízký stav nabití akumulátoru (asi 10 procent).
 Upozornění: Ukazatel stavu nabití akumulátoru svítí zeleně, popř. bliká červeně jen tehdy, když je přístroj zapnutý.
- Kontrolka** – tato kontrolka na zadní straně přístroje má více funkcí pro zobrazování provozního režimu (viz tabulka).

Kontrolka	Režim	
Svítil zeleně	Zapnuto	Zařízení připraveno pro světelný impuls. Při vyslání světelného impulsu, popř. mezi světelnými impulzy nesvítil žádná kontrolka.
Rozsvítí se oranžově	Uvolnění světelného impulsu je zablokováno.	Přístroj z důvodu nedostatečného kontaktu s pokožkou nevyšle žádný světelný impuls.
Rozsvítí se červeně	Uvolnění světelného impulsu je zablokováno.	Přístroj nevyšle z důvodu nepřijatelného odstínu kůže (vysoká hodnota podle Fitzpatricka viz údaje na zadní straně návodu k použití) žádný impuls.
Bliká oranžově	Poukázání na ukončení provozní doby	Poukazuje na brzký konec provozní doby zábleskové lampy.
Svítil červeně	Konec provozní doby dosažen	Přístroj je trvale zablokován, záblesková lampa dosáhla konce své životnosti, objevila se interní závada nebo aplikační okénko není řádně umístěno na přístroji.

7. Dříve než začnete

KROK 1: Zkontrolujte, zda je pro vás přístroj beurer Velvet Skin Pro vhodný

VAROVÁNÍ

Před prvním použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro zkontrolujte, zda je pro vás přístroj vhodný. Prověřte, zda je pro vás přístroj beurer Velvet Skin Pro vhodný, viz kapitola „4. Varovné a bezpečnostní pokyny“ a podle tabulky barev ochlupení a typů pokožky na zadní straně tohoto návodu k použití zjistíte, které intenzity světla jsou nejhodnější pro typ vaší pokožky a barvu vašeho tělesného ochlupení, a zda je tato metoda pro vás vůbec vhodná (pokud ne, bude tato skutečnost uvedena symbolem „x“ v tabulce).

KROK 2: Test snášenlivosti pokožky

VAROVÁNÍ

Před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro proveďte test snášenlivosti pokožky.

Pomocí testu snášenlivosti pokožky má být zjištěno, jak vaše pokožka reaguje na ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro. Dále vám pomůže při nastavení optimálního stupně energie pro každou ošetřovanou oblast.

Na každém místě pokožky, kterou chcete ošetřovat, proveďte **48 hodin** před kompletním ošetřením test snášenlivosti pokožky.

Upozornění

Při ošetření obličeje by měl být proveden test snášenlivosti pokožky na ploše bez ochlupení, například pod uchem nebo ze strany na krku.

1. Před použitím dbejte na to, aby byla pokožka oholená, čistá a suchá (bez jakýchkoli zbytků kosmetických přípravků, např. pudru, krému, make-upu, antiperspirantu nebo deodorantu).

VAROVÁNÍ

Krátce před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nečistěte pokožku vznětlivými kapalinami, jako je alkohol nebo aceton.

2. Nastavte přístroj tak, jak je popsáno v kapitole „8.1 První použití“ v bodě 2 až 5.

3. Umístěte světelnou plochu přístroje na požadovanou testovanou oblast a dbejte na úplný kontakt s pokožkou.
4. Přístroj je automaticky nastaven na nejnižší stupeň energie. Stisknutím spouštěcího tlačítka uvolníte první impuls se stupněm energie 1. Uvidíte jasný záblesk světla, uslyšíte praskavý zvuk a případně ucítíte mírné pálení a/nebo působení tepla. Přístroj bude do 3 sekund připraven pro další impuls a kontrolka na přístroji beurer Velvet Skin Pro bude svítit nepřetržitě zeleně.
5. Zvedněte aplikační okénko z pokožky a umístěte je na další místo testované oblasti.

Upozornění

Stupeň energie zvyšte pouze tehdy, pokud vám předchází stupeň energie není nepříjemný. Pokud je vám již stupeň energie 1 nepříjemný, stupeň energie nezvyšujte.

Upozornění

Upozornění: Můžete použít tlačítko pro automatické rozpoznávání odstínu kůže, aby se automaticky nastavil stupeň energie pro příslušné ošetřované místo. Dbejte na to, aby bylo dodrženo doporučení na základě odstínu vaší kůže. Stupeň energie můžete kdykoliv nastavit.

6. Tlačítkem pro nastavení úrovně energie „+“ můžete zvýšit úroveň energie o stupeň 1. Kontrolka pro úroveň energie se rozsvítí podle zvolené úrovně energie.
Stisknutím spouštěcího tlačítka uvolníte druhý impuls se stupněm energie 2.
7. Kroky 5 a 6 zopakujte pouze tehdy, pokud se cítíte dobře a dokud není dosažen nejvyšší stupeň energie 6. Pokud máte nepříjemný pocit, test ukončete, protože při zvyšování energetických úrovní existuje riziko negativních následků. Test ihned ukončete, pokud zjistíte negativní účinky, např. extrémní zarudnutí nebo tvorba puchýřků.
8. Počkejte 48 hodin a zkontrolujte ošetřené místo na pokožce.
Pokud je pokožka ošetřovaného místa normální (bez reakce nebo jen mírné zarudnutí), můžete pokračovat v kompletním ošetření s nejvyšším stupněm energie, který jste při testu cítili jako příjemný. Pokud při nízkém stupni energie sami zjistíte extrémní zarudnutí, otok nebo tvorbu puchýřků, neprovádějte na tomto místě kompletní ošetření.

Upozornění

Neprovádějte kompletní ošetření se stupněm energie, který jste předem neotestovali!
Testované místo ošetřujte nejdříve 1 týden po provedení testu.

KROK 3: Pro nejlepší výsledky postupujte při epilaci přístrojem beurer Velvet Skin Pro podle plánu

Typický cyklus růstu ochlupení může trvat 18–24 měsíců. Během této může být pro dosažení epilace s dlouhodobým účinkem nutné absolvovat několik ošetření přístrojem Velvet Skin Pro. Účinnost epilace je u jednotlivých lidí různá a závisí na ošetřovaném místě a barvě ochlupení a na tom, jakým způsobem se přístroj beurer Velvet Skin Pro používá.

Typický plán epilace přístrojem beurer Velvet Skin Pro během kompletního cyklu růstu ochlupení:

- První 3–4 epilační ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro by měla být s odstupem přibližně dvou týdnů.
- Další 5–7 epilačních ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro by mělo být s odstupem přibližně čtyř týdnů. Poté budete obvykle používat přístroj beurer Velvet Skin Pro občas a bude-li to zapotřebí, dokud nebude dosaženo výsledků s dlouhodobým účinkem.

Odpovídá to doporučenému plánu ošetřování, pomocí kterého lze prokazatelně dosáhnout nejlepších výsledků. Osobní plán ošetřování si však můžete také vytvořit jinak, a přesto dosáhnete uspokojivých výsledků.

Upozornění

Pokud je stejné místo ošetřováno více krát než jednou za dva týdny, nezlepší se tím výsledky epilace.

Typická následná péče přístrojem beurer Velvet Skin Pro po dosažení epilace s dlouhodobým účinkem:

Kvůli hormonálním nebo jiným fyziologickým změnám může dojít k tomu, že se spící vlasové folikuly stanou aktivními. Proto je možné, že bude občas zapotřebí udržující epilační ošetření jako následná péče přístrojem beurer Velvet Skin Pro.

KROK 4: Připravte ošetřované místo

Před použitím dbejte na to, aby byla pokožka oholená, čistá a suchá (bez jakýchkoli zbytků kosmetických přípravků, např. pudru, krému, make-upu, antiperspirantu nebo deodorantu).

VAROVÁNÍ

Krátce před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro nečistěte pokožku vznětlivými kapalinami, jako je alkohol nebo aceton.

KROK 5: Nastavte intenzitu energie / automatické rozpoznávání odstínu kůže

Stupeň energie

Stupeň energie určuje intenzitu světelného impulzu přístroje beurer Velvet Skin Pro, který je vyslán na vaši kůži (od nejnižšího stupně (-) po nejvyšší (+)). Ukazatel stupňů energie na přístroji ukazuje zvýšení stupně energie. Se zvyšujícím se stupněm energie se rovněž zlepšují výsledky epilace, avšak také riziko možných vedlejších výsledků a komplikací.

První epilační ošetření začněte vždy se stupněm energie, který přístroj na základě rozpoznání odstínu kůže automaticky určil a který potvrdil test snášenlivosti pokožky.

Automatické rozpoznání / měření odstínu kůže

Pomocí automatického rozpoznání odstínu kůže přístroj zobrazí intenzitu energie vhodnou pro váš typ pleti.

Upozornění

- V zájmu bezpečnosti volte vždy nejtmaší místo na pokožce (např. vnější strana holeně, hřbet ruky, atd.)

Důležité: Před použitím přístroje na jiném místě musíte provést nové měření.

- V režimu rozpoznávání odstínu kůže přístroj nevysílá žádné světelné impulzy.
- Jestliže budete chtít rozpoznávání odstínu kůže předčasně ukončit, můžete se stisknutím jednoho z tlačítek pro nastavení úrovně energie (+ nebo -) opět vrátit do normálního režimu.

Pokud během prvního epilačního ošetření, které provedete s doporučeným stupněm energie, nepocítíte žádné podráždění nebo jen velmi lehké, a to i po ošetření, můžete při každém dalším ošetření energii zvýšit o 1 stupeň.

VAROVÁNÍ

Stupeň energie nezvyšujte, pokud během ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro a po něm zpozorujete abnormální bolesti! (Viz „Krok 6 Seznámení se s možnými vedlejšími účinky“)

Během jednoho epilačního ošetření nezvyšujte stupeň energie ani tehdy, pokud žádné potíže nepocítujete.

Podráždění se může vyskytnout také nějakou dobu po použití.

KROK 6: Seznámení s možnými vedlejšími účinky při použití přístroje beurer Velvet Skin Pro

Pokud používáte přístroj beurer Velvet Skin Pro podle pokynů v tomto návodu k použití, jsou vedlejší účinky a komplikace související s používáním přístroje beurer Velvet Skin Pro vzácné. Nicméně každé

kosmetické ošetření, včetně metod, které byly vyvinuty pro domácí použití, je spojeno s jistým rizikem. Proto je důležité, abyste pochopili a akceptovali možná rizika a možné komplikace, které mohou nastat u domácích epilacních systémů se světelnými impulzy.

Komplikace	Pravděpodobnost komplikace	Vedlejší účinek	Pravděpodobnost vedlejšího účinku
Působení několika impulzů na stejném místě pokožky	Nízká	Mírné podráždění pokožky	Nízká
		Zarudnutí pokožky	Nízká
		Zvýšená citlivost pokožky	Nízká
		Poranění pokožky a popáleniny	Vzácný výskyt
		Tvorba jizev	Vzácný výskyt
		Pigmentové změny	Vzácný výskyt
		Nadměrné zarudnutí a otok	Vzácný výskyt
		Infekce	Zanedbatelný výskyt
Modřiny	Zanedbatelný výskyt		

Mírná bolest pokožky

I když je systém domácí epilace pomocí světelných impulzů obecně velmi dobře snášen, většina uživatelů pociťuje při těchto aplikacích mírně nepříjemné pocity, které jsou obvykle popisovány jako pocit mírného bodání na ošetřované kůži. Pocit bodání obvykle přetrvává během samotné doby použití nebo několik minut po tomto použití. Vše, co je za hranicí tohoto mírně nepříjemného pocitu, však není běžné a znamená to, že byste buď neměli pokračovat s používáním přístroje beurer Velvet Skin Pro, protože epilacní aplikace není pro vás vhodná, nebo že je nastavení stupně energie příliš vysoké.

Zarudnutí pokožky

Vaše pokožka může ihned po použití přístroje beurer Velvet Skin Pro nebo do 24 hodin po použití zarudnout. Zarudnutí obvykle do 24 hodin zmizí. Pokud toto zarudnutí nezmizí do 2 až 3 dnů, vyhledejte lékaře.

Zvýšená citlivost pokožky

Pokožka ošetřované plochy je citlivější, takže se můžete setkat s případem vysušení nebo odlupování pokožky.

Poranění pokožky a popáleniny

Velmi zřídka může po ošetření dojít k popáleninám nebo k poranění pokožky. Hojení těchto popálenin nebo ran může trvat několik týdnů a velmi zřídka může zůstat viditelná jizva.

Tvorba jizev

Přestože je tento jev velice vzácný, někdy se může objevit trvalé zjizvení. Obvykle má toto zjizvení formu ploché, bílé léze na pokožce (hypotrofické).

Toto zjizvení však také může být široké a červené (hypertrofické) nebo může být široké a může přesahovat okraje poranění (keloidní). Pro zlepšení vzhledu jizvy je rovněž možné, že bude zapotřebí provést následné estetické úpravy.

Pigmentové změny

Přístroj beurer Velvet Skin Pro se zaměřuje na stvol chloupku, zvláště na pigmentové buňky ve vlasovém folikulu a na samotný vlasový folikul.

Přesto u okolní pokožky existuje riziko vzniku hyperpigmentace (zvýšená pigmentace nebo hnědění zbarvení) nebo hypopigmentace (vyblednutí). Toto riziko změn pigmentace pokožky je vyšší u lidí s tmavší pokožkou. Obvykle se jedná o zbarvení nebo pigmentové změny pokožky, které mají dočasný charakter, permanentní hyperpigmentace nebo hypopigmentace se vyskytuje jen vzácně.

Nadměrné zarudnutí a otok

Ve výjimečných případech může dojít k velkému zarudnutí a otoku ošetřované pokožky. K tomuto jevu dochází častěji na citlivých místech těla. Zarudnutí a otoky by měly ustoupit do 2 až 7 dnů a je třeba je ošetřovat pomocí častého přikládání ledu. Pokožku můžete jemně omývat, avšak měli byste se vyvarovat vystavování pokožky slunci.

Infekce

Infekce pokožky je mimořádně vzácná, ale přesto představuje možné riziko jako následek popálenin nebo poranění pokožky, které byly způsobeny použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro.

Modřiny

Použití přístroje beurer Velvet Skin Pro může velmi zřídka vést k modřinám, které mohou přetrvávat po dobu 5 až 10 dnů. Jakmile modřiny vyblednou, může se objevit rezavě hnědé zbarvení pokožky (hyperpigmentace), které může být trvalé.

KROK 7: Co mohu očekávat od ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro?

Pro mnoho uživatelů může použití přístroje beurer Velvet Skin Pro znamenat jejich první zkušenost s tímto zařízením, které funguje na bázi světla a které je určeno pro domácí použití. Použití přístroje beurer Velvet Skin Pro je jednoduché a epilační ošetření probíhají velmi rychle. Během ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro je běžné, pokud nastanou následující jevy:

- **Hluk ventilátoru** – Chladicí ventilátor přístroje beurer Velvet Skin Pro produkuje zvuk, který je podobný vysoušeči vlasů. Tento jev je normální.
- **Praskající zvuk během každého impulsu** – Pokud je aktivován impuls přístroje beurer Velvet Skin Pro, je normální, pokud současně se zábleskem světla uslyšíte praskající zvuk.
- **Mírný tlak aplikačního okénka** – Tento jev je nezbytný a užitečný pro lokalizaci vedlejších světelných impulsů a je součástí bezpečnostní funkce přístroje beurer Velvet Skin Pro.
- **Pocit tepla a brnění** – Během každého světelného impulsu je zcela normální, když máte mírný pocit tepla a brnění proudícího ze světelné energie. Pamatujte, že je důležité, abyste při prvních epilačních ošetřeních používali vždy nízké stupně energie. Určité teplo můžete pociťovat až hodinu po použití přístroje beurer Velvet Skin Pro.
- **Mírně červené nebo růžové zbarvení pokožky** – Během ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro nebo bezprostředně po něm není neobvyklé, pokud pozorujete velmi mírné, růžové zbarvení pokožky. Toto zbarvení je obvykle nejvýraznější v okolí samotných chloupků. Pokud však pozorujete plné červené zbarvení pokožky (zarudnutí), tvorbu puchýřků nebo popáleniny, okamžitě používání přístroje beurer Velvet Skin Pro přerušte.

8. Používání přístroje beurer Velvet Skin Pro

VAROVÁNÍ

Pokud chcete používat přístroj v oblasti obličeje, přečtěte si nejdříve pokyny v kapitolách 8.2 až 8.3 a poté pokračujte kapitolou 8.1 „První použití“.

8.1 První použití

1. Vyměňte přístroj z obalu.
2. Zkontrolujte, zda přístroj, síťová zástrčka, nástavce nebo kabel nejsou poškozeny.
3. Připojte přístroj k síti.
4. Před použitím přístroj nabijte (doba nabíjení je cca 2 hodiny).


Upozornění

Před použitím dbejte na to, aby byla pokožka oholená, čistá a suchá (bez jakýchkoli zbytků kosmetických přípravků, např. pudru, krému, make-upu, antiperspirantu nebo deodorantu).

Pokud byste měli pocit, že je přístroj nepříjemně horký, nechtejte ho na několik minut vychladnout. Po krátké přestávce na zchlazení můžete v ošetření pokračovat jako obvykle.

VAROVÁNÍ

Krátce před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro nečistěte pokožku vznětlivými kapalinami, jako je alkohol nebo aceton.

5. Stiskněte vypínač a vypněte přístroj.
6. Tlačítka +/- vyberte správný stupeň energie pro odstín vaší kůže nebo použijte automatické rozpoznávání odstínu kůže ()
7. Přístroj přiložte v úhlu 90 stupňů ke kůži tak, aby na ni nástavec kompletně dolehl. Integrovaný snímač kontaktu s pokožkou zabrání nechtěným světelným impulzům bez kontaktu s kůží.
8. Kontrolka na zadní straně přístroje svítí zeleně, což znamená, že můžete pokračovat s ošetřováním.
9. Stiskněte spouštěcí tlačítko pro vyslání světelného impulzu.
10. Přístroj je vybaven režimem „Auto-Flash“. Jestliže přidržíte spouštěcí tlačítko po dobu 3 po sobě následujících světelných impulzů, aktivuje se tento režim. Přístroj nyní bez dalšího stisknutí spouštěcího tlačítka automaticky vysílá světelné impulzy, dokud má dostatečný kontakt s pokožkou.

Upozornění

Pokud stisknete *spouštěcí tlačítko* a vaše pokožka je příliš tmavá nebo příliš opálená, rozsvítí se *kontrolka* na přístroji červeně. V tomto případě přístroj na tomto místě pokožky neuvolní žádný impulz.

Pokud přístroj nemá dostatečný kontakt s pokožkou, rozsvítí se po stisknutí spouštěcího tlačítka kontrolka na přístroji oranžově. V tomto případě přístroj rovněž neuvolní žádný impulz.

VAROVÁNÍ

Neošetřujte stejnou plochu pokožky častěji než jednou během jednoho epilačního ošetření!
 Vícenásobným ošetřením jedné plochy pokožky během jednoho epilačního ošetření se může zvýšit pravděpodobnost vedlejších účinků.

Pokuste se zabránit tomu, aby se impulzy překrývaly.

Upozornění

Impulzy přístroje beurer Velvet Skin Pro by měly být aplikovány v řadách – počínaje na jednom konci každé řady a s postupným pokračováním směrem ke druhému konci. Tato technika umožňuje lepší kontrolu již ošetřených ploch pokožky a pomáhá vám vyhnout se několikanásobnému ošetření stejné plochy nebo ošetření překrývajících se ploch pokožky. *Světelná plocha* přístroje beurer Velvet Skin Pro je koncipována tak, že jsou na ošetřované ploše pokožky krátkodobě zanechávána otačená místa. Tato viditelná otačená místa můžete využít pro přesné umístění dalšího impulzu.

11. Zvedněte přístroj z pokožky a umístěte ho na další ošetřované místo. Při přemístění dbejte na to, aby nedošlo ke vzniku mezer nebo k překrývání ošetřované pokožky. Přístroj se ihned znovu nabije a je do 3 sekund (na nejvyšší stupeň) připraven na další impulz (kontrolka na přístroji svítí opět nepřetržitě zeleně). Postup zopakujte, dokud nebude ošetřena celá plocha pokožky.

Po ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro

- Když dokončíte epilační ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro, vypněte přístroj stisknutím vypínače.
- Po každém epilačním ošetření doporučujeme vyčistit přístroj beurer Velvet Skin Pro, zejména *světelnou plochu*, (viz kapitola „9.1 Čištění přístroje beurer Velvet Skin Pro“).

- Po vyčištění se doporučuje uložit přístroj beurer Velvet Skin Pro do originální krabice a uchovávat jej mimo dosah vody.

8.2 Ošetření obličeje

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro v obličeji na vyšší stupeň energie než 3. Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro v obličeji nad lícními kostmi nebo na očích, obočí a řasách, protože to může vést k závažnému poškození zraku. Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro během těhotenství ani v době kojení. Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.

Plet obličeje je velmi citlivá a vyžaduje mimořádnou péči. Bezpodmínečně dodržujte všechny varovné a bezpečnostní pokyny v tomto návodu k použití, abyste zabránili negativním následkům. Doporučujeme napřed provést ošetření těla a s přístrojem se seznámit dříve, než přejdete k ošetření obličeje.

Pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro můžete ošetřovat všechny zóny obličeje pod lícními kostmi jako například horní ret, tvář, čelist, bradu a krk.

Upozornění

Pro jednodušší ošetření obličeje můžete použít přiložený přesný nástavec. Tento nástavec zmenšuje světelnou plochu a umožňuje přesnější ošetření. Přesný nástavec snadno upevníte na světelnou plochu nasazením na horní část přístroje.

Přesný nástavec upevněte tak, aby se v nástavci nacházel příslušný otvor pro snímač kontaktu s pokožkou / snímač typu pleti. Pokud by byl snímač kontaktu s pokožkou / snímač typu pleti zakrytý, není možné spuštění světelného impulzu. Přesný nástavec používejte jen na max. stupeň energie 3 a pouze tehdy, pokud máte odstín pleti světlejší než je typ pleti 5.

Přesný nástavec nepoužívejte déle než pro 80 impulzů za sebou.

Hrozí nebezpečí, že se červený filtr příliš zahřeje a mohl by způsobit popáleniny.



1. 48 hodin před ošetřením bezpodmínečně proveďte bodový test snášenlivosti pokožky (viz kapitola 7, krok 2). Test snášenlivosti pokožky by měl být proveden na ploše bez ochlupení, jako například pod uchem nebo ze strany na krku, abyste zjistili vhodný stupeň energie.

VAROVÁNÍ

Testovanou plochu ošetřujte nejdříve 1 týden po provedeném testu snášenlivosti pokožky.

Upozornění

Ochlupení obličeje může být hormonálně podmíněno, takže pro trvalou redukci ochlupení může být zapotřebí více ošetření.

8.3 Péče po ošetření obličeje

- Naneste na obličej uklidňující tělové mléko, například s aloe vera.
- Nejméně 24 hodin se vyhněte použití peelingového nebo bělicího krému či podobných produktů, protože by to vedlo k podráždění ošetřené pokožky.
- Nejméně 48 hodin po ošetření se vyhněte přímému slunečnímu záření v délce trvání více než 15 minut. Pokud je nedávno ošetřovaná pokožka během tohoto období vystavena slunečnímu světlu, musíte bezpodmínečně nanést ochranu proti slunci s faktorem SPF 30 nebo vyšším.
- Vyhněte se tomu, abyste ochlupení na ošetřovaných plochách odstraňovali voskem nebo vytrháváním.

Nezapomeňte na to, že může trvat celý cyklus růstu ochlupení, než se objeví kompletní výsledky epilace.

9. Péče o přístroj beurer Velvet Skin Pro

9.1 Čištění

Po každém epilacním ošetření doporučujeme vyčistit přístroj beurer Velvet Skin Pro, zvláště pak *světelnou plochu*.

POZOR

Nikdy nevkládejte přístroj beurer Velvet Skin Pro ani žádnou z jeho částí do vody!

- Použijte suchou, čistou utěrku a čisticí prostředek, který byl speciálně vyvinutý pro elektronické přístroje. Jemně otřete povrch přístroje beurer Velvet Skin Pro a zvláště pak povrch světelné plochy.

10. Odstraňování chyb

„Přístroj beurer Velvet Skin Pro nelze zapnout“

- Ujistěte se, že je akumulátor přístroje nabitý (podle zelené kontrolky ukazatele stavu nabití akumulátoru).
- Pokud přístroj IPL nevysílá žádný světelný impuls, zkontrolujte, zda
 - a. je nástavec řádně upevněn na přístroji (přístroj nefunguje, pokud tento nástavec není upevněn nebo je upevněn nesprávně).
 - b. je přístroj stále v automaticky aktivovaném bezpečnostním režimu po zjištění nedostatečného kontaktu s pokožkou nebo nepřipustného odstínu kůže.
 - c. má přístroj dostatečný kontakt s pokožkou.
 - d. ošetřované místo není příliš malé, vyklenuté nebo kostnaté. Aplikační okénko musí zcela doléhat na ošetřované místo (pokuste se kůži napnout).
 - e. je vysílání světelného impulsu zablokováno, když přístroj IPL rozpoznal příliš tmavý odstín kůže. V tomto případě se kontrolka krátce rozsvítí červeně.
 - f. V případě bezpečnostních problémů a při dosažení provozní životnosti svítí kontrolka červeně. Přístroj se pak automaticky vypne.
- Obecné závady:
 - a. Aplikační okénko je nutné vyčistit podle pokynů v příslušné kapitole, jestliže je zanesené špínou nebo prachem. obraťte se na zákaznický servis, pokud nebudete schopni znečištění odstranit sami.
 - b. Pokud jsou světelné signály po změně místa ošetření vysílány se zpožděním, použijte přístroj případně v chladnějším prostředí. Vysílání světelných impulsů se za určitých okolností zpomaluje při vyšších teplotách okolí.
 - c. Pokud se objeví obecná závada, vypněte přístroj, počkejte deset sekund a opět ho zapněte.
- Pokud máte s přístrojem problémy i nadále, obraťte se na zákaznický servis.

11. Často kladené otázky

1. Opravdu přístroj beurer Velvet Skin Pro funguje?

Ano. Klinické lékařské studie prokázaly, že technologie používaná v přístroji beurer Velvet Skin Pro přispívá k dosažení dlouhodobých výsledků epilace. Výsledky se však mohou lišit podle cyklu růstu ochlupení; použitého stupně energie a tloušťky a barvy chloupků.

2. Kde všude na svém těle mohu používat přístroj beurer Velvet Skin Pro?

Přístroj beurer Velvet Skin Pro byl navržen pro epilaci celého těla. Mezi nejčastější oblasti, které jsou ošetřovány přístrojem beurer Velvet Skin Pro, patří nohy, podpaží, paže, třísla a obličej pod lícními kostmi.

3. Jak dlouho trvá jedno ošetření pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro?

Tato doba se liší v závislosti na ošetřované části těla. Ošetření celého těla (nohy, paže, podpaží, třísla a obličej pod lícními kostmi) trvá přibližně 21 minut při použití nejnižšího stupně energie a velkého nástavce.

4. Je přístroj beurer Velvet Skin Pro bezpečný?

Přístroj beurer Velvet Skin Pro byl navržen s mimořádným ohledem na bezpečnost a používá klinicky testovanou technologii. Avšak stejně jako u každého jiného produktu či elektronického přístroje aplikovaného na pokožce musí být použit v souladu s pokyny pro použití a bezpečnostními pokyny pro uživatele.

5. Je použití přístroje beurer Velvet Skin Pro bolestivé?

Při správném použití uvádí většina uživatelů přístroje beurer Velvet Skin Pro pocity mírného tepla v okamžiku světelného impulzu. Uživatelé s hustším a tmavším ochlupením mohou pociťovat mírně větší nepříjemnosti, avšak tyto nepříjemné pocity ihned po ukončení epilacního ošetření ustoupí. Přístroj beurer Velvet Skin Pro má 6 stupňů nastavení energie, které lze použít v závislosti na vaší citlivosti.

6. Jak často mám přístroj beurer Velvet Skin Pro používat?

Epilacní ošetření pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro by měla být u prvních čtyř ošetření prováděna ve dvoutýdenních intervalech. Páté až sedmé ošetření včetně by mělo následovat v intervalu čtyř týdnů. Všechna další ošetření byste měli provádět tehdy, pokud ochlupení doroste a nebude dosaženo požadovaných výsledků.

Při ošetření ochlupení v obličeji pod lícními kostmi byste měli prvních šest ošetření provádět ve dvou-týdenních intervalech. Sedmé až dvanácté ošetření včetně by mělo proběhnout v intervalu čtyř týdnů. Všechna další ošetření byste měli provádět tehdy, pokud ochlupení doroste a nebude dosaženo požadovaných výsledků.

7. Je přístroj beurer Velvet Skin Pro účinný v případě bílého, šedého nebo světlého ochlupení?

Přístroj beurer Velvet Skin Pro funguje nejlépe u tmavších typů ochlupení nebo u chloupků, které obsahují více melaninu. Melanin je pigment, který ochlupení a pokožce propůjčuje barvu a absorbuje světelnou energii. Černé a tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe. Hnědé a světle hnědé ochlupení reaguje také, avšak obvykle vyžaduje větší počet epilacních ošetření. Jistý účinek lze pozorovat u zrza-vého ochlupení. Bílé, šedé nebo světlé ochlupení obvykle na přístroj beurer Velvet Skin Pro nereaguje, přestože někteří uživatelé pozorovali výsledky po několika epilacních ošetřeních.

8. Mohu používat přístroj beurer Velvet Skin Pro na hnědé nebo černé pokožce?

Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro na přirozeně tmavé pokožce! Nebude fungovat! Přístroj beurer Velvet Skin Pro funguje na bázi světla a odstraňuje nežádoucí ochlupení pomocí selektivního ošetření vlasového pigmentu. Různé množství pigmentu se dále nachází v okolní tkáni kůže. Množství pigmentu v pokožce určité osoby, které se projevuje barvou pokožky, určuje míru rizika, kterému je tato osoba při použití přístroje beurer Velvet Skin Pro vystavena. Ošetření tmavé pokožky pomocí epilace fungující na bázi světla může mít škodlivé následky, jako například popáleniny, puchýřky a změny barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace). V přístroji beurer Velvet Skin Pro je zabudován *snímač typu pleti*, který provádí měření ošetřované pokožky na začátku každého ošetření a příležitostně během ošetření. *Snímač typu pleti* zabrání dalšímu vysílání impulzů přístrojem beurer Velvet Skin Pro, jakmile zjistí, že se přístroj používá na tmavší pokožce.

9. Kdy uvidím první výsledky po ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro?

Stejně jako u jiných epilacních přístrojů, které fungují na bázi světla nebo laseru, nejsou výsledky vidět ihned a mohli byste si dokonce myslet, že se vůbec nic nestalo. Někdy se zdá, že ochlupení po epilacním ošetření opět naroste, ale obvykle po dvou týdnech mnoho z těchto chloupků jednoduše vypadne. Kromě toho ochlupení roste ve třech různých fázích a epilace přístrojem beurer Velvet Skin Pro bude mít vliv pouze na ochlupení v aktivní fázi růstu. To je jeden z hlavních důvodů, proč je pro dosažení požadovaného výsledku zapotřebí více ošetření.

10. Mohou muži používat přístroj beurer Velvet Skin Pro?

Přestože byl přístroj beurer Velvet Skin Pro vyvinut pro ženy, může být vhodný také pro muže. Ochlupení mužů, zvláště pak ochlupení na hrudi, bude však pro dosažení požadovaných výsledků vyžadovat větší počet epilacních ošetření než ochlupení žen.

11. Proč mé ochlupení roste, přestože byla epilace provedena před týdnem?

Může se zdát, jakoby chloupky stále rostly až dva týdny po epilacním ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro. Tento proces je znám jako „vypuzení“ a přibližně po dvou týdnech zjistíte, že tyto chloupky

jednoduše vypadnou nebo je můžete vytáhnout jemným škusnutím. (Přesto nedoporučujeme chloupky vyťahovat – nechte je jednoduše vypadnout přirozenou cestou.) Je také možné, že některé chloupky nebudou z důvodu vynechání aplikace nebo různých fází růstu přístrojem beurer Velvet Skin Pro ovlivněny. Toto ochlupení bude předmětem následujících ošetření a to je důvod, proč je pro dosažení nejlepšího výsledku zapotřebí několika epilačních ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro.

12. Slyšela jsem, že některé chloupky po epilaci založené na bázi světla narostou znovu v tenčí a jemnější podobě. Je to pravda?

Tento jev byl podrobně zdokumentován dermatology a lékaři, kteří používají pro epilaci světelná a laserová zařízení. Je možné, že některé chloupky dorostou po epilaci přístrojem beurer Velvet Skin Pro v tenčí a jemnější podobě. Obvykle se jedná o zlomek chloupků, které zde byly původně, a pokračující ošetření na ně může mít požadovaný účinek.

13. Proč nelze provést ošetření, pokud mám „aktivní“ opálení?

Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro na opálené pokožce nebo po vystavení pokožky slunečnímu záření. Opálená pokožka, zvláště po vystavení slunečnímu záření, obsahuje velké množství pigmentu melaninu. Platí to pro všechny typy a odstíny pokožky, včetně těch, které nehnědnou příliš rychle. Přítomnost velkého množství melaninu vystavuje pokožku vyššímu riziku vzniku nežádoucích následků v souvislosti s použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro včetně popálenin, puchýřků a změn barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace).

14. Je dlouhodobé používání přístroje beurer Velvet Skin Pro nebezpečné pro mou pokožku?

Používání světelné a laserové energie v estetické medicíně je po dobu více než 15 let podrobně dokumentováno v profesionálních, experty prověřených odborných časopisech a v uznávaných institucích, jako je Mayo Klinik. Tyto časopisy a instituce neinformovaly o žádných vedlejších účincích nebo poškozeních v důsledku dlouhodobého používání světelných nebo laserových zařízení.

15. Mohu použít přístroj beurer Velvet Skin Pro k odstraňování chloupků na tváři nebo jiných částech těla?

Přístroj beurer Velvet Skin Pro **se může používat** k ošetření ochlupení v obličejí pod lícními kostmi. Při používání na obličejí je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byly vynechány oční partie: přístroj beurer Velvet Skin Pro nelze v žádném případě používat kolem očí nebo na očích. A stejně jako u ostatních částí těla by se mělo před ošetřením pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro i po něm zabránit vystavení pokožky slunečnímu záření. Akceptovanými prostředky na ochranu proti slunečnímu záření jsou dostatečně zakrývající oděv nebo krémy na opalování (SPF minimálně 30), které jsou nošeny nebo používány před ošetřením a po něm.

16. Jak dlouho mám počkat s ošetřením pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro po nechráněném vystavení pokožky slunečnímu záření?

Před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro po nechráněném vystavení pokožky slunci by se měla dodržet časová lhůta 2 týdnů. Pokud si přesto nejste jisti ohledně vystavení pokožky slunečnímu záření, obraťte se na svého lékaře.

17. Mám před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro udělat něco zvláštního?

Před každým ošetřením pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro je důležité vyvarovat se vystavení ošetřované části na pokožce slunečnímu záření po dobu nejméně 2 týdnů. Pomocí může vysoká úroveň UV opalovacího krému (SPF 30+) a oděv, který zakrývá ošetřovanou plochu. Plocha pokožky, která bude ošetřovaná, by měla být kromě toho umyta jemným mýdlem a vodou a chloupky by měly být oholeny až k povrchu pokožky.

18. Jak mám pečovat o ošetřenou plochu pokožky po použití přístroje beurer Velvet Skin Pro?

Plochu ošetřenou pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro lze mýt a ošetřovat pomocí standardních produktů pro péči o pleť. Zvláště je nutné dbát na to, aby nedošlo k nechráněnému vystavení slunečnímu záření. Vhodnou protisluneční ochranu tvoří opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem (30+) a dostatečně zakrývající oděvy.

12. Likvidace

Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.

Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,

Cd = baterie obsahuje kadmium,

Hg = baterie obsahuje rtuť.



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

Akumulátor přístroje se likviduje samostatně. Akumulátor se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem.

Pro informace o likvidaci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo příslušný úřad, který má likvidaci na starost.








13. Technické údaje




Typu	IPL 8500	
Ošetřovaná plocha	4,5 cm ² / přesný nástavec 2 cm ²	
Technologie	IPL (Intense Pulsed Light) pro domácí použití	
Vlnová délka	475 – 1 200 nm (velký nástavec), 550 – 1 200 nm (přesný nástavec)	
Max. energetická úroveň	max. 5 J/cm ²	
Volitelné stupně energie	6	
Rychlost	1 impulz v intervalu max. 3 sekund (na nejvyšší stupeň)	
Max. počet impulzů	300 000	
Rozměry	cca 200 × 175 × 65 mm	
Hmotnost	cca 480 g	
Teplota	Provoz	10–40 °C
	Skladování	-10–70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	Provoz	30–70 % rel. vlh.
	Skladování	0–90 % rel. vlh. při 55 °C (nekondenzující)
Akumulátor	lithium-iontový akumulátor, 7,4 V, 2 500 mAh	
Počet impulzů na jedno nabití	550 záblesků	

14. Síťový adaptér

Číslo modelu	YJS024Y-1201800
Vstup	100–240 V ~ 50/60 Hz, 500 mA
Výstup	12 V 1,8 A
Ochrana	dvojitá izolační ochrana
Polarita	
Klasifikace	Třída ochrany II

Tabulka barev ochlupení a typů pokožky /

Typ pokožky / Ochlupení	I	II	III	IV	V	VI
Černé 	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Tmavo-hnědé 	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Hnědé 	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Tmavý blond 	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Světlý blond 	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Zrzavé 	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Šedé/ bílé 	✗	✗	✗	✗	✗	✗

- CZ** * Zvolte stupeň energie především podle svých osobních pocitů.
 ** Čím vyšší bude stupeň energie, tím efektivnější bude ošetření

Tělo |



Obličej |

