



CS	Epilace	
	Návod k použití.....	2
SK	Epilácia	
	Návod na obsluhu.....	23



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

VAROVÁNÍ

- Příklad: Přístroj a adaptér jsou určeny pouze pro domácí nebo soukromé použití, nikoli pro komerční oblast.
- Příklad: Přístroj není vhodný pro osoby mladší 18 let.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Před každým použitím zkontrolujte neporušenost přístroje a síťového kabelu. Je-li přístroj poškozen, nesmí být používán.
- Příklad: Přístroj ani adaptér nesmí být mokré.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, umyvadel, sprch či jiných nádrží s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nikdy se nedívejte do světla.
- Do přístroje nezasunujte žádné předměty.
- Dbejte na to, aby nebyly ventilační štěrby přístroje zakryté.
- Nedotýkejte se žádných vnitřních součástí, jestliže je přístroj poškozen, abyste se vyvarovali úrazu elektrickým proudem.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru. Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, jemné terapie, masáže, vzduchu i péče o krásu.

S pozdravem
Váš tým Beurer

Obsah

1. Obsah balení.....	3
2. Vysvětlení symbolů.....	3
3. Použití v souladu s určením.....	4
4. Varovné a bezpečnostní pokyny	5
5. Co je přístroj beurer Velvet Skin Pro?	8
6 . Popis přístroje.....	9
7. Uvedení do provozu	10
KROK 1: Zkontrolujte, zda je pro vás přístroj beurer Velvet Skin Pro vhodný.....	10
KROK 2: Test snášenlivosti pokožky.....	10
KROK 3: Pro nejlepší výsledky postupujte při epilaci přístrojem beurer Velvet Skin Pro podle plánu	11
KROK 4: Připravte ošetřované místo	12
KROK 5: Nastavte intenzitu energie / automatické rozpoznávání odstínu kůže	12
KROK 6: Seznámení s možnými vedlejšími účinky při použití přístroje beurer Velvet Skin Pro.....	13
KROK 7: Co mohou očekávat od ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro?	14
8. Použití.....	15
8.1 První použití.....	15
8.2 Ošetření obličeje	16
8.3 Péče po ošetření obličeje.....	17
9. Čištění a údržba.....	17
10. Co dělat v případě problémů?	18
11. Často kladené otázky.....	18
12. Likvidace	20
13. Technické údaje	21
14. Záruka/servis	22

1. Obsah balení



Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se jistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny eškeré obaly.
















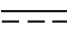
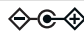


V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 x beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 x přesný nástavec
- 1 x síťový adaptér
- 1 x návod k použití
- 1 x úložné pouzdro

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

 VAROVÁNÍ	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
 POZOR	Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství

 Upozornění	Upozornění na důležité informace
 NEBEZPEČÍ	Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana). Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Dodržujte návod k použití
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 2.
	Pozor: optické záření
	Používejte pouze v uzavřených prostorech
	Chraňte před vlhkem!
	Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od očí!
	Nepoužívejte na opálenou pokožku nebo po vystavení pokožky slunečnímu záření.
	Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
	Značka CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Certifikační značka pro výrobky, které jsou vyváženy do Ruské federace a do Společenství nezávislých států.
 PAP	Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.
 Storage / Transport	Přípustná teplota a vlhkost vzduchu při přepravě a skladování
	Výrobce
	Stejnsměrný proud Přístroj je vhodný pouze pro stejnosměrný proud
	Polarita
	Energetická účinnost 6
 Pb Cd Hg	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.

3. Použití v souladu s určením

Přístroj beurer Velvet Skin Pro je určen k odstraňování nežádoucího ochlupení na těle dospělých. Ideálními místy na těle pro použití přístroje beurer Velvet Skin Pro jsou nohy, podpaží, třísla, hrudník, břicho a u žen obličej pod lícními kostmi. Přístroj není určen k odstraňování ochlupení na řitním otvoru, na genitáliích nebo prsních bradavkách. Používejte přístroj pouze v souladu s návodem k použití.

4. Varovné a bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a při používání přístroje beurer Velvet Skin Pro je přesně dodržujte. Nedodržení následujících pokynů může vést k poranění nebo k věcným škodám. Uchovejte tento návod k použití a poskytněte ho dalším uživatelům. Při předání přístroje třetím osobám dbejte na to, aby byl přiložen tento návod k použití.

- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze v případě, pokud jsou pod přiměřeným dohledem nebo pokud byly podrobně poučeny odpovědnou osobou.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro během těhotenství ani v době kojení.
- Pokud zjistíte na pokožce extrémní zarudnutí, tvorbu puchýřků nebo popáleniny, OKAMŽITĚ PŘERUŠTE POUŽÍVÁNÍ!
- 48 hodin před prvním použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro proveďte test snášenlivosti pokožky na malém kousku pokožky v zamýšlené ošetřované zóně (viz kapitola 7, krok 2: „Test snášenlivosti pokožky“).
- V žádném případě se nedívejte přímo do světla vystupujícího z IPL lampy. Tento produkt může vyzařovat nebezpečné optické záření. Dbejte na to, aby světelná plocha nástavce byla zcela v kontaktu s pokožkou.
- Nikdy se nepokoušejte vysílat světelný impuls do vzduchu!
- Pomocí tabulky barev ochlupení a typů pokožky na zadní straně tohoto návodu k použití zjistěte, které intenzity světla jsou nejvhodnější pro typ vaší pokožky a barvu vašeho tělesného ochlupení, resp. zda je tato metoda pro vás vůbec vhodná (pokud ne, bude tato skutečnost uvedena symbolem „X“ v tabulce).
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro na přirozeně tmavé pokožce. Ošetření tmavé pokožky pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro může mít škodlivé následky, jako například vznik popálenin, puchýřků a změny barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace).
- Přístroj beurer Velvet Skin Pro funguje nejlépe u tmavějších typů ochlupení nebo u chloupků, které obsahují více melaninu. Černé a tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe, a přestože hnědé a světle hnědé ochlupení bude reagovat také, potřebuje obvykle více epilačních ošetření. Zrzavé ochlupení by mohlo vykazovat reakci. Bílé, šedé nebo světlé ochlupení obvykle na přístroj beurer Velvet Skin Pro nereaguje, přestože někteří uživatelé pozorovali výsledky po několika epilačních ošetřeních.
- Přístroj beurer Velvet Skin Pro může způsobit přechodnou pigmentaci.
- Nepokoušejte se otevírat či opravovat přístroj beurer Velvet Skin Pro. Při otevření přístroje beurer Velvet Skin Pro se můžete dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi nebo s impulzní světelnou energií, což může vést k vážným poraněním nebo k trvalému poškození zraku.

NEBEZPEČÍ

Přístroj beurer Velvet Skin Pro chraňte před kontaktem s vodou! beurer Velvet Skin Pro je elektrický přístroj. Nepokládejte jej do vody ani jej nenechte do vody či jiných kapalin spadnout.



Mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem!

- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud se právě koupete.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud je vlhký nebo mokrý.
- Nesahejte pro přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud spadne do vody.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky a přístroje mokřými rukama!

Pokyny pro zacházení s akumulátory

- Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Chraňte akumulátory před nadměrným teplem.
- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.

- Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním zcela nabijte akumulátor.
- Pro dosažení co nejdéší životnosti akumulátoru ho plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.

POZOR

Jak zabránit škodám

- Nepokoušejte se otevírat či opravovat přístroj beurer Velvet Skin Pro. Pokus o otevření přístroje beurer Velvet Skin Pro může způsobit poškození přístroje a povede k zániku jeho záruky.
- Nevystavujte přístroj během použití teplotám do 10 °C nebo nad 40 °C.
- Přístroj by neměl být nikdy ponechán bez dozoru, pokud je síťový adaptér zapojen do zásuvky.
- Používejte přístroj beurer Velvet Skin Pro pouze k určenému účelu použití a tak, jak je popsáno v návodu k použití.
- Neuvádějte přístroj beurer Velvet Skin Pro do provozu, pokud je kabel nebo zásuvka poškozená a udržujte síťový kabel v dostatečné vzdálenosti od zahřátých povrchů.
- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku přístroje beurer Velvet Skin Pro ze zásuvky.
- Po nabití akumulátoru vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro s nastavci nebo s příslušenstvím, které nebyly doporučeny společností beurer GmbH.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud během použití vidíte nebo cítíte kouř.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud správně nefunguje nebo pokud se zdá být poškozený.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud je snímač typu pleti pod světelnou plochou prasklý nebo zlomený.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud je vnější kryt prasklý nebo se rozpadá.
- Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud je světelná plocha prasklá nebo zlomená či úplně chybí.
- Neuvádějte přístroj beurer Velvet Skin Pro do provozu, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka.
- Přístroj nabíjejte pouze s dodávaným adaptérem.
- Nepoužívejte přístroj, jestliže je poškozený UV filtr u otvoru výstupu světla.
- Nepoužívejte přesný nástavec, jestliže je poškozený filtr.
- Dbejte na to, aby byl zajištěn ničím nerušený proud vzduchu větracími otvory.

VAROVÁNÍ

V žádném případě nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud trpíte jednou z následujících nemocí:

- Pokud máte nebo pokud jste měli rakovinu kůže.
- Pokud trpíte epilepsií.
- Pokud máte keloidní jizvy.
- Pokud máte herpes nebo lupénku.
- Pokud jste fotosenzitivní nebo trpíte jinou citlivostí na světlo jako například porfyrie, polymorfní světelná erupce, světelná urtikaria (kopřivka), lupus atd.
- Pokud trpíte metabolickou nemocí, jako je například diabetes.
- Pokud trpíte poruchou srážení krve.

V žádném případě nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro, pokud užíváte jeden z následujících léků:

- Pokud užíváte léky, které způsobují vyšší citlivost pokožky na světlo, včetně nesteroidních antirevmatik (například aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracykliny, fenothiaziny, thiazidová diuretika, sulfony

- močoviny, sulfonamidy, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxykyseliny (AHA), beta-hydroxykyseliny (BHA), Retin-A[®], Accutane[®] a/nebo topické retinoidy.
- Pokud jste nedávno byli nebo v současnosti jste léčeni kyselinou azelainovou.
 - Pokud jste v posledních dvou týdnech brali tetracyklinová antibiotika.
 - Pokud jste byli v posledních 6 měsících léčeni lékem Accutane[®] (isotretinoin).
 - Pokud jste v posledních 3 měsících užívali steroidní přípravky.
 - Pokud jste si v posledních 6–8 týdnech nechali udělat peeling pleti nebo jinou metodu vyhlazení pokožky.
 - Pokud jste se v posledních 3 měsících podrobili ozařování nebo chemoterapii.

V žádném případě nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro na těchto místech:

- Nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.
- Nad aktivním implantátem, jako je například kardiostimulátor, zařízení pro případ inkontinence, inzulinová pumpa atd.
- Na obličeji nad linií tváře, kolem očí, obočí nebo řas, protože to může vést k závažnému poškození zraku.
- U mužů v celém obličeji a na krku.
- Na prsních bradavkách, genitáliích (mužských nebo ženských) nebo kolem řitního otvoru.
- Nad piercingem nebo jinými kovovými předměty, jako jsou například náušnice nebo šperky.
- Nad tetováním nebo permanentním make-upem v ošetřované oblasti.
- Nad tmavě hnědými nebo černými skvrnami, jako jsou například velké pihy, mateřská znaménka, jaterní skvrny, puchýřky nebo bradavice.
- Nad ekzémy, lupénkou, lézemi, otevřenými ranami nebo akutními infekcemi. Před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro počkejte, dokud se příslušné místo nezahojí.
- Na poškozené nebo popraskané pokožce nebo na místech, na kterých existuje riziko vzniku malignit.
- Na místě na těle, na kterém byste možná chtěli být v budoucnu ochlupeni.



Varovné upozornění na následky opalování před ošetřením a po ošetření!



Opalování před ošetřením

1. Po opalování počkejte minimálně 2 týdny, než přístroj použijete.
2. Před ošetřením zkontrolujte, zda nemáte spálenou pokožku. Pokud nejsou spáleniny zhojené, počkejte s použitím přístroje do té doby, než bude spálená pokožka zcela zahojená.
3. Na opálené kůži proveďte test snášenlivosti (viz kapitola 7, krok 2), abyste zjistili vhodnou intenzitu energie.

Opalování po ošetření

1. Po ošetření počkejte s opalováním minimálně 48 hodin. Zarudlou pokožku nevystavujte slunečním paprskům!
2. První dva týdny po ošetření zakrývejte pokožku na slunci oděvem nebo použijte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem (minimálně LSF 30).

Opalování umělým světlem

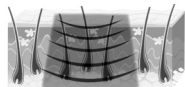
Pokyny z odstavce „Opalování před ošetřením“ a „Opalování po ošetření“ platí i pro opalování umělým světlem a mléky na opalování.

S použitím přístroje před návštěvou sauny/bazénu nebo po této návštěvě počkejte 24 hodin, chlór by totiž mohl způsobit podráždění pokožky.

Upozornění


Tento seznam nevznáší nárok na úplnost. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás použití přístroje beurer Velvet Skin Pro bezpečné, obraťte se na svého lékaře nebo dermatologa.

5. Co je přístroj beurer Velvet Skin Pro?



Před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro

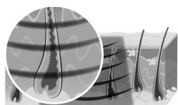Přístroj beurer Velvet Skin Pro funguje na bázi světla a slouží k epilaci ochlupení s dlouhodobým účinkem při osobním použití. Proces epilace na bázi laserového paprsku a světla je dobře známý a osvědčený. Celosvětově klinické používání po dobu více než 15 let prokázalo, že je bezpečným a účinným prostředkem pro dosažení dlouhodobého efektu epilace.




Během impulsu z přístroje beurer Velvet Skin Pro

Jakým způsobem dochází k epilaci pomocí světla?

Epilace na bázi světla je založena na teorii selektivní fototermolýzy, což je metoda, při níž je růst ochlupení deaktivován působením optické energie. Aby bylo dosaženo tohoto tepelného účinku, musí stvol chloupku selektivně absorbovat světelnou energii a přeměnit ji na teplo.

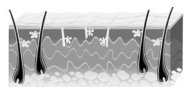Této selektivity je dosaženo tehdy, když je optická energie, která se přenáší do tkáně, absorbována hlavně pigmentem stvolu chloupku, zatímco pokožka a okolní tkáň zůstávají chladné. Melanin je pigment ve stvolu chloupku, který je odpovědný za absorpci světla a generuje teplo, které deaktivuje růst ochlupení. Proto platí, že může být absorbováno tím více světla a tím efektivnější může toto světlo při epilaci být, čím více melaninu je v chloupcích obsaženo (to znamená, čím jsou chloupky tmavší).



Po použití přístroje beurer Velvet Skin Pro



Anagenní fáze: fáze růstu

Jaký vliv má cyklus růstu ochlupení na epilaci založené na působení světla?

Každý chloupek na našem těle prochází třemi fázemi cyklu růstu ochlupení: anagenní, katagenní a telogenní. Tyto fáze mají významný vliv na fungování epilace založené na působení světla.

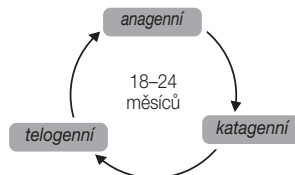
Anagenní fáze je fáze růstu ochlupení, zatímco katagenní a telogenní jsou fázemi klidu.



Katagenní fáze: přechodná fáze

Doba trvání kompletního cyklu růstu ochlupení se u jednotlivých lidí liší a závisí na místě ochlupení na těle, zpravidla však činí 18–24 měsíců. V určitém okamžiku je většina vlasových folikulů na jedné ploše pokožky v klidové fázi. Na tyto chloupky v klidu nemá použití přístroje beurer Velvet Skin Pro žádný účinek.

Avšak ochlupení v anagenní fázi růstu na použití přístroje beurer Velvet Skin Pro reaguje. Je bezpodmínečně nutné si uvědomit, že pro dosažení dlouho-trvající epilace s použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro je zapotřebí celého jednoho období cyklu růstu ochlupení.



Telogenní fáze: klidová fáze

Přístroj beurer Velvet Skin Pro byl vyroben s prvořadým důrazem na bezpečnost

• Technologie IPL přístroje beurer Velvet Skin Pro – nejvyšší bezpečnost při nižší energetické úrovni

Pomocí technologie Intense Pulsed Light (IPL) lze dosáhnout dlouhodobých epilačních výsledků, a to při použití zlomku vynaložené úrovně v porovnání s jinými epilačními přístroji, které jsou založeny na působení světla. Nízká hladina energie, která se používá u přístroje beurer Velvet Skin Pro, snižuje potenciální možnost vzniku poškození nebo komplikací a přispívá k vaší celkové bezpečnosti.

- **beurer Velvet Skin Pro chrání vaši pokožku**

Epilace založená na působení světla není vhodná pro přirozeně tmavší odstíny pokožky nebo pro opálenou pokožku. Přístroj beurer Velvet Skin Pro je dodáván spolu se zabudovaným *snímačem typu pleť*, pomocí kterého lze změřit barvu ošetřované části pokožky, což umožňuje použití pouze na vhodných odstínech pokožky. Tato bezpečnostní funkce vám nedovolí ošetřit pokožku tehdy, pokud je příliš tmavá nebo příliš opálená. Aplikační okénko disponuje vestavěnou ochranou před UV zářením, díky které je blokováno škodlivé UV záření.

- **beurer Velvet Skin Pro chrání vaše oči**

Přístroj beurer Velvet Skin Pro má pro ochranu očí zabudovaný snímač kontaktu s pokožkou. Byl navržen tak, aby nebylo možné vysílat světelný impuls v době, kdy je přístroj držen ve vzduchu.

Záblesk světla se spustí teprve tehdy, jestliže bude snímač kontaktu s pokožkou pevně přiléhat ke kůži.

6. Popis přístroje

	1. Záblesková lampa
	2. Aplikační okénko
	3. Spouštěcí tlačítko (po spuštění 3 záblesků za sebou se nastaví režim „Auto-Flash“)
	4. Ukazatel stupňů energie
	5. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
	6. Tlačítko pro nastavení stupně energie
	7. Tlačítko pro automatické rozpoznávání odstínu kůže
	8. Tlačítko ON/OFF
	9. Kontrolka
	10. Snímač odstínu kůže a kontaktu s pokožkou
	11. Zdiřka pro nabíjení
	12. Přesný nástavec

- 1. Vypínač** – stisknutím vypínače se přístroj zapíná a vypíná. Přístroj se automaticky vypne, když ho nebudete více než pět minut používat. Při zapnutí přístroje se krátce rozsvítí všechny kontrolky na ukazateli stupňů energie, poté přístroj přejde do nastavení stupně energie 1.
- 2. Tlačítko pro automatické rozpoznávání odstínu kůže** – Stisknutím tlačítka můžete určit doporučený stupeň energie pro ošetření příslušného místa. Po stisknutí tohoto tlačítka blikají všechna tlačítka pro nastavení stupně energie po dobu deseti sekund. Jestliže má snímač kontaktu s pokožkou úplný kontakt s požadovaným místem ošetření a vyšle se světelný impuls, nastaví se doporučený stupeň energie (podle odstínu kůže na ošetřovaném místě) automaticky; na ukazateli stupňů energie se rozsvítí příslušná kontrolka.
Je třeba upozornit na to, že doporučený stupeň energie se navolí jen tehdy, jestliže stisknete příslušné tlačítko, ne když se změní odstín kůže nebo ošetřované místo.
- 3. Tlačítka pro nastavení stupně energie** – tlačítko + (vyšší stupeň energie) a – (nižší stupeň energie) umožňují výběr šesti různých stupňů energie. Vždy volte stupeň energie podle osobních pocitů, popř. na základě provedeného testu snášenlivosti pokožky. Pro výběr optimálního stupně energie můžete pro každé ošetřované místo použít tlačítka pro automatické rozpoznávání odstínu kůže.
 - Stisknutím tlačítek + nebo - (po zapnutí přístroje) se energie zvýší nebo sníží o jeden stupeň. Každým dalším stisknutím se mění stupeň energie mezi nejnižším (označeným číslem „1“) a nejvyšším stupněm (označeným číslem „6“).

- Podle zvolené stupně energie svítí příslušný počet zelených kontrolkek na ukazateli stupňů energie.
4. **Ukazatel stavu nabití akumulátoru** – tento ukazatel poskytuje informace o stavu nabití akumulátoru:
- Červená – akumulátor se nabíjí.
Upozornění: Jestliže zároveň s touto červenou kontrolkou svítí i kontrolka stupně energie 1, je přístroj zapnutý.
 - Zelená – akumulátor je plně nabitý a přístroj je připojen k externímu napájení.
 - Červená, pomalu blikající – nízký stav nabití akumulátoru (asi 30 procent).
 - Červená, rychle blikající – velmi nízký stav nabití akumulátoru (asi 10 procent).
Upozornění: Ukazatel stavu nabití akumulátoru svítí zeleně, popř. bliká červeně jen tehdy, když je přístroj zapnutý.
5. **Kontrolka** – tato kontrolka na zadní straně přístroje má více funkcí pro zobrazování provozního režimu (viz tabulka).

Kontrolka	Režim	
Svítí zeleně	Zapnuto	Zařízení připraveno pro světelný impulz. Při vyslání světelného impulzu, popř. mezi světelnými impulzy nesvítí žádná kontrolka.
Rozsvítí se oranžově	Uvolnění světelného impulzu je zablokováno.	Přístroj z důvodu nedostatečného kontaktu s pokožkou nevyšle žádný světelný impulz.
Rozsvítí se červeně	Uvolnění světelného impulzu je zablokováno.	Přístroj nevyšle z důvodu nepřijatelného odstínu kůže (vysoká hodnota podle Fitzpatricka viz údaje na zadní straně návodu k použití) žádný impulz.
Bliká oranžově	Poukázání na ukončení provozní doby	Poukazuje na brzký konec provozní doby zábleskové lampy.
Svítí červeně	Konec provozní doby dosažen	Přístroj je trvale zablokován, záblesková lampa dosáhla konce své životnosti, objevila se interní závada nebo aplikační okénko není řádně umístěno na přístroji.

7. Uvedení do provozu

KROK 1: Zkontrolujte, zda je pro vás přístroj beurer Velvet Skin Pro vhodný

VAROVÁNÍ

Před prvním použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro zkontrolujte, zda je pro vás přístroj vhodný. Prověřte, zda je pro vás přístroj beurer Velvet Skin Pro vhodný, viz kapitola „4. Varovné a bezpečnostní pokyny“ a podle tabulky barev ochlupení a typů pokožky na zadní straně tohoto návodu k použití zjistíte, které intenzity světla jsou nevhodnější pro typ vaší pokožky a barvu vašeho tělesného ochlupení, a zda je tato metoda pro vás vůbec vhodná (pokud ne, bude tato skutečnost uvedena symbolem „x“ v tabulce).

KROK 2: Test snášenlivosti pokožky

VAROVÁNÍ

Před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro proveďte test snášenlivosti pokožky. Pomocí testu snášenlivosti pokožky má být zjištěno, jak vaše pokožka reaguje na ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro. Dále vám pomůže při nastavení optimálního stupně energie pro každou ošetřovanou oblast. Na každém místě pokožky, kterou chcete ošetřovat, proveďte **48 hodin** před kompletním ošetřením test snášenlivosti pokožky.

Upozornění

Při ošetření obličejte by měl být proveden test snášenlivosti pokožky na ploše bez ochlupení, například pod uchem nebo ze strany na krku.

1. Před použitím dbejte na to, aby byla pokožka oholená, čistá a suchá (bez jakýchkoli zbytků kosmetických přípravků, např. pudru, krému, make-upu, antiperspirantu nebo deodorantu).

VAROVÁNÍ

Krátce před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nečistěte pokožku vznětlivými kapalinami, jako je alkohol nebo aceton.

2. Nastavte přístroj tak, jak je popsáno v kapitole „8.1 První použití“ v bodě 2 až 5.
3. Umístěte světelnou plochu přístroje na požadovanou testovanou oblast a dbejte na úplný kontakt s pokožkou.
4. Přístroj je automaticky nastaven na nejnižší stupeň energie. Stisknutím spouštěcího tlačítka uvolníte první impuls se stupněm energie 1. Uvidíte jasný záblesk světla, uslyšíte praskavý zvuk a případně ucítíte mírné pálení a/nebo působení tepla. Přístroj bude do 3 sekund připraven pro další impuls a kontrolka na přístroji beurer Velvet Skin Pro bude svítit nepřetržitě zeleně.
5. Zvedněte aplikační okénko z pokožky a umístěte je na další místo testované oblasti.

Upozornění

Stupeň energie zvyšte pouze tehdy, pokud vám předchází stupeň energie není nepříjemný. Pokud je vám již stupeň energie 1 nepříjemný, stupeň energie nezvyšujte.

Upozornění

Můžete použít tlačítko pro automatické rozpoznávání odstínu kůže, aby se automaticky nastavil stupeň energie pro příslušné ošetřované místo. Dbejte na to, aby bylo dodrženo doporučení na základě odstínu vaší kůže. Stupeň energie můžete kdykoliv nastavit.

6. Tlačítkem pro nastavení úrovně energie „+“ můžete zvýšit úroveň energie o stupeň 1. Kontrolka pro úroveň energie se rozsvítí podle zvolené úrovně energie.
Stisknutím spouštěcího tlačítka uvolníte druhý impuls se stupněm energie 2.
7. Kroky 5 a 6 zopakujte pouze tehdy, pokud se cítíte dobře a dokud není dosažen nejvyšší stupeň energie 6. Pokud máte nepříjemný pocit, test ukončete, protože při zvyšování energetických úrovní existuje riziko negativních následků. Test ihned ukončete, pokud zjistíte negativní účinky, např. extrémní zarudnutí nebo tvorba puchýřků.
8. Počkejte 48 hodin a zkontrolujte ošetřené místo na pokožce.
Pokud je pokožka ošetřovaného místa normální (bez reakce nebo jen mírné zarudnutí), můžete pokračovat v kompletním ošetření s nejvyšším stupněm energie, který jste při testu cítili jako příjemný. Pokud při nízkém stupni energie sami zjistíte extrémní zarudnutí, otok nebo tvorbu puchýřků, neprovádějte na tomto místě kompletní ošetření.

Upozornění

Neprovádějte kompletní ošetření se stupněm energie, který jste předem neotestovali!
Testované místo ošetřujte nejdříve 1 týden po provedení testu.

KROK 3: Pro nejlepší výsledky postupujte při epilaci přístrojem beurer Velvet Skin Pro podle plánu

Typický cyklus růstu ochlupení může trvat 18–24 měsíců. Během této může být pro dosažení epilace s dlouhodobým účinkem nutné absolvovat několik ošetření přístrojem Velvet Skin Pro. Účinnost epilace

je u jednotlivých lidí různá a závisí na ošetřovaném místě a barvě ochlupení a na tom, jakým způsobem se přístroj beurer Velvet Skin Pro používá.

Typický plán epilace přístrojem beurer Velvet Skin Pro během kompletního cyklu růstu ochlupení:

- První 3–4 epilační ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro by měla být s odstupem přibližně dvou týdnů.
- Další 5–7 epilačních ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro by mělo být s odstupem přibližně čtyř týdnů. Poté budete obvykle používat přístroj beurer Velvet Skin Pro občas a bude-li to zapotřebí, dokud nebude dosaženo výsledků s dlouhodobým účinkem.

Odpovídá to doporučenému plánu ošetřování, pomocí kterého lze prokazatelně dosáhnout nejlepších výsledků. Osobní plán ošetřování si však můžete také vytvořit jinak, a přesto dosáhnete uspokojivých výsledků.

Upozornění

Pokud je stejné místo ošetřováno vícekrát než jednou za dva týdny, nezlepší se tím výsledky epilace.

Typická následná péče přístrojem beurer Velvet Skin Pro po dosažení epilace s dlouhodobým účinkem:

Kvůli hormonálním nebo jiným fyziologickým změnám může dojít k tomu, že se spící vlasové folikuly stanou aktivními. Proto je možné, že bude občas zapotřebí udržující epilační ošetření jako následná péče přístrojem beurer Velvet Skin Pro.

KROK 4: Připravte ošetřované místo

Před použitím dbejte na to, aby byla pokožka oholená, čistá a suchá (bez jakýchkoli zbytků kosmetických přípravků, např. pudru, krému, make-upu, antiperspirantu nebo deodorantu).

VAROVÁNÍ

Krátce před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro nečistěte pokožku vznětlivými kapalinami, jako je alkohol nebo aceton.

KROK 5: Nastavte intenzitu energie / automatické rozpoznávání odstínu kůže

Stupeň energie

Stupeň energie určuje intenzitu světelného impulzu přístroje beurer Velvet Skin Pro, který je vyslán na vaši kůži (od nejnižšího stupně (-) po nejvyšší (+)). Ukazatel stupňů energie na přístroji ukazuje zvýšení stupně energie. Se zvyšujícím se stupněm energie se rovněž zlepšují výsledky epilace, avšak také riziko možných vedlejších výsledků a komplikací.

První epilační ošetření začněte vždy se stupněm energie, který přístroj na základě rozpoznání odstínu kůže automaticky určil a který potvrdil test snášenlivosti pokožky.

Automatické rozpoznání / měření odstínu kůže

Pomocí automatického rozpoznání odstínu kůže přístroj zobrazí intenzitu energie vhodnou pro váš typ pleti.

Upozornění

- V zájmu bezpečnosti volte vždy nejtmavší místo na pokožce (např. vnější strana holeně, hřbet ruky, atd.)
Důležité: Před použitím přístroje na jiném místě musíte provést nové měření.
- V režimu rozpoznávání odstínu kůže přístroj nevysílá žádné světelné impulzy.
- Jestliže budete chtít rozpoznávání odstínu kůže předčasně ukončit, můžete se stisknutím jednoho z tlačítek pro nastavení úrovně energie (+ nebo -) opět vrátit do normálního režimu.

Pokud během prvního epilačního ošetření, které provedete s doporučeným stupněm energie, nepocítíte žádné podráždění nebo jen velmi lehké, a to i po ošetření, můžete při každém dalším ošetření energii zvýšit o 1 stupeň.

VAROVÁNÍ

Stupeň energie nezvyšujte, pokud během ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro a po něm zpozorujete abnormální bolesti! (Viz „Krok 6 Seznámení se s možnými vedlejšími účinky“)

Během jednoho epilačního ošetření nezvyšujte stupeň energie ani tehdy, pokud žádné potíže nepocítujete.

Podráždění se může vyskytnout také nějakou dobu po použití.

KROK 6: Seznámení s možnými vedlejšími účinky při použití přístroje beurer Velvet Skin Pro

Pokud používáte přístroj beurer Velvet Skin Pro podle pokynů v tomto návodu k použití, jsou vedlejší účinky a komplikace související s používáním přístroje beurer Velvet Skin Pro vzácné. Nicméně každé kosmetické ošetření, včetně metod, které byly vyvinuty pro domácí použití, je spojeno s jistým rizikem. Proto je důležité, abyste pochopili a akceptovali možná rizika a možné komplikace, které mohou nastat u domácích epilačních systémů se světelnými impulzy.

Komplikace	Pravděpodobnost komplikace	Vedlejší účinek	Pravděpodobnost vedlejšího účinku
Působení několika impulzů na stejném místě pokožky	Nízká	Mírné podráždění pokožky	Nízká
		Zarudnutí pokožky	Nízká
		Zvýšená citlivost pokožky	Nízká
		Poranění pokožky a popáleniny	Vzácný výskyt
		Tvorba jizev	Vzácný výskyt
		Pigmentové změny	Vzácný výskyt
		Nadměrné zarudnutí a otok	Vzácný výskyt
		Infekce	Zanedbatelný výskyt
		Modřiny	Zanedbatelný výskyt

Mírná bolest pokožky

I když je systém domácí epilace pomocí světelných impulzů obecně velmi dobře snášen, většina uživatelů pociťuje při těchto aplikacích mírně nepříjemné pocity, které jsou obvykle popisovány jako pocit mírného bodání na ošetřované kůži. Pocity bodání obvykle přetrvávají během samotné doby použití nebo několik minut po tomto použití. Vše, co je za hranicí tohoto mírně nepříjemného pocitu, však není běžné a znamená to, že byste buď neměli pokračovat s používáním přístroje beurer Velvet Skin Pro, protože epilační aplikace není pro vás vhodná, nebo že je nastavení stupně energie příliš vysoké.

Zarudnutí pokožky

Vaše pokožka může ihned po použití přístroje beurer Velvet Skin Pro nebo do 24 hodin po použití zarudnout. Zarudnutí obvykle do 24 hodin zmizí. Pokud toto zarudnutí nezmizí do 2 až 3 dnů, vyhledejte lékaře.

Zvýšená citlivost pokožky

Pokožka ošetřované plochy je citlivější, takže se můžete setkat s případem vysušení nebo odlupování pokožky.

Poranění pokožky a popáleniny

Velmi zřídka může po ošetření dojít k popáleninám nebo k poranění pokožky. Hojení těchto popálenin nebo ran může trvat několik týdnů a velmi zřídka může zůstat viditelná jizva.

Tvorba jizev

Přestože je tento jev velice vzácný, někdy se může objevit trvalé zjizvení. Obvykle má toto zjizvení formu ploché, bílé léze na pokožce (hypotrofické).

Toto zjizvení však také může být široké a červené (hypertrofické) nebo může být široké a může přesahovat okraje poranění (keloidní). Pro zlepšení vzhledu jizvy je rovněž možné, že bude zapotřebí provést následné estetické úpravy.

Pigmentové změny

Přístroj beurer Velvet Skin Pro se zaměřuje na stvol chloupku, zvláště na pigmentové buňky ve vlasovém folikulu a na samotný vlasový folikul.

Přesto u okolní pokožky existuje riziko vzniku hyperpigmentace (zvýšená pigmentace nebo hnědé zbarvení) nebo hypopigmentace (vyblednutí). Toto riziko změn pigmentace pokožky je vyšší u lidí s tmavší pokožkou. Obvykle se jedná o zbarvení nebo pigmentové změny pokožky, které mají dočasný charakter, permanentní hyperpigmentace nebo hypopigmentace se vyskytuje jen vzácně.

Nadměrné zarudnutí a otok

Ve výjimečných případech může dojít k velkému zarudnutí a otoku ošetřované pokožky. K tomuto jevu dochází častěji na citlivých místech těla. Zarudnutí a otoky by měly ustoupit do 2 až 7 dnů a je třeba je ošetřovat pomocí častého přikládání ledu. Pokožku můžete jemně omývat, avšak měli byste se vyvarovat vystavování pokožky slunci.

Infekce

Infekce pokožky je mimořádně vzácná, ale přesto představuje možné riziko jako následek popálení nebo poranění pokožky, které byly způsobeny použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro.

Modřiny

Použití přístroje beurer Velvet Skin Pro může velmi zřídka vést k modřinám, které mohou přetrvávat po dobu 5 až 10 dnů. Jakmile modřiny vyblednou, může se objevit rezavě hnědé zbarvení pokožky (hyperpigmentace), které může být trvalé.

KROK 7: Co mohu očekávat od ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro?

Pro mnoho uživatelů může použití přístroje beurer Velvet Skin Pro znamenat jejich první zkušenost s tímto zařízením, které funguje na bázi světla a které je určeno pro domácí použití. Použití přístroje beurer Velvet Skin Pro je jednoduché a epilacní ošetření probíhají velmi rychle. Během ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro je běžné, pokud nastanou následující jevy:

- **Hluk ventilátoru** – Chladicí ventilátor přístroje beurer Velvet Skin Pro produkuje zvuk, který je podobný vysoušeči vlasů. Tento jev je normální.
- **Praskající zvuk během každého impulsu** – Pokud je aktivován impuls přístroje beurer Velvet Skin Pro, je normální, pokud současně se zábleskem světla uslyšíte praskající zvuk.
- **Mírný tlak aplikačního okénka** – Tento jev je nezbytný a užitečný pro lokalizaci vedlejších světelných impulsů a je součástí bezpečnostní funkce přístroje beurer Velvet Skin Pro.
- **Pocit tepla a brnění** – Během každého světelného impulsu je zcela normální, když máte mírný pocit tepla a brnění proudícího ze světelné energie. Pamatujte, že je důležité, abyste při prvních epilacních ošetřeních používali vždy nízké stupně energie. Určité teplo můžete pociťovat až hodinu po použití přístroje beurer Velvet Skin Pro.
- **Mírně červené nebo růžové zbarvení pokožky** – Během ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro nebo bezprostředně po něm není neobvyklé, pokud pozorujete velmi mírné, růžové zbarvení pokožky. Toto zbarvení je obvykle nejvýraznější v okolí samotných chloupků. Pokud však pozorujete plně červené zbarvení pokožky (zarudnutí), tvorbu puchýřků nebo popáleniny, okamžitě používání přístroje beurer Velvet Skin Pro přerušte.

8. Použití

VAROVÁNÍ

Pokud chcete používat přístroj v oblasti obličeje, přečtěte si nejdříve pokyny v kapitolách 8.2 až 8.3 a poté pokračujte kapitolou 8.1 „První použití“.

8.1 První použití

1. Vyměňte přístroj z obalu.
2. Zkontrolujte, zda přístroj, síťová zástrčka, nástavce nebo kabel nejsou poškozeny.
3. Připojte přístroj k síti.
4. Před použitím přístroje nabijte (doba nabíjení je cca 2 hodiny).

Upozornění


Před použitím dbejte na to, aby byla pokožka oholená, čistá a suchá (bez jakýchkoli zbytků kosmetických přípravků, např. pudru, krému, make-upu, antiperspirantu nebo deodorantu).

Pokud byste měli pocit, že je přístroj nepříjemně horký, nechte ho na několik minut vychladnout.

Po krátké přestávce na zchlazení můžete v ošetření pokračovat jako obvykle.

VAROVÁNÍ

Krátce před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro nečistěte pokožku vznětlivými kapalinami, jako je alkohol nebo aceton.

5. Stiskněte vypínač a vypněte přístroj.
6. Tlačítka +/- vyberte správný stupeň energie pro odstín vaší kůže nebo použijte automatické rozpoznávání odstínu kůže ().
7. Přístroj přiložte v úhlu 90 stupňů ke kůži tak, aby na ni nástavec kompletně dolehl. Integrovaný snímač kontaktu s pokožkou zabrání nechtěným světelným impulzům bez kontaktu s kůží.
8. Kontrolka na zadní straně přístroje svítí zeleně, což znamená, že můžete pokračovat s ošetřováním.
9. Stiskněte spouštěcí tlačítko pro vyslání světelného impulzu.
10. Přístroj je vybaven režimem „Auto-Flash“. Jestliže přidržíte spouštěcí tlačítko po dobu 3 po sobě následujících světelných impulzů, aktivuje se tento režim. Přístroj nyní bez dalšího stisknutí spouštěcího tlačítka automaticky vysílá světelné impulzy, dokud má dostatečný kontakt s pokožkou.

Upozornění

Pokud stisknete *spouštěcí tlačítko* a vaše pokožka je příliš tmavá nebo příliš opálená, rozsvítí se *kontrolka* na přístroji červeně. V tomto případě přístroj na tomto místě pokožky neuvolní žádný impulz.

Pokud přístroj nemá dostatečný kontakt s pokožkou, rozsvítí se po stisknutí spouštěcího tlačítka kontrolka na přístroji oranžově. V tomto případě přístroj rovněž neuvolní žádný impulz.

VAROVÁNÍ

Neošetřujte stejnou plochu pokožky častěji než jednou během jednoho epilacího ošetření!
 Vícenásobným ošetřením jedné plochy pokožky během jednoho epilacího ošetření se může zvýšit pravděpodobnost vedlejších účinků.

Pokuste se zabránit tomu, aby se impulzy překrývaly.

Upozornění

Impulzy přístroje beurer Velvet Skin Pro by měly být aplikovány v řadách – počínaje na jednom konci každé řady a s postupným pokračováním směrem ke druhému konci. Tato technika umožňuje lepší kontrolu již ošetřených ploch pokožky a pomáhá vám vyhnout se několikanásobnému ošetření stejné plochy nebo ošetření překrývajících se ploch pokožky. *Světelná plocha* přístroje beurer Velvet Skin Pro je koncipována tak, že jsou na ošetřované ploše pokožky krátkodobě zanechávána otlačená místa. Tato viditelná otlačená místa můžete využít pro přesné umístění dalšího impulsu.

11. Zvedněte přístroj z pokožky a umístěte ho na další ošetřované místo. Při přemístění dbejte na to, aby nedošlo ke vzniku mezer nebo k překrývání ošetřované pokožky. Přístroj se ihned znovu nabije a je do 3 sekund (na nejvyšší stupeň) připraven na další impuls (kontrolka na přístroji svítí opět nepřetržitě zeleně). Postup zopakujte, dokud nebude ošetřena celá plocha pokožky.

Po ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro

- Když dokončíte epilací ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro, vypněte přístroj stisknutím vypínače.
- Po každém epilacím ošetření doporučujeme vyčistit přístroj beurer Velvet Skin Pro, zejména *světelnou plochu*.
- Po vyčištění se doporučuje uložit přístroj beurer Velvet Skin Pro do originální krabice a uchovávat jej mimo dosah vody.

8.2 Ošetření obličeje

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro v obličeji na vyšší stupeň energie než 3.

Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro v obličeji nad lícními kostmi nebo na očích, obočích a řasách, protože to může vést k závažnému poškození zraku.

Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro během těhotenství ani v době kojení.

Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.

Pleť obličeje je velmi citlivá a vyžaduje mimořádnou péči. Bezpodmínečně dodržujte všechny varovné a bezpečnostní pokyny v tomto návodu k použití, abyste zabránili negativním následkům. Doporučujeme napřed provést ošetření těla a s přístrojem se seznámit dříve, než přejdete k ošetření obličeje.

Pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro můžete ošetřovat všechny zóny obličeje pod lícními kostmi jako například horní ret, tvář, čelist, bradu a krk.

i Upozornění

Pro jednodušší ošetření obličeje můžete použít přiložený přesný nástavec. Tento nástavec zmenšuje světelnou plochu a umožňuje přesnější ošetření.

Přesný nástavec snadno upevníte na světelnou plochu nasazením na horní část přístroje.

Přesný nástavec upevněte tak, aby se v nástavci nacházel příslušný otvor pro snímač kontaktu s pokožkou / snímač typu pleti. Pokud by byl snímač kontaktu s pokožkou / snímač typu pleti zakrytý, není možné spuštění světelného impulzu. Přesný nástavec používejte jen na max. stupeň energie 3 a pouze tehdy, pokud máte odstín pleti světlejší než je typ pleti 5.

Přesný nástavec nepoužívejte déle než pro 80 impulzů za sebou.

Hrozí nebezpečí, že se červený filtr příliš zahřeje a mohl by způsobit popálení.



1. 48 hodin před ošetřením bezpodmínečně proveďte bodový test snášenlivosti pokožky (viz kapitola 7, krok 2). Test snášenlivosti pokožky by měl být proveden na ploše bez ochlupení, jako například pod uchem nebo ze strany na krku, abyste zjistili vhodný stupeň energie.

! VAROVÁNÍ

Testovanou plochu ošetřujte nejdříve 1 týden po provedeném testu snášenlivosti pokožky.

i Upozornění

Ochlupení obličeje může být hormonálně podmíněno, takže pro trvalou redukci ochlupení může být zapotřebí více ošetření.

8.3 Péče po ošetření obličeje

- Naneste na obličej uklidňující tělové mléko, například s aloe vera.
- Nejméně 24 hodin se vyhněte použití peelingového nebo bělicího krému či podobných produktů, protože by to vedlo k podráždění ošetřené pokožky.
- Nejméně 48 hodin po ošetření se vyhněte přímému slunečnímu záření v délce trvání více než 15 minut. Pokud je nedávno ošetřovaná pokožka během tohoto období vystavena slunečnímu světlu, musíte bezpodmínečně nanést ochranu proti slunci s faktorem SPF 30 nebo vyšším.
- Vyhněte se tomu, abyste ochlupení na ošetřovaných plochách odstraňovali voskem nebo vytrháváním.

Nezapomeňte na to, že může trvat celý cyklus růstu ochlupení, než se objeví kompletní výsledky epilace.

9. Čištění a údržba

Po každém epilačním ošetření doporučujeme vyčistit přístroj beurer Velvet Skin Pro, zvláště pak světelnou plochu.

! POZOR

Nikdy nevkládejte přístroj beurer Velvet Skin Pro ani žádnou z jeho částí do vody!

- Použijte suchou, čistou utěrku a čisticí prostředek, který byl speciálně vyvinutý pro elektronické přístroje. Jemně otřete povrch přístroje beurer Velvet Skin Pro a zvláště pak povrch světelné plochy.

10. Co dělat v případě problémů?

„Přístroj beurer Velvet Skin Pro nelze zapnout“

- Ujistěte se, že je akumulátor přístroje nabitý (podle zelené kontrolky ukazatele stavu nabití akumulátoru).
- Pokud přístroj IPL nevysílá žádný světelný impuls, zkontrolujte, zda
 - a. je nástavec řádně upevněn na přístroji (přístroj nefunguje, pokud tento nástavec není upevněn nebo je upevněn nesprávně).
 - b. je přístroj stále v automaticky aktivovaném bezpečnostním režimu po zjištění nedostatečného kontaktu s pokožkou nebo nepřipustného odstínu kůže.
 - c. má přístroj dostatečný kontakt s pokožkou.
 - d. ošetřované místo není příliš malé, vyklenuté nebo kostnaté. Aplikační okénko musí zcela doléhat na ošetřované místo (pokuste se kůži napnout).
 - e. je vysílání světelného impulsu zablokováno, když přístroj IPL rozpoznal příliš tmavý odstín kůže. V tomto případě se kontrolka krátce rozsvítí červeně.
 - f. V případě bezpečnostních problémů a při dosažení provozní životnosti svítí kontrolka červeně. Přístroj se pak automaticky vypne.
- Obecné závady:
 - a. Aplikační okénko je nutné vyčistit podle pokynů v příslušné kapitole, jestliže je zanesené špínou nebo prachem. Obráťte se na zákaznický servis, pokud nebudete schopni znečištění odstranit sami.
 - b. Pokud jsou světelné signály po změně místa ošetření vysílány se zpožděním, použijte přístroj případně v chladnějším prostředí. Vysílání světelných impulsů se za určitých okolností zpomaluje při vyšších teplotách okolí.
 - c. Pokud se objeví obecná závada, vypněte přístroj, počkejte deset sekund a opět ho zapněte.
- Pokud máte s přístrojem problémy i nadále, obraťte se na zákaznický servis.

11. Často kladené otázky

1. Opravdu přístroj beurer Velvet Skin Pro funguje?

Ano. Klinické lékařské studie prokázaly, že technologie používaná v přístroji beurer Velvet Skin Pro přispívá k dosažení dlouhodobých výsledků epilace. Výsledky se však mohou lišit podle cyklu růstu ochlupení; použitého stupně energie a tloušťky a barvy chloupků.

2. Kde všude na svém těle mohu používat přístroj beurer Velvet Skin Pro?

Přístroj beurer Velvet Skin Pro byl navržen pro epilaci celého těla. Mezi nejčastější oblasti, které jsou ošetřovány přístrojem beurer Velvet Skin Pro, patří nohy, podpaží, paže, třísla a obličej pod lícními kostmi.

3. Jak dlouho trvá jedno ošetření pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro?

Tato doba se liší v závislosti na ošetřované části těla. Ošetření celého těla (nohy, paže, podpaží, třísla a obličej pod lícními kostmi) trvá přibližně 21 minut při použití nejnižšího stupně energie a velkého nástavce.

4. Je přístroj beurer Velvet Skin Pro bezpečný?

Přístroj beurer Velvet Skin Pro byl navržen s mimořádným ohledem na bezpečnost a používá klinicky testovanou technologii. Avšak stejně jako u každého jiného produktu či elektronického přístroje aplikovaného na pokožce musí být používán v souladu s pokyny pro použití a bezpečnostními pokyny pro uživatele.

5. Je použití přístroje beurer Velvet Skin Pro bolestivé?

Při správném použití uvádí většina uživatelů přístroje beurer Velvet Skin Pro pocity mírného tepla v okamžiku světelného impulsu. Uživatelé s hustším a tmavším ochlupením mohou pociťovat mírně větší nepříjemnosti, avšak tyto nepříjemné pocity ihned po ukončení epilačního ošetření ustoupí. Přístroj beurer Velvet Skin Pro má 6 stupňů nastavení energie, které lze použít v závislosti na vaší citlivosti.

6. Jak často mám přístroj beurer Velvet Skin Pro používat?

Epilační ošetření pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro by měla být u prvních čtyř ošetření prováděna ve dvoutýdenních intervalech. Páté až sedmé ošetření včetně by mělo následovat v intervalu čtyř týdnů.

Všechna další ošetření byste měli provádět tehdy, pokud ochlupení doroste a nebude dosaženo požadovaných výsledků.

Při ošetření ochlupení v obličejí pod lícními kostmi byste měli prvních šest ošetření provádět ve dvou-týdenních intervalech. Sedmé až dvanácté ošetření včetně by mělo proběhnout v intervalu čtyř týdnů. Všechna další ošetření byste měli provádět tehdy, pokud ochlupení doroste a nebude dosaženo požadovaných výsledků.

7. Je přístroj beurer Velvet Skin Pro účinný v případě bílého, šedého nebo světlého ochlupení?

Přístroj beurer Velvet Skin Pro funguje nejlépe u tmavších typů ochlupení nebo u chloupků, které obsahují více melaninu. Melanin je pigment, který ochlupení a pokožce propůjčuje barvu a absorbuje světelnou energii. Černé a tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe. Hnědé a světle hnědé ochlupení reaguje také, avšak obvykle vyžaduje větší počet epilacních ošetření. Jistý účinek lze pozorovat u zrzavého ochlupení. Bílé, šedé nebo světlé ochlupení obvykle na přístroj beurer Velvet Skin Pro nereaguje, přestože někteří uživatelé pozorovali výsledky po několika epilacních ošetřeních.

8. Mohu používat přístroj beurer Velvet Skin Pro na hnědé nebo černé pokožce?

Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro na přirozeně tmavé pokožce! Nebude fungovat! Přístroj beurer Velvet Skin Pro funguje na bázi světla a odstraňuje nežádoucí ochlupení pomocí selektivního ošetření vlasového pigmentu. Různé množství pigmentu se dále nachází v okolní tkáni kůže. Množství pigmentu v pokožce určité osoby, které se projevuje barvou pokožky, určuje míru rizika, kterému je tato osoba při použití přístroje beurer Velvet Skin Pro vystavena. Ošetření tmavé pokožky pomocí epilace fungující na bázi světla může mít škodlivé následky, jako například popáleniny, puchýřky a změny barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace). V přístroji beurer Velvet Skin Pro je zabudován *snímač typu pleti*, který provádí měření ošetřované pokožky na začátku každého ošetření a příležitostně během ošetření. *Snímač typu pleti* zabrání dalšímu vysílání impulzů přístrojem beurer Velvet Skin Pro, jakmile zjistí, že se přístroj používá na tmavší pokožce.

9. Kdy uvidím první výsledky po ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro?

Stejně jako u jiných epilacních přístrojů, které fungují na bázi světla nebo laseru, nejsou výsledky vidět ihned a mohli byste si dokonce myslet, že se vůbec nic nestalo. Někdy se zdá, že ochlupení po epilacním ošetření opět naroste, ale obvykle po dvou týdnech mnoho z těchto chloupků jednoduše vypadne. Kromě toho ochlupení roste ve třech různých fázích a epilace přístrojem beurer Velvet Skin Pro bude mít vliv pouze na ochlupení v aktivní fázi růstu. To je jeden z hlavních důvodů, proč je pro dosažení požadovaného výsledku zapotřebí více ošetření.

10. Mohou muži používat přístroj beurer Velvet Skin Pro?

Přestože byl přístroj beurer Velvet Skin Pro vyvinut pro ženy, může být vhodný také pro muže. Ochlupení mužů, zvláště pak ochlupení na hrudi, bude však pro dosažení požadovaných výsledků vyžadovat větší počet epilacních ošetření než ochlupení žen.

11. Proč mé ochlupení roste, přestože byla epilace provedena před týdnem?

Může se zdát, jakoby chloupky stále rostly až dva týdny po epilacním ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro. Tento proces je znám jako „vypuzení“ a přibližně po dvou týdnech zjistíte, že tyto chloupky jednoduše vypadnou nebo je můžete vytáhnout jemným škubnutím. (Přesto nedoporučujeme chloupky vytahovat – nechte je jednoduše vypadnout přirozenou cestou.) Je také možné, že některé chloupky nebudou z důvodu vynechané aplikace nebo různých fází růstu přístrojem beurer Velvet Skin Pro ovlivněny. Toto ochlupení bude předmětem následujících ošetření a to je důvod, proč je pro dosažení nejlepšího výsledku zapotřebí několika epilacních ošetření přístrojem beurer Velvet Skin Pro.

12. Slyšela jsem, že některé chloupky po epilaci založené na bázi světla narostou znovu v tenčí a jemnější podobě. Je to pravda?

Tento jev byl podrobně zdokumentován dermatology a lékaři, kteří používají pro epilaci světelná a laserová zařízení. Je možné, že některé chloupky dorostou po epilaci přístrojem beurer Velvet Skin Pro v tenčí a jemnější podobě. Obvykle se jedná o zlomek chloupků, které zde byly původně, a pokračující ošetření na ně může mít požadovaný účinek.

13. Proč nelze provést ošetření, pokud mám „aktivní“ opálení?

Nepoužívejte přístroj beurer Velvet Skin Pro na opálené pokožce nebo po vystavení pokožky slunečnímu záření. Opálená pokožka, zvláště po vystavení slunečnímu záření, obsahuje velké množství pigmentu melaninu. Platí to pro všechny typy a odstíny pokožky, včetně těch, které nehnědnou příliš rychle. Přítomnost velkého množství melaninu vystavuje pokožku vyššímu riziku vzniku nežádoucích následků v souvislosti s použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro včetně popálenin, puchýřků a změn barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace).

14. Je dlouhodobé používání přístroje beurer Velvet Skin Pro nebezpečné pro mou pokožku?

Používání světelné a laserové energie v estetické medicíně je po dobu více než 15 let podrobně dokumentováno v profesionálních, experty prověřených odborných časopisech a v uznávaných institucích, jako je Mayo Klinik. Tyto časopisy a instituce neinformovaly o žádných vedlejších účincích nebo poškozeních v důsledku dlouhodobého používání světelných nebo laserových zařízení.

15. Mohu použít přístroj beurer Velvet Skin Pro k odstraňování chloupků na tváři nebo jiných chloupků v obličejí?

Přístroj beurer Velvet Skin Pro se může používat k ošetření ochlupení v obličejí pod lícními kostmi. Při používání na obličejí je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byly vynechány oční partie: přístroj beurer Velvet Skin Pro nelze v žádném případě používat kolem očí nebo na očích. A stejně jako u ostatních částí těla by se mělo před ošetřením pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro i po něm zabránit vystavení pokožky slunečnímu záření. Akceptovanými prostředky na ochranu proti slunečnímu záření jsou dostatečně zakrývající oděv nebo krémy na opalování (SPF minimálně 30), které jsou nošeny nebo používány před ošetřením a po něm.

16. Jak dlouho mám počkat s ošetřením pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro po nechráněném vystavení pokožky slunečnímu záření?

Před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro po nechráněném vystavení pokožky slunci by se měla dodržet časová lhůta 2 týdnů. Pokud si přesto nejste jisti ohledně vystavení pokožky slunečnímu záření, obraťte se na svého lékaře.

17. Mám před použitím přístroje beurer Velvet Skin Pro udělat něco zvláštního?

Před každým ošetřením pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro je důležité vyvarovat se vystavení ošetřovaného místa na pokožce slunečnímu záření po dobu nejméně 2 týdnů. Pomoci může vysoká úroveň UV opalovacího krému (SPF 30+) a oděv, který zakrývá ošetřenou plochu. Plocha pokožky, která bude ošetřovaná, by měla být kromě toho umyta jemným mýdlem a vodou a chloupky by měly být oholeny až k povrchu pokožky.

18. Jak mám pečovat o ošetřenou plochu pokožky po použití přístroje beurer Velvet Skin Pro?

Plochu ošetřenou pomocí přístroje beurer Velvet Skin Pro lze mýt a ošetřovat pomocí standardních produktů pro péči o pleť. Zvláště je nutné dbát na to, aby nedošlo k nechráněnému vystavení slunečnímu záření. Vhodnou protisluneční ochranu tvoří opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem (30+) a dostatečně zakrývající oděvy.

12. Likvidace

Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrných pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.

Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,

Cd = baterie obsahuje kadmium,

Hg = baterie obsahuje rtuť.



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.


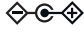


Akumulátor přístroje se likviduje samostatně. Akumulátor se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem. Pro informace o likvidaci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo příslušný úřad, který má likvidaci na starost.

13. Technické údaje

Typu		IPL 8800
Ošetřovaná plocha		4,5 cm ² / přesný nástavec 2 cm ²
Technologie		IPL (Intense Pulsed Light) pro domácí použití
Vlnová délka		475 – 1 200 nm (velký nástavec), 550 – 1 200 nm (přesný nástavec)
Max. energetická úroveň		max. 5 J/cm ²
Volitelné stupně energie		6
Rychlost		1 impuls v intervalu max. 3 sekund (na nejvyšší stupeň)
Max. počet impulzů		600 000
Rozměry		cca 17,5 x 6,5 x 20 cm
Hmotnost		cca 480 g
Teplota	Provoz	10–40 °C
	Skladování	-10–70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	Provoz	30–70 % rel. vlh.
	Skladování	0–90 % rel. vlh. při 55 °C (nekondenzující)
Akumulátor		lithium-iontový akumulátor, 7,4 V, 2 500 mAh
Počet impulzů na jedno nabití		550 záblesků

Síťový adaptér

Číslo modelu	YJS024Y-1201800
Vstup	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Výstup	12,0 V  1,8 A, 21,6 W
Ochrana	dvojitá izolační ochrana
Polarita	
Klasifikace	Třída ochrany II
Průměrná efektivita při provozu	≥ 86,55 %
Příkon při nulovém zatížení	≤ 0,08 W

Technické změny vyhrazeny

14. Záruka/servis

Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.

Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím.

Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 3 roky (let) od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá výhradně k osobním účelům v domácím prostředí.

Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: viz příložený seznam „Service International“ s adresami servisních středisek.

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat výrobek a jaké podklady musí dodat.

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit

- kopii faktury / doklad o nákupu
- originální výrobek společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na

- opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
- díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebují nebo spotřebují (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a příslušenství inhalátoru);
- výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponuje autorizací společností Beurer;
- škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
- výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
- následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení).

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu.



Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

VÝSTRAHA

- Prístroj a adaptér sú určené iba na domáce/súkromné použitie, nie pre komerčné použitie.
- Prístroj je vhodný iba pre osoby od 18 rokov.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Pred každým použitím skontrolujte, či prístroj a sieťový kábel nie sú poškodené. V prípade poškodení sa prístroj nesmie uvádzať do prevádzky.
- Prístroj a adaptér sa nesmú namočiť.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vlhkých oblastí, napr. vane, umývadlá, sprchy alebo iné nádoby s vodou alebo inými kvapalinami – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Nikdy sa nepozerajte do svetla.
- Do prístroja nekladajte žiadne predmety.
- Dbajte na to, aby vetracie štrbiny neboli zakryté.
- Ak je prístroj poškodený, nedotýkajte sa žiadnych vnútorných komponentov, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
- V prípade, že sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto prístroja, musí sa tento zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy, detí a vzduchu.

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer

Obsah

1. Obsah balenia	24
2. Vysvetlenie symbolov	25
3. Účel použitia	26
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	26
5. Čo je beurer Velvet Skin Pro?	29
6. Popis prístroja	30
7. Uvedenie do prevádzky	32
KROK 1: Skontrolujte, či je prístroj beurer Velvet Skin Pro pre vás vhodný.....	32
KROK 2: Test znášanlivosti kože.....	32
KROK 3: Pre najlepšie výsledky s prístrojom beurer Velvet Skin Pro si ošetrenia naplánujte.....	33
KROK 4: Príprava ošetrovanej oblasti	33
KROK 5: Nastavenie intenzity energie/automatické rozpoznanie odtieňa kože.....	33
KROK 6: Oboznámenie sa s možnými vedľajšími účinkami používania prístroja beurer Velvet Skin Pro	34
KROK 7: Čo je možné očakávať od ošetrenia prístrojom beurer Velvet Skin Pro?	35
8. Používanie	36
8.1 Začiatok používania	36
8.2 Ošetrovanie tváre.....	37
8.3 Starostlivosť po ošetrení tváre	38
9. Čistenie a starostlivosť	38
10. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	39
11. Často kladené otázky	39
12. Likvidácia	41
13. Technické údaje	42
14. Záruka/servis	43

















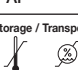

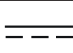


1. Obsah balenia

Skontrolujte, či obal prístroja nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú servisnú adresu.

- 1 x beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 x presný nadstavec
- 1 x sieťový adaptér
- 1 x tento návod na použitie
- 1 x úložná taštička

2. Vysvetlenie symbolov

V návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

 VÝSTRAHA	Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie zdravia
 POZOR	Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve
 Upozornenie	Upozornenie na dôležité informácie
 NEBEZPEČENSTVO	Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
	Dodržujte návod na použitie
	Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2.
	Pozor: optické žiarenie
	Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.
	Chráňte pred vlhkosťou
	Uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od očí!
	Nepoužívať na opálenej pokožke alebo po vystavení sa slnku
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Označenie certifikátu pre produkty, ktoré sa vyvážajú do Ruskej federácie a krajín Spoločenstva nezávislých štátov.
  PAP	Obal ekologicky zlikvidujte
 Storage / Transport	Prípustná teplota a vlhkosť vzduchu počas skladovania a prepravy
	Výrobca
	Stejnospěrný proud Prístroj je vhodný pouze pro stejnosměrný proud
	Polarita
	Energetická účinnosť úroveň 6



Batérie s obsahom škodlivých látok nevyhadzujte do komunálneho odpadu

3. Účel použitia

Prístroj beurer Velvet Skin Pro je určený na odstránenie neželaných chĺpkov na tele pre dospelých. Ideálne oblasti na tele na odstraňovanie chĺpkov pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro sú nohy, podpazušie, oblasť bikín, hrudník, brucho a u žien časť tváre nad lícnyimi kosťami. Prístroj nie je určený na odstraňovanie chĺpkov na rektálnom otvore, na genitáliách ani na prsných bradavkách. Používajte ho len v súlade s návodom na obsluhu.

4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

VÝSTRAHA

Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte bezpečnostné upozornenia a pri používaní prístroja beurer Velvet Skin Pro sa nimi presne riadte. Nedodržanie nasledovných upozornení môže mať za následok poranenia alebo vecné škody. Uschovajte tento návod na obsluhu a sprístupnite ho aj iným používateľom. Dbajte na to, aby bol tento návod na obsluhu priložený k prístroju, keď prístroj odovzdáte ďalším osobám.

- Tento prístroj je pre osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo psychickými schopnosťami vhodný iba v prípade, ak majú dostatočný dozor alebo bolo zabezpečené podrobné poučenie zodpovednou osobou o používaní prístroja.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte v tehotenstve alebo v období dojčenia.
- Ak spozorujete extrémne sčervenanie, tvorbu pľuzgierikov alebo popálenín na koži, OKAMŽITE PRESTAŇTE PRÍSTROJ POUŽÍVAŤ!
- 48 hodín pred prvým použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro vykonajte test znášanlivosti kože na malom mieste pokožky tam, kde chcete prístroj používať (pozri kapitolu 7, krok 2: „Test znášanlivosti kože“).
- V žiadnom prípade nikdy nepozerajte priamo do svetla vystupujúceho zo žiarovky IPL. Tento produkt môže vytvárať nebezpečné optické žiarenie. Dbajte na to, aby bola svetelná plocha nástavca v úplnom kontakte s pokožkou.
- Nikdy sa nepokúšajte o vyslanie svetelného impulzu do vzduchu!
- Pomocou „Tabuľky farieb chĺpkov a kože“ na zadnej strane tohto návodu na obsluhu určíte, ktoré intenzity svetla sú najvhodnejšie pre vašu farbu kože a telesného ochlpenia, resp. či je táto metóda pre vás vôbec vhodná (ak nie je, táto skutočnosť je v tabuľke vyznačená s „x“).
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte na prirodzene tmavej pokožke. Ošetrovanie tmavej kože odstraňovaním chĺpkov na princípe svetla pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro môže mať negatívne následky, ako sú napr. popáleniny, pľuzgieri a zmeny farby kože (hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia).
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro najlepšie funguje pri tmavších typoch kože alebo pri chĺpkoch, ktoré obsahujú viac melanínu. Čierne a tmavohnedé chĺpky reagujú na ošetrovanie najlepšie, pričom hnedé a svetlohnedé chĺpky budú reagovať tiež, no zvyčajne si vyžadujú viac ošetrovaní na odstraňovanie chĺpkov. Ryšavé by mohli reagovať. Biele, sivé, alebo svetlé chĺpky zvyčajne na prístroj beurer Velvet Skin Pro nereagujú, aj keď niektorí používatelia po viacerých ošetrovaniach na odstraňovanie chĺpkov vnímali pozitívne výsledky.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro môže spôsobiť dočasnú pigmentáciu.
- Nepokúšajte sa svoj prístroj beurer Velvet Skin Pro otvoriť alebo opraviť. Pri otvorení prístroja beurer Velvet Skin Pro môžete prísť do kontaktu s nebezpečnými elektrickými komponentmi alebo pulzujúcou svetelnou energiou, čo môže mať za následok vážne poranenia a/alebo trvalé poškodenie zraku.

NEBEZPEČENSTVO

Prístroj beurer Velvet Skin Pro udržiavajte mimo dosahu vody. Prístroj beurer Velvet Skin Pro je elektrický prístroj. Prístroj nekladte do vody a nenechajte ho spadnúť do vody alebo iných kvapalín.



To by mohlo spôsobiť ťažký zásah elektrickým prúdom!

- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte, ak sa práve kúpete.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte, keď je vlhký alebo mokrý.
- Nesiahajte na prístroj beurer Velvet Skin Pro, ak spadol do vody.
- Sieťovej zástrčky a prístroja sa nedotýkajte mokrymi rukami!

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi

- Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádzte do ohňa.
- Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a nedrvtvte.
- Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu.
- Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto návode na použitie.
- Pred prvým použitím úplne nabite akumulátor.
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora nabite akumulátor doplna aspoň 2-krát do roka.

POZOR

Predchádzanie škodám

- Nepokúšajte sa svoj prístroj beurer Velvet Skin Pro otvoriť alebo opraviť. Pokus o otvorenie môže prístroj beurer Velvet Skin Pro poškodiť a má za následok zánik záruky.
- Prístroj počas používania nevystavujte teplotám pod 10 °C alebo nad 40 °C.
- Prístroj by sa nikdy nemal nechať bez dozoru, ak je sieťový diel zapojený do zásuvky.
- Použite beurer Velvet Skin Pro na účel, na ktorý je určený a spôsobom popísaným v návode na použitie.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro neuvádzajte do prevádzky, ak je poškodený kábel alebo zástrčka a sieťový kábel udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od zahriatych povrchov.
- Pred čistením vyberte sieťovú zástrčku prístroja beurer Velvet Skin Pro zo zásuvky.
- Po nabití akumulátora vyťahnite sieťovú zástrčku prístroja zo zásuvky.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte s nadstavcami a dielmi príslušenstva, ktoré nie sú odporúčané spoločnosťou beurer GmbH.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte, ak počas použitia prístroja vidíte alebo cítite dym.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte, keď správne nefunguje alebo keď sa zdá byť poškodený.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte, keď je snímač farby kože pod svetelnou plochou prasknutý alebo zlomený.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte, keď je jeho vonkajší obal prasknutý alebo sa rozpadá.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte, keď je svetelná plocha prasknutá, zlomená alebo chýba.
- Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte, keď má poškodený kábel alebo zástrčku.
- Prístroj nabíjajte len pomocou dodaného adaptéra.
- Prístroj nepoužívajte, keď je poškodený UV filter okienka výstupu svetla.
- Presný nastaviteľ nepoužívajte, keď je poškodený filter.
- Dbajte na to, aby bolo bez prekážok zabezpečené prúdenie vzduchu cez vetracie otvory.

VÝSTRAHA

Prístroj beurer Velvet Skin Pro v žiadnom prípade nepoužívajte, ak trpíte na jedno z nasledovných ochorení:

- Ak máte alebo ste mali rakovinu kože.
- Keď trpíte epilepsiou.
- Ak máte keloidné jazvy.
- Ak máte herpes alebo psoriázu.
- Ak ste citlivý na svetlo alebo trpíte na inú svetlocitlivosť, ako napr. porfýria, polymorfná svetelná dermatóza, urticaria solaris, lupus atď.
- Ak trpíte na ochorenie látkovej výmeny, ako napr. diabetes.
- Ak trpíte na poruchu zrážanlivosti krvi.

Prístroj beurer Velvet Skin Pro v žiadnom prípade nepoužívajte, ak užívate nejaké z nasledujúcich liekov:

- Ak užívate lieky, ktoré robia kožu citlivejšou na svetlo, vrátane nesteroidných antireumatik (napríklad aspirín, ibuprofen, paracetamol), tetracyklín, fenotiazín, tiazidové diuretiká, sulfonyl močoviny, sulfónamidy, DTIC, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, alfa-hydroxylové kyseliny (AHA), beta-hydroxylové kyseliny (BHA), Retin-A[®], Accutane[®] a/alebo topické retinoidy.
- Ak ste pred krátkym časom boli alebo sa v súčasnosti liečite kyselinou azelaovou.
- Keď ste v posledných dvoch týždňoch užívali tetracyklínové antibiotiká.
- Ak ste počas posledných 6 mesiacov užívali Accutane[®] (izotretinoín).
- Ak ste v rámci predchádzajúcich 3 mesiacov absolvovali steroidovú liečbu.
- Ak ste si v posledných 6 – 8 týždňoch nechali spraviť kožný peeling alebo inú metódu vyhladzovania pokožky.
- Ak ste sa v posledných 3 mesiacoch podrobili liečbe ožarovaním alebo chemoterapii.

Prístroj beurer Velvet Skin Pro v žiadnom prípade nepoužívajte na nasledovných miestach:

- Nad sliznicami v nosovo-ušnej oblasti.
- Nad alebo vedľa aktívneho implantátu, ako je napríklad kardiostimulátor, prístroj proti inkontinencii, inzulínová pumpa atď.
- Ženy na tvári nad líniou líc, okolo očí, obočie alebo riasy, pretože to môže mať za následok vážne poškodenie očí.
- Muži na celej tvári a na krku.
- Na prsných bradavkách, na genitáliách (mužských ani ženských) ani v oblasti rektálneho otvoru.
- Nad piercingom alebo inými kovovými predmetmi, ako sú napr. náušnice alebo šperky.
- Nad tetovaním, alebo permanentným make-upom v ošetrovanej oblasti.
- Nad tmavohnedými alebo čiernymi škvrnami, ako sú napr. veľké pehy, materské znamienka, pečeňové škvrny, pľuzgiere alebo bradavice.
- Nad ekzémom, psoriázou, léziami, otvorenými ranami alebo aktuálnymi infekciami. Pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro počkajte, kým sa príslušné miesto zahojí.
- Na poškodenej alebo popraskanej koži alebo miestach, na ktorých hrozí nebezpečenstvo malignosti.
- Na mieste na tele, na ktorom by ste možno neskôr chceli mať ochlpenie.



Výstražné upozornenie k opaľovaniu pred a po ošetrení!

Opaľovanie pred ošetrením

1. Po opaľovaní počkajte minimálne 2 týždne, kým prístroj opäť použijete.
2. Pred ošetrením skontrolujte, či koža nevykazuje známky spálenia od slnka. V prípade, že spálenie od slnka nie je zahojené, potom s použitím prístroja počkajte dovtedy, kým sa spálenie úplne nezahojí.
3. Následne vykonajte test znášanlivosti kože na opálenej koži (pozri kapitolu 7, krok 2) aby ste zistili vhodnú intenzitu energie.



Opalovanie po ošetrení

1. Po ošetrení počkajte s opalovaním minimálne 48 hodín. Ešte začervenanú kožu nevystavujte slnku!
2. Prvé dva týždne po ošetrení ošetrované miesto chráňte pred slnečným žiarením pomocou odevu alebo opaľovacieho krému (minimálne OF 30).

Opalovanie pod umelým svetlom

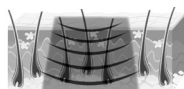
Pokyny na „opalovanie pred ošetrením“ a „opalovanie po ošetrení“ platia aj pre opalovanie pomocou umelého svetla a samoopaľovacích prípravkov.

Pred a po návšteve sauny/kúpaliska dodržiavajte 24-hodinovú prestávku pred opätovným použitím prístroja, pretože v opačnom prípade môže chlór spôsobiť podráždenie kože.

i Upozornenie


Tento zoznam nemusí byť úplný. Ak si nie ste istí, či je pre vás bezpečné používať prístroj beurer Velvet Skin Pro, poraďte sa so svojim obvodným alebo kožným lekárom.

5. Čo je beurer Velvet Skin Pro?



Pred aplikáciou prístroja beurer Velvet Skin Pro

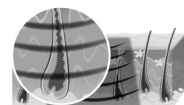beurer Velvet Skin Pro je prístroj na dlhodobé odstraňovanie chĺpkov na báze svetla pre súkromné použitie. Proces odstraňovania chĺpkov založený na laseru a svetle je dobre známy a overený. V rámci klinického použitia sa proces po celom svete počas viac než 15 rokov osvedčil ako bezpečný a účinný na dosiahnutie dlhodobej redukcie chĺpkov.




Počas impulzu prístroja beurer Velvet Skin Pro

Ako svetlo odstraňuje chĺpky?

Odstraňovanie chĺpkov založené na princípe svetla sa zakladá na teórii selektívnej fototermolýzy, pri ktorej sa používa optická energia na zastavenie rastu chĺpkov. Pre dosiahnutie takéhoto tepelného účinku musí koreň chĺpka selektívne absorbovať svetelnú energiu a premeniť ju na teplo.

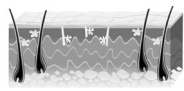Táto selektivita sa dosiahne, keď sa optická energia, odovzdávaná tkanivu, vstreba predovšetkým do pigmentov chĺpkových koreňov, zatiaľ čo koža a okolité tkanivo zostanú studené. Melanín je pigment v chĺpkovom koreňku, ktorý je zodpovedný za absorpciu svetla a vytvára teplo, ktoré definitívne deaktivuje rast chĺpku. Tak dokáže absorbovať viac svetla a svetlo môže byť pri odstraňovaní chĺpkov o to účinnejšie, o čo viac melanínu sa v chĺpkoch nachádza (t. j. o čo tmavšie sú chĺpky).



Po aplikácii prístroja beurer Velvet Skin Pro



Anagén – fáza rastu

Aký vplyv má cyklus rastu chĺpkov na odstraňovanie chĺpkov založené na princípe svetla?

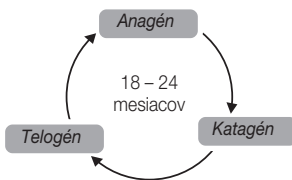
Každý chĺpok na našom tele prejde tromi fázami cyklu rastu: anagén, katagén a telogén. Tieto fázy vo veľkej miere vplyvajú na to, do akej miery odstraňovanie chĺpkov na báze svetla funguje.

Anagén je fáza rastu chĺpkov, katagén je prechodná fáza a telogén zase fáza pokoja.



Katagén – prechodná fáza

Doba kompletneho cyklu rastu chĺpkov je u každého človeka iná a závisí od miesta na tele s ochlpením, spravidla však predstavuje 18 – 24 mesiacov. V konkrétnom momente sa väčšina chĺpkových folikulov na jednej ploche pokožky nachádza vo fáze pokoja. Na tieto chĺpky vo fáze pokoja prístroj beurer Velvet Skin Pro neúčinkuje. Na používanie prístroja beurer Velvet Skin Pro reagujú chĺpky v rastovej fáze. Je potrebné mať na pamäti,





Telogén –
fáza pokožky

že je potrebný minimálne jeden kompletný cyklus rastu chĺpkov, aby sa s prístrojom beurer Velvet Skin Pro dosiahlo trvalé odstránenie chĺpkov.

Pri prístroji beurer Velvet Skin Pro je bezpečnosť na prvom mieste

- **Technológia IPL v prístroji beurer Velvet Skin Pro – najvyššia bezpečnosť pri najnižšej energetickej hladine**

Vďaka technológii Intense Pulsed Light (IPL) je možné dosiahnuť dlhodobé výsledky odstránenia chĺpkov so zlomkom energie, ktorá sa používa pri iných prístrojoch na odstraňovanie chĺpkov na báze svetla. Nízka energia, ktorá sa používa v prístroji beurer Velvet Skin Pro, znižuje potenciálnu možnosť, že sa vyskytnú poškodenia alebo komplikácie, a prispieva k vyššej všeobecnej bezpečnosti.

- **Prístroj beurer Velvet Skin Pro chráni vašu pokožku**



Odstraňovanie chĺpkov na báze svetla nie je vhodné na prirodzene tmavú ani na opálenú pokožku. V prístroji beurer Velvet Skin Pro je integrovaný *snímač farby kože*, pomocou ktorého môže zmerať plocha kože, ktorá sa má ošetrovať, takže aplikácia svetla je možná len pri vhodných odtieňoch pokožky. Táto bezpečnostná funkcia predchádza ošetrovaniu kože, ak máte príliš tmavú farbu kože alebo ste príliš opálený. Svetelný priezor prístroja je okrem toho vybavený zabudovaným UV filtrom, ktorý blokuje škodlivé UV lúče.

- **Prístroj beurer Velvet Skin Pro chráni vaše oči**

Prístroj beurer Velvet Skin Pro je na ochranu očí vybavený integrovaným snímačom kontaktu s pokožkou. Tento bol vyvinutý, aby nebolo možné vyslať svetelný impulz, ak sa prístroj drží vo vzduchu. Záblesk sa spustí len vtedy, keď snímač kontaktu s pokožkou prilieha k pokožke.

6. Popis prístroja

	1. Záblesková žiarovka
	2. Svetelné okienko
	3. Aktivačné tlačidlo (na spustenie 3 zábleskov za sebou, nastaví režim „Auto Flash“)
	4. Ukazovateľ energetickeho stupňa
	5. Ukazovateľ stavu akumulátora
	6. Tlačidlá výberu energetickeho stupňa
	7. Tlačidlo automatickeho rozpoznania odtieňa kože
	8. Tlačidlo ON/OFF
	9. Kontrolka
	10. Snímač odtieňa kože a kontaktu s kožou
	11. Nabíjacia zdierka
	12. Presný nadstavec

1. **Tlačidlo ZAP/VYP** – jednoduchým stlačením tlačidla  sa prístroj zapne a vypne. Prístroj sa automaticky vypne, keď sa päť minút nepoužíva. Pri zapnutí prístroja sa nakrátko rozsvietia všetky žiarovky ukazovateľa energetickeho stupňa a následne sa prístroj nastaví na energetický stupeň 1.
2. **Tlačidlo na automatické rozpoznanie odtieňa kože** – stlačením tlačidla  môžete určiť odporúčaný energetický stupeň pre svoje ošetrenia na danom mieste kože. Keď sa stlačí toto tlačidlo, budú desať

sekúnd blikaf voľčívové tlačídlá energie. Keď má snímač farby kože úplný kontakt s požadovaným miestom ošetrovania a vydá sa svetelný impulz, je odporúčaný energetický stupeň (v závislosti od odtieňa kože na ošetrovanom mieste) nastavený automaticky; rozsvieti sa zodpovedajúci ukazovateľ energetického stupňa.

Upozorňujeme, že odporúčaný energetický stupeň sa vyberie len vtedy, keď sa stlačí príslušné tlačílo, nie keď sa zmení odtieň kože, resp. miesto ošetrovania.

3. Tlačídlá výberu energetického stupňa – tlačidlo + (vyšší energetický stupeň) a – (nižší energetický stupeň) umožňujú výber zo šiestich rôznych energetických stupňov. Vyberte energetický stupeň v závislosti od svojho osobného komfortu a na základe testu znášanlivosti kože. Pri výbere optimálneho energetického stupňa môžete na každé ošetrované miesto použiť tlačidlo automatického rozpoznania odtieňa kože.

- Stlačením tlačidiel + alebo - (po zapnutí prístroja) sa energetický stupeň zvýši, resp. zníži o jeden stupeň. Každé ďalšie stlačenie zmení energetický stupeň medzi najnižším (označeným číslom „1“) a najvyšším stupňom (označeným číslom „6“).
- Podľa vybraného energetického stupňa svieti daný počet zelených žiaroviek ukazovateľa energetických stupňov.

4. Ukazovateľ stavu akumulátora – tento ukazovateľ poskytuje informáciu o stave nabitia akumulátora:

- Červená – akumulátor sa nabíja.

Upozornenie: Ak okrem červenej žiarovky svieti aj energetický stupeň 1, je prístroj zapnutý.

- Zelená – akumulátor je úplne nabitý a prístroj je pripojený k externému napájaniu prúdom.
- Červená, pomaly blikajúca – nízky stav nabitia akumulátora (cca 30 percent).
- Červená, rýchlo blikajúca – veľmi nízky stav nabitia akumulátora (cca 10 percent).

Upozornenie: Ukazovateľ stavu nabitia svieti nazeleno, resp. bliká načerveno len vtedy, keď je prístroj zapnutý.

5. Kontrolka – tento ukazovateľ na zadnej strane prístroja je vybavený viacerými stavovými žiarovkami (pozri tabuľku nižšie).

Zobrazenie	Režim	
Svieti, nazeleno	Zapnuté	Pripravené na svetelný impulz. Pri vysielaní svetelného impulzu, resp. medzi svetelnými impulzmi nesvieti žiadna kontrolka.
Rozsvietenie, naoranžovo	Vyslanie (svetelného impulzu) sa zablokuje.	Prístroj nevydá svetelný impulz pre nedostatočný kontakt s pokožkou.
Rozsvietenie, načerveno	Vyslanie (svetelného impulzu) sa zablokuje.	Prístroj nevydá svetelný impulz pre nepovolený odtieň pokožky (nevhodná skupina e podľa Fitzpatrickovej klasifikácie v súlade s upozornením na zadnej strane návodu na obsluhu).
Bliká, naoranžovo	Upozornenie na koniec prevádzkovej životnosti	Upozorňuje na blížiaci sa koniec prevádzkovej životnosti zábleskovej žiarovky.
Svieti, načerveno	Bol dosiahnutý koniec prevádzkovej životnosti	Prístroj je trvale blokovaný, záblesková žiarovka dosiahla svoju svetelnú hranicu, vyskytla sa interná porucha alebo priezor ošetrovania riadne nedolieha na prístroj.

7. Uvedenie do prevádzky

KROK 1: Skontrolujte, či je prístroj beurer Velvet Skin Pro pre vás vhodný

VÝSTRAHA

Pred prvým použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro skontrolujte, či je pre vás prístroj vhodný. Na kontrolu, či je prístroj beurer Velvet Skin Pro pre vás vhodný, si prečítajte kapitolu „4. Varovné a bezpečnostné upozornenia“ a na základe „Tabuľky farieb chĺpkov a kože“ na zadnej strane tohto návodu na obsluhu určite, ktoré intenzity svetla sú najvhodnejšie pre vašu farbu kože a telesného ochlpenia, resp. či je táto metóda pre vás vôbec vhodná (ak nie je, táto skutočnosť je v tabuľke označená písmenom „x“).

KROK 2: Test znášateľnosti kože

VÝSTRAHA

Pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro vykonajte test znášateľnosti kože.

Testom znášateľnosti kože by sa malo zistiť, ako na ošetrovanie prístrojom beurer Velvet Skin Pro reaguje vaša pokožka. Zároveň vám pomôže pri nastavení optimálneho energetického stupňa pre každú ošetrovanú oblasť.

Na každej časti kože, ktorú chcete ošetrovať, vykonajte **48 hodín** pred úplným ošetrením test znášateľnosti kože.

Upozornenie

Pri ošetrení tváre by sa mal test znášateľnosti kože vykonať na mieste bez chĺpkov, ako napríklad pod uchom alebo na strane krku.

1. Pred použitím dbajte na to, aby bola vaša pokožka oholená, čistá a suchá (bez akýchkoľvek zvyškov púdry, krému, make-upu, antiperspirantu alebo dezodorantu).

VÝSTRAHA

Krátko pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro si NIKDY nečistite kožu horľavými kvapalinami, ako je alkohol alebo acetón.

2. Prístroj nasmerujte podľa popisu uvedeného v bode 2 až 5 v kapitole „8.1 Začiatok používania“.

3. Svetelnú plochu prístroja umiestnite na skúšaný povrch pokožky a dbajte na úplný kontakt s pokožkou.

4. Prístroj sa automaticky nastaví na najnižší energetický stupeň. Stlačením aktivačného tlačidla vydáte prvý impulz na energetickom stupni 1. Uvidíte jasný záblesk, začujete praskavý zvuk a prípadne zacítite jemné pálenie a/alebo pôsobenie tepla. Prístroj je max. do 3 sekúnd pripravený na ďalší impulz a kontrolka na prístroji beurer Velvet Skin Pro neprerušovane svieti nazeleno.

5. Svetelný priezor odstráňte z pokožky a umiestnite ho na ďalšie miesto skúšanej plochy.

Upozornenie

Stupeň energie zvyšujte iba v takom prípade, ak pre vás predchádzajúci stupeň energie nebol nepríjemný. V prípade, že pre vás bol už stupeň energie 1 nepríjemný, nezvyšujte stupeň energie.

Upozornenie

Upozornenie: Tlačidlo na automatické rozpoznanie odtieňa kože môžete použiť na automatické určenie odporúčaného energetického stupňa na dané ošetrované miesto. Berte do úvahy, že odporúčanie sa vydáva na základe vášho odtieňa kože. Energetický stupeň môžete kedykoľvek zmeniť.

6. Tlačidlom výberu energetického stupňa „+“ môžete energetický stupeň zvýšiť o 1. Ukazovateľ energetického stupňa svieti podľa vybraného energetického stupňa.

Vydajte druhý impulz s energetickým stupňom 2 stlačením aktivačného tlačidla.

7. Kroky 5 a 6 zopakujte len vtedy, keď sa cítite dobre, kým dosiahnete najvyšší stupeň 6. Test ukončíte, keď máte nepríjemný pocit, pretože pri zvyšovaní energetického stupňa hrozí nebezpečenstvo škodlivých následkov. Test hneď ukončíte, keď zistíte škodlivé účinky ako extrémne sčervenanie alebo pluzgiere.
8. Počkajte 48 hodín a preskúmajte ošetrovanú plochu.

Ak sa vám ošetrovaná plocha javí normálne (žiadna reakcia alebo mierne sčervenanie), môžete pokračovať s úplným ošetrením na najvyššom energetickom stupni, ktorý ste pri teste vnímali bez problémov. Ak zaznamenáte extrémne sčervenanie, opuch alebo pluzgiere aj pri najnižšom energetickom stupni, na tomto mieste už nevykonávajte úplné ošetrenie.

Upozornenie

Úplné ošetrenie nevykonávajte na energetickom stupni, ktorý ste ešte netestovali!
Testovanú plochu ošetrujte najskôr 1 týždeň po vykonaní testu.

KROK 3: Pre najlepšie výsledky s prístrojom beurer Velvet Skin Pro si ošetrenia naplánujte

Typický cyklus rastu chýpkov môže trvať 18 – 24 mesiacov. Na dosiahnutie dlhodobého odstránenia chýpkov môžu byť v tomto období potrebné viaceré ošetrenia prístrojom beurer Velvet Skin Pro. Účinnosť odstránenia chýpkov sa u každého človeka odlišuje a je iné aj v závislosti od oblasti tela, farby chýpkov a aj od toho, ako sa prístroj Velvet Skin Pro používa.

Typický plán na odstránenie chýpkov pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro počas úplného cyklu rastu chýpkov:

- Odstup medzi prvými 3 – 4 ošetreniami na odstraňovanie chýpkov pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro by mal predstavovať vždy približne dva týždne.
- Odstup medzi ošetreniami na odstraňovanie chýpkov 5 – 7 pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro by mal predstavovať vždy približne štyri týždne. Následne budete prístroj beurer Velvet Skin Pro používať zvyčajne občas a v prípade potreby, kým sa nedosiahnu dlhodobé výsledky.

To zodpovedá odporúčanému plánu ošetrení, s ktorým sa preukázateľne dosahujú najlepšie výsledky. Môžete si však vypracovať aj iný osobný plán ošetrení a aj napriek tomu získať uspokojivé výsledky.

Upozornenie

Ak sa to isté miesto na tele ošetruje častejšie ako raz za dva týždne, výsledky odstraňovania chýpkov sa tým nezlepšia.

Typická starostlivosť po dlhodobom odstránení chýpkov použitím prístroja Velvet Skin Pro:

Z dôvodu hormonálnych zmien alebo iných fyziologických zmien sa môžu aktivovať neaktívne chýpkové folikuly. Preto môže byť z času na čas potrebné opätovne ošetriť niektoré miesta prístrojom beurer Velvet Skin Pro.

KROK 4: Príprava ošetrovanej oblasti

Pred použitím dbajte na to, aby bola vaša pokožka oholená, čistá a suchá (bez akýchkoľvek zvyškov púdrov, krému, make-upu, antiperspirantu alebo dezodorantu).

VÝSTRAHA

Krátko pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro si nečistite kožu horľavými kvapalinami, ako je alkohol alebo acetón.

KROK 5: Nastavenie intenzity energie/automatické rozpoznanie odtieňa kože

Energetický stupeň

Energetický stupeň určuje intenzitu svetelného impulzu prístroja beurer Velvet Skin Pro, ktorý sa vydá na pokožku (od najnižšieho stupňa (-) po najvyšší stupeň (+)). Ukazovateľ energetického stupňa na prístroji zobrazuje zvyšovanie energetického stupňa. So zvyšujúcim sa energetickým stupňom sa

zvyšujú aj výsledky odstraňovania chĺpkov ako aj nebezpečenstvo možných vedľajších účinkov a komplikácií.

Prvé ošetrovanie na odstraňovanie chĺpkov začnite vždy automatickým rozpoznaním odtieňa pokožky a testom znášanlivosti kože potvrdíte energetický stupeň.

Automatické rozpoznanie odtieňa kože/meranie odtieňa kože

Prostredníctvom automatického rozpoznanie odtieňa kože si môžete na prístroji nechať zobrazíť intenzitu energie vhodnú pre váš odtieň pokožky.

Upozornenie

- Pre svoju bezpečnosť si vyberte vždy najtmavšiu časť (napr. vonkajšiu stranu lýtky, zadnú časť ramena atď.)
Dôležité: Pred použitím na inom mieste na tele musíte znovu vykonať meranie.
- Prístroj v režime rozpoznanie odtieňa kože nevydáva impulz.
- Ak chcete rozpoznanie odtieňa kože predčasne ukončiť, môžete sa stlačením tlačidla výberu energetického stupňa (+ alebo -) znovu vrátiť do normálneho režimu.

Ak počas prvého ošetrovania na odporúčanom energetickom stupni alebo po ňom zaznamenáte ľahké podráždenie alebo podráždenie nezaznamenáte, môžete energetický stupeň pri nasledujúcom ošetrovaní zvýšiť o 1.

VÝSTRAHA

Energetický stupeň nezvyšujte, keď ste počas ošetrovania prístrojom beurer Velvet Skin Pro zaznamenali abnormálne bolesti! (Pozri „Krok 6 Oboznámenie sa s možnými vedľajšími účinkami“)
Energetický stupeň nezvyšujte počas ošetrovania na odstraňovanie chĺpkov ani, keď ste nezaznamenali žiadne nepríjemné pocity.
Podráždenie kože sa môže vyskytnúť aj po dlhšom čase používania.

KROK 6: Oboznámenie sa s možnými vedľajšími účinkami používania prístroja beurer Velvet Skin Pro

Ak sa prístroj beurer Velvet Skin Pro používa podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu, potom sú vedľajšie účinky a komplikácie súvisiace s použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro zriedkavé. Pretože každá kozmetická metóda, vrátane tých, ktoré boli vyvinuté na domáce použitie, je spojená s určitým rizikom. Preto je dôležité, aby ste rizikám a komplikáciám spojeným so systémom na odstraňovanie chĺpkov pulzovým svetlom na domáce použitie porozumeli a súhlasili s nimi.

Komplikácia	Pravdepodobnosť komplikácie	Vedľajší účinok	Pravdepodobnosť vedľajšieho účinku
Pôsobenie viacerých impulzov na to isté miesto na koži	Nepatrné	Ľahké podráždenie kože	Nepatrné
		Sčervenanie kože	Nepatrné
		Zvýšená citlivosť kože	Nepatrné
		Poranenia a spálenia kože	Zriedkavé
		Tvorba jaziev	Zriedkavé
		Zmeny pigmentácie	Zriedkavé
		Nadmerné sčervenanie a opuch	Zriedkavé
		Infekcia	Zanedbateľné
		Hematóm	Zanedbateľné

Ľahké bolestivosť kože

Aj keď odstraňovanie chĺpkov pulzovým svetlom v domácom prostredí je vo všeobecnosti dobre znášané, väčšina používateľov zaznamenáva počas aplikácie ľahké nepohodlie, ktoré väčšinou popisujú ako pocit pichania na ošetrovanej ploche kože. Pociť pichania bežne pretrváva počas aplikácie, prípadne ešte pár minút po jej ukončení. Všetko, čo presahuje toto ľahké nepohodlie znamená,

že by ste buď nemali v ošetrovaní prístrojom beurer Velvet Skin Pro pokračovať, pretože takýto spôsob odstraňovania chĺpkov pre vás nie je vhodný, alebo je toto nastavenie energetického stupňa pre vás príliš vysoké.

Sčervenanie kože

Vaša pokožka môže sčervenáť hneď po aplikácii prístroja beurer Velvet Skin Pro alebo 24 hodín po nej. Sčervenanie zmizne spravidla do 24 hodín. Ak sčervenanie nezmizne do 2 až 3 dní, vyhľadajte lekára.

Zvýšená citlivosť kože

Pokožka na ošetrovanej ploche je citlivejšia, takže môže byť suchšia alebo sa môže odlupovať.

Poranenia a spálenia kože

Veľmi zriedka sa po použití prístroja môžu na koži vyskytnúť popáleniny alebo rany. Popálenina alebo rana si môžu vyžadovať niekoľko týždňov na zahojenie a nanajvýš zriedkavo môže zostať viditeľná jazva.

Tvorba jaziev

Aj keď k tomu dochádza len vo veľmi zriedkavých prípadoch, môže sa vyskytnúť tvorba trvalých jaziev. Prípadná tvorba jaziev sa zvyčajne vyskytuje v podobe plochej, bielej lézie na koži (hypotrofné). Sčervenanie sa môže rozširovať alebo zintenzívňovať (hypertrofné) a okraje poranenia môžu byť dokonca vystupujúce (keloidné). Môžu byť potrebné následné estetické ošetrenia, aby sa zlepšil vzhľad jazvy.

Zmeny pigmentácie

Prístroj beurer Velvet Skin Pro miery na korienok chĺpkov, predovšetkým na pigmentované bunky vo folikule a na samotný folikul.

Napriek tomu hrozí nebezpečenstvo hyperpigmentácie (zosilnený pigment alebo hnedé sfarbenie) alebo hypopigmentácie (vyblednutie) okolitej pokožky. Toto nebezpečenstvo zmeny pigmentácie kože je vyššie u ľudí s tmavšou pokožkou. V bežných prípadoch sú zmeny sfarbenia a pigmentácie pokožky dočasné a trvalá hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia kože sa vyskytuje len zriedka.

Nadmerné sčervenanie a opuch

V ojedinelých prípadoch môže ošetrovaná koža veľmi sčervenáť a opuchnúť. To sa častejšie vyskytuje na citlivých oblastiach tela. Začervenanie a opuchy by mali odznieť do 2 až 7 dní a mali by sa ošetrovať častým prikladaním ľadu. jemné čistenie je v poriadku, no mali by ste sa vyhýbať vystavovaniu slnečnému žiareniu.

Infekcia

Infekcia kože je veľmi zriedkavým, ale stále možným rizikom nasledujúcim po spálení alebo poranení kože spôsobenom prístrojom beurer Velvet Skin Pro.

Hematóm

Použitie prístroja beurer Velvet Skin Pro môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch za následok tvorbu hematómov s modrofialovým sfarbením, ktoré môžu pretrvávajúť 5 až 10 dní. Po vyblednutí hematómov sa môže vyskytnúť hrdzavohnedé sfarbenie kože (hyperpigmentácia), ktoré môže byť trvalé.

KROK 7: Čo je možné očakávať od ošetrovania prístrojom beurer Velvet Skin Pro?

Pre mnohých používateľov je použitie prístroja beurer Velvet Skin Pro prvou skúsenosťou s prístrojom na odstraňovanie chĺpkov na báze svetla vyvinutom na domáce použitie. Prístroj beurer Velvet Skin Pro sa jednoducho obsluhuje a ošetrenia na odstraňovanie chĺpkov sú rýchle. Počas ošetrovania prístrojom beurer Velvet Skin Pro je normálne, že pociťujete a pozorujete nasledovné:

- **Ventilátor hučí** – chladiaci ventilátor v prístroji beurer Velvet Skin Pro vydáva zvuk podobný fénu. Je to normálne.
- **Praskavý zvuk pri každom impulze** – keď prístroj beurer Velvet Skin Pro vydá impulz, je normálne, že spolu so svetelným zábleskom počujete aj akýsi praskavý zvuk.

- **Mierny odtláčok svetelného okienka** – toto je nutné a užitočné na umiestnenie ďalšieho, tesne priliehajúceho svetelného impulzu a je súčasťou bezpečnostnej funkcie prístroja beurer Velvet Skin Pro.
- **Pocit tepla a mravenčenia** – počas každého svetelného impulzu je normálne, že pocítujete teplo a mravenčenie spôsobené svetelnou energiou. Myslite na to, že je dôležité používať pri prvom ošetrení na odstraňovanie chlpkov vždy najnižší energetický stupeň. Do hodiny po aplikácii prístroja beurer Velvet Skin Pro môžete pocívať určité teplo.
- **Mierne červená alebo ružová farba kože** – počas ošetrenia prístrojom beurer Velvet Skin Pro alebo tesne po ňom nie je nezvyčajné, keď zaznamenáte ľahké ružové sfarbenie kože. Väčšinou to vidno najviac okolo chlpkov. Ak zaznamenáte úplne sčervenanie kože, plúzgiere alebo spáleniny, okamžite prestaňte používať prístroj beurer Velvet Skin Pro.

8. Používanie

VÝSTRAHA

Ak chcete prístroj používať na tvári, prečítajte si najskôr pokyny uvedené v kapitolách 8.2 až 8.3 a potom pokračujte kapitolou „8.1 Začiatok používania“.

8.1 Začiatok používania

1. Vyberte prístroj z obalu.
2. Skontrolujte prístroj, zástrčku a kábel, či nie sú poškodené.
3. Zapojte prístroj do elektrickej siete.
4. Pred prvým použitím prístroj úplne nabite (dĺžka nabijania cca 2 hodiny).

Upozornenie

Pred použitím dbajte na to, aby bola vaša pokožka oholená, čistá a suchá (bez akýchkoľvek zvyškov púdrov, krému, make-upu, antiperspirantu alebo dezodorantu).

Ak by sa vám prístroj zdal nepríjemne horúci, nechajte ho pár minút vychladnúť. V ošetrení môžete pokračovať bežným spôsobom po krátkej prestávke na vychladnutie.

VÝSTRAHA

Krátko pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro si nečistite kožu horľavými kvapalinami, ako je alkohol alebo acetón.

5. Stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste prístroj zapli.
6. Tlačidlami +/- vyberte správny energetický stupeň alebo využite automatické rozpoznanie odtieňa kože (☉).
7. Prístroj priložte k pokožke v 90-stupňovom uhle tak, aby k nej nástavec úplne doliehal. Integrovaný snímač kontaktu s pokožkou bráni nekontrolovaným svetelným impulzom bez kontaktu s pokožkou.
8. Kontrolka na zadnej strane prístroja svieti nazeleno, čím naznačuje, že môžete pokračovať v ošetrení.
9. Stlačte aktivačné tlačidlo a vydá sa impulz.
10. Prístroj je vybavený režimom „Auto-Flash“. Keď podržíte aktivačné tlačidlo počas 3 po sebe nasledujúcich svetelných impulzov, aktivuje sa tento režim. Prístroj teraz vydáva svetelné impulzy automaticky bez stlačenia aktivačného tlačidla, ak zaznamená dostatočný kontakt s pokožkou.

Upozornenie

Ak stlačíte *aktivačné tlačidlo* a vaša pokožka je príliš tmavá alebo príliš opálená, zasvieti *kontrolka* prístroja načerveno. V takom prípade prístroj na plochu pokožky nevydá impulz.

Ak prístroj nemá dostatočný kontakt s pokožkou a stlačíte aktivačné tlačidlo, svieti *kontrolka* na prístroji naoranžovo. V takom prípade prístroj na plochu pokožky takisto nevydá impulz.

VÝSTRAHA

Túto plochu pokožky neošetrujte viac ako raz za jedno ošetrovanie na odstraňovanie chĺpkov! Viac násobné ošetrovanie plochy pokožky počas jedného ošetrovania na odstraňovanie chĺpkov môže zvýšiť pravdepodobnosť vedľajších účinkov. Snažte sa vyhýbať pulzom, ktoré sa prekrývajú.

Upozornenie

Impulzy prístroja beurer Velvet Skin Pro by sa mali aplikovať v pásoch – začínajúc na jednom konci každého pásu a priebežne smerom k druhému koncu. Táto technika umožňuje lepšiu kontrolu už ošetrovaných plôch kože a pomáha predchádzať viacnásobnému ošetrovaniu rovnej plochy alebo ošetrovaniu prekrývajúcich sa plôch kože. *Svetelná plocha* prístroja beurer Velvet Skin Pro je koncipovaná tak, aby na ošetroanej ploche kože zostali krátkodobé otláčené miesta. Tieto viditeľné otláčené miesta môžete použiť na presné umiestnenie nasledovného impulzu.

11. Prístroj nadvihnite od pokožky a umiestnite ho na ďalšie miesto ošetrovanej plochy. Pri umiestňovaní dbajte na to, aby medzi ošetrovanou pokožkou nevznikali medzery a aby sa miesta neprekrývali. Prístroj sa hneď znovu nabíja a max. do 3 sekúnd je pripravený na ďalší impulz (na najvyššom stupni) (kontrolka na prístroji znovu neprerušovane svieti nazeleno). Postup zopakujte, kým neošetríte celú požadovanú plochu kože.

Po ošetrovaní prístrojom beurer Velvet Skin Pro

- Keď ukončíte ošetrovanie na odstraňovanie chĺpkov prístrojom beurer Velvet Skin Pro, prístroj vypnite stlačením tlačidla ON/OFF.
- Po každom ošetrovaní na odstraňovanie chĺpkov sa odporúča prístroj beurer Velvet Skin Pro vyčistiť, predovšetkým *svetelnú plochu*.
- Po vyčistení odporúčame prístroj beurer Velvet Skin Pro uložiť do jeho originálnej škatule a chrániť ho pred vodou.

8.2 Ošetrovanie tváre

VÝSTRAHA

Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte na tvári s vyššou intenzitou ako je úroveň energie 3. Prístroj beurer Velvet Skin Pro ženy nesmú používať na tvári nad lícnymi kosťami alebo očami, obočím a riasami, pretože to môže mať za následok vážne poškodenie očí. Prístroj beurer Velvet Skin Pro nesmú muži používať na tvár, krk v oblasti brady. Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte nad sliznicami v nosovo-ušnej oblasti.

Pokožka tváre je veľmi citlivá a vyžaduje si špeciálnu starostlivosť. Bezpodmienečne dodržiavajte všetky varovné a bezpečnostné upozornenia v tomto návode na obsluhu, aby ste predišli neželaným následkom. Pred ošetrovaním tváre odporúčame vykonať ošetrovanie tela a oboznámiť sa s prístrojom.

Pomocou prístroja Velvet Skin Pro je možné ošetrovať všetky časti tváre pod lícnymi kosťami, ako je napríklad horná pera, líce, sánka, brada a krk.

i Upozornenie

Na uláhlenie používania prístroja na tvár môžete použiť presný nastavec, ktorý je súčasťou balenia. Tento nastavec znižuje svetelnú plochu a umožňuje presnejšie použitie prístroja.

Presný nastavec môžete nasadiť na svetelnú plochu nastrčením a pritlačením na hlavu prístroja.

Presný nastavec, prosím, nasadzujte tak, aby sa v nastavci zachoval výrez na snímač kontaktu s pokožkou/farby kože. Ak by bol snímač kontaktu s pokožkou/ snímač farby kože zakrytý, nie je možné vydať svetelný impulz.

Presný nastavec používajte max. s energetickým stupňom 3 a len vtedy, keď je váš odtieň pokožky svetlejší ako typ pokožky 5.

Presný nastavec nepoužívajte dlhšie ako 80 impulzov za sebou.

Hrozí nebezpečenstvo, že sa červený filter príliš rozohreje, čo môže spôsobiť popáleniny.



1. 48 hodín pred ošetrovaním bezpodmienečne vykonajte bodový test znášanlivosti kože (pozri kapitolu 7, krok 2). Test znášanlivosti kože by sa mal vykonávať v oblasti bez chĺpkov, napríklad pod ušom alebo po stranách krku, aby sa zistil vhodný energetický stupeň.

⚠ VÝSTRAHA

Testovanú plochu ošetrte najskôr 1 týždeň po vykonaní testu znášanlivosti kože.

i Upozornenie

Chĺpky na tvári môžu byť hormonálne podmienené, takže na ich dlhodobé odstránenie môže byť prípadne potrebných viac ošetrovaní.

8.3 Starostlivosť po ošetrovaní tváre

- Naneste upokojujúcu emulziu, napr. Aloe Vera.
- Minimálne 24 hodín sa vyhýbajte aplikácii peelingových a bieliacich krémov alebo zodpovedajúcich výrobkov, pretože to má za následok podráždenie ošetrovanej kože.
- Minimálne 48 hodín po ošetrovaní sa vyhýbajte viac ako 15 minútam pôsobenia priameho slnečného žiarenia. Ak je nedávno ošetrovaná koža počas tohto časového obdobia vystavená slnečnému žiareniu, musíte bezpodmienečne použiť opaľovací krém s OF 30 a vyšším.
- Vyhýbajte sa odstraňovaniu chĺpkov voskom alebo trhaním na ošetrovaných miestach.

Majte na pamäti, že kým sa dostavia dlhotrvajúce výsledky odstraňovania chĺpkov, môže to trvať celý cyklus rastu chĺpkov.

9. Čistenie a starostlivosť

Po každom ošetrovaní na odstraňovanie chĺpkov sa odporúča vyčistenie vášho prístroja beurer Velvet Skin Pro, predovšetkým svetelnej plochy.

⚠ POZOR

Prístroj beurer Velvet Skin Pro alebo jeho časti nikdy neponárajte do vody!

- Na čistenie použite suchú a čistú handričku a čistiaci prípravok určený špeciálne na elektronické prístroje, čím jemne vyčistíte prístroj beurer Velvet Skin Pro a predovšetkým svetelný povrch.

10. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

„Môj prístroj beurer Velvet Skin Pro sa nedá zapnúť“

- Ubezpečte sa, že je akumulátor prístroja nabitý (pomocou zeleného svetla ukazovateľa stavu akumulátora).
- Ak prístroj IPL nevydáva žiadny svetelný impulz, skontrolujte, či
 - a. je nastavac na ošetrovanie riadne upevnený na prístroji (prístroj nefunguje, keď nastavac nie je upevnený na prístroji alebo na ňom nie je upevnený správne).
 - b. sa prístroj nenachádza v automaticky aktivovanom bezpečnostnom režime potom, čo nebol zaznamenaný kontakt s pokožkou, resp. nebol rozpoznávaný vhodný odtieň pleti.
 - c. existuje úplný kontakt s pokožkou.
 - d. nie je ošetrované miesto príliš malé, príliš klenuté alebo kostnaté. Ošetrovací priezor musí úplne doliehať k ošetrovanému miestu (snažte sa ťahať pokožku rovno).
 - e. nie je blokovávané vydanie svetelného impulzu, keď prístroj IPL rozpoznal príliš tmavý odtieň pokožky. V takom prípade kontrolka krátko zasvieti načerveno.
 - f. V prípade bezpečnostných problémov a pri dosiahnutí prevádzkovej životnosti zasvieti kontrolka načerveno. Prístroj sa v takom prípade automaticky vypne.
- Všeobecná chyba:
 - a. Ak je ošetrovací priezor znečistený nečistotami alebo prachom, je potrebné ho vyčistiť podľa pokynov v príslušnej časti. Ak znečistenie neviete odstrániť sami, obráťte sa na zákaznícky servis.
 - b. Ak sa svetelné impulzy vydávajú po zmene ošetrovaného miesta oneskorene, používajte prístroj v chladnejšom prostredí. Vydávanie svetelných impulzov sa pri vyššej teplote okolia spomaľuje.
 - c. Ak sa vyskytne všeobecná chyba, prístroj vypnite, počkajte desať sekúnd a znovu ho zapnite.
- Ak by ste mali so svojím prístrojom problémy, obráťte sa na zákaznícky servis.

11. Často kladené otázky

1. Skutočne prístroj beurer Velvet Skin Pro funguje?

Áno. V rámci klinických testov, ktoré boli vykonávané lekármi, bolo preukázané, že pomocou technológie obsiahnutej v beurer SatinSkin System, je možné dosiahnuť dlhodobé odstránenie chĺpkov. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od rastového cyklu chĺpkov, použitého stupňa intenzity aj od hrúbky a farby chĺpkov.

2. Na akých miestach tela môžem používať prístroj beurer Velvet Skin Pro?

Prístroj beurer Velvet Skin Pro bol vyvinutý na úplné odstránenie telesného ochlpenia. Časté oblasti, ktoré sa ošetrojú prístrojom beurer Velvet Skin Pro, sú nohy, podpažšie, ruky, oblasť bikín a tvár na lícnyimi kosťami.

3. Ako dlho trvá jedno ošetrovanie na odstraňovanie chĺpkov prístrojom beurer Velvet Skin Pro?

Doba sa môže líšiť v závislosti od ošetrovanej oblasti tela. Kompletné ošetrovanie tela (nohy, ruky, podpažšie, oblasť bikín a tvár pod lícnyimi kosťami) trvá približne 21 minút na najnižšom stupni intenzity a s najväčším nastavcom.

4. Je prístroj beurer Velvet Skin Pro bezpečný?

Prístroj beurer Velvet Skin Pro bol vyvinutý so zvýšeným zameraním na vašu bezpečnosť a používa klinicky testovanú technológiu. Prístroj sa však musí používať v súlade s návodom na obsluhu a bezpečnostnými upozoreniami, rovnako ako každý iný prístroj určený na aplikáciu na kožu alebo elektronický prístroj.

5. Spôsobuje prístroj beurer Velvet Skin Pro bolesti?

Pri správnej aplikácii väčšina používateľov prístroja beurer Velvet Skin Pro zhodnotila, že v okamihu svetelného impulzu pociťujú mierny pocit tepla. Používatelia s hrubými a tmavými chĺpkami môžu pociťovať trochu väčšie nepohodlie, ale toto nepohodlie postupne zoslabne, keď sa ošetrovanie na odstraňovanie chĺpkov ukončí. Prístroj beurer Velvet Skin Pro je vybavený 6 energetickými stupňami, ktoré môžete používať podľa svojej citlivosti.

6. Ako často by sa mal používať prístroj beurer Velvet Skin Pro?

Pri ošetrovaní telesného ochlpenia prístrojom beurer Velvet Skin Pro by sa mali prvé štyri ošetrenia vykonať s odstupom dvoch týždňov. Piate až siedme ošetrenie by sa malo vykonávať s odstupom štyroch týždňov. Všetky ostatné ošetrenia by sa mali vykonávať, ak chĺpky dorástli, kým sa nedosiahnu požadované výsledky.

Pri ošetrovaní chĺpkov na tvári pod lícnymi kosťami by sa malo prvých šesť ošetrení vykonať s odstupom dvoch týždňov. Siedme až dvanásťe ošetrenie by sa mali vykonávať s odstupom štyroch týždňov. Všetky ostatné ošetrenia by sa mali vykonávať, ak chĺpky dorástli, kým sa nedosiahnu požadované výsledky.

7. Je prístroj beurer Velvet Skin Pro účinný aj pri bielych, sivých alebo svetlých chĺpkoch?

Prístroj beurer Velvet Skin Pro najlepšie pôsobí pri tmavších typoch kože alebo pri chĺpkoch, ktoré obsahujú viac melanínu. Melanín je pigment, ktorý chĺpkom a koži dodáva sfarbenie a absorbuje svetelnú energiu. Čierne a tmavohnedé chĺpky reagujú najlepšie. Hnedé a svetlohnedé chĺpky reagujú tiež, zvyčajne si však vyžadujú väčší počet ošetrení na odstraňovanie chĺpkov. V prípade červených chĺpkov je možné vidieť určitý účinok. Biele, sivé, alebo svetlé chĺpky zvyčajne na prístroj beurer Velvet Skin Pro nereagujú, aj keď niektorí používatelia po viacerých ošetreniach na odstraňovanie chĺpkov vnímali pozitívne výsledky.

8. Môžem prístroj beurer Velvet Skin Pro používať na hnejdej alebo čiernej koži?

Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte na prirodzene tmavej pokožke! Nefunguje to! Prístroj beurer Velvet Skin Pro je založený na svetelnom princípe a selektívnym ošetrením pigmentu chĺpkov odstraňuje neželané chĺpky. V okolitom kožnom tkanive sa ďalej nachádza rôzne množstvo pigmentu. Množstvo pigmentu v koži určitej osoby, ktoré sa prejavuje farbou kože, určuje stupeň rizika, ktorému je pri použití prístroja beurer Velvet Skin Pro vystavená. Ošetrovanie tmavej kože odstraňovaním chĺpkov na princípe svetla môže mať negatívne následky, ako sú napr. popáleniny, plúzgieri a zmeny farby kože (hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia). V prístroji beurer Velvet Skin Pro je integrovaný *snímač odtieňa pokožky*, ktorý zmeria farbu ošetrovanej pokožky na začiatku každého ošetrenia na odstraňovanie chĺpkov a príležitostne počas ošetrenia. *Snímač farby kože* zabraňuje ďalšiemu vydaniu svetelného impulzu, ak rozpozná, že sa prístroj beurer Velvet Skin Pro používa na tmavšom odtieni kože.

9. Odkedy uvidím výsledky ošetrenia prístrojom beurer Velvet Skin Pro?

Podobne ako pri každom inom prístroji na odstraňovanie chĺpkov založenom na svetelnom alebo laserovom princípe, výsledky nie sú viditeľné okamžite, a môžete mať dokonca dojem, že sa nestalo vôbec nič. Niekedy sa môže stať, že po ošetrení na odstraňovanie chĺpkov sa zdá, že chĺpky dorastajú, no zvyčajne väčšina týchto chĺpkov jednoducho vypadne po dvoch týždňoch. Okrem toho chĺpky rastú v troch rôznych fázach a prístroj beurer Velvet Skin Pro ovplyvňuje iba chĺpky v aktívnej fáze rastu. To je jeden zo základných dôvodov pre to, že sú potrebné viaceré ošetrenia, aby sa dosiahol požadovaný výsledok.

10. Môžu prístroj beurer Velvet Skin Pro používať aj muži?

Aj napriek tomu, že prístroj beurer Velvet Skin Pro bol vyvinutý pre ženy, môže byť vhodný aj pre mužov. Chĺpky mužov, typicky chĺpky na hrudi, si však vyžadujú viac ošetrení na odstraňovanie chĺpkov v porovnaní so ženami, aby sa dosiahol požadovaný účinok.

11. Prečo mi rastú chĺpky, aj napriek ošetreniu pred týždňom?

Môže sa zdať, že chĺpky stále rastú aj dva týždne po ošetrení na odstraňovanie chĺpkov pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro. Tento proces je známy ako „odhadzovanie“ a približne po dvoch týždňoch zistíte, že tieto chĺpky jednoducho vypadnú alebo je možné ich vytiahnuť jemným potiahnutím. (Aj napriek tomu neodporúčame ťahať za chĺpky – nechajte ich jednoducho vypadnúť prirodzenou cestou.) Tiež je však možné, že niektoré chĺpky následkom zabudnutej aplikácie alebo rôznych rastových fáz, zostanú neovplyvnené prístrojom beurer Velvet Skin Pro. Tieto chĺpky sa ošetrí pri nasledujúcich ošetreniach a to je dôvod, prečo sú potrebné viaceré ošetrenia na odstraňovanie chĺpkov, aby sa s prístrojom beurer Velvet Skin Pro dosiahol najlepší výsledok.

12. Je pravda, že niektoré chĺpky po odstraňovaní chĺpkov na princípe svetla dorastajú tenšie a jemnejšie?

Tento fenomén bol kozmetičkami a lekármi, ktorí používajú svetelné a laserové prístroje na odstraňovanie chĺpkov, podrobne zdokumentovaný. Je možné, že niektoré chĺpky po odstraňovaní chĺpkov pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro dorastajú tenšie a jemnejšie. Zvyčajne sú tieto chĺpky zlomkom pôvodných chĺpkov, ktoré tam boli pôvodne, a ďalšie ošetrovanie môže mať na ne požadovaný vplyv.

13. Prečo sa nemôžem ošetrovať po „aktívnom“ opalovaní?

Prístroj beurer Velvet Skin Pro nepoužívajte na opálenej koži alebo po vystavení sa slnku. Opálená koža, predovšetkým po vystavení sa slnečnému žiareniu, obsahuje veľké množstvo pigmentu melanín. To platí pre všetky typy a farby kože, vrátane tých, pri ktorých sa zdá, že nehnednú príliš rýchlo. Existencia veľkého množstva melanínu vystavuje kožu väčšiemu riziku negatívnych následkov súvisiacich s použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro, vrátane popálenín, plúzgierov a zmien farby kože (hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia).

14. Je dlhodobé používanie prístroja beurer Velvet Skin Pro nebezpečné pre moju kožu?

Použitie svetelnej a laserovej energie v rámci estetickej medicíny je už viac než 15 rokov podrobne dokumentované v profesionálnych odborných časopisoch kontrolovaných odborníkmi a významnými zariadeniami, ako je klinika Mayo Klinik. Tieto časopisy a zariadenia neinformovali o žiadnych vedľajších účinkoch alebo poškodeniach následkom dlhodobého používania svetelných a laserových prístrojov.

15. Môžem používať prístroj beurer Velvet Skin Pro na odstránenie chĺpkov z brady alebo z inej časti tváre?

Prístroj beurer Velvet Skin Pro **sa môže** použiť na ošetrovanie chĺpkov na tvári pod lícnyimi kosťami. Pri používaní na tvári je obzvlášť dôležité dbať na to, že treba vynechať oblasť očí: prístroj beurer Velvet Skin Pro sa v žiadnom prípade nesmie používať na oblasť okolo očí ani na oči. Ako pri iných častiach tela by ste sa mali aj pri ošetrovaní tváre vyhýbať slnečnému žiareniu pred ošetrením prístrojom beurer Velvet Skin Pro aj po ňom. Prijateľným prostriedkom na ochranu pred slnečným žiarením je zakrývajúce oblečenie alebo opaľovací krém (minimálne LSF 30+), ktoré použijete pred ošetrením aj po ňom.

16. Ako dlho by som mal počkať s ošetrením pomocou prístroja beurer Velvet Skin Pro po nechránenom vystavení sa slnku?

Mali by ste počkať 2 týždne, kým budete prístroj beurer Velvet Skin Pro používať po nechránenom vystavení sa slnku. Ak si aj napriek tomu nie ste istý z dôvodu vystavovania sa slnku, mali by ste sa poradiť so svojim lekárom.

17. Treba pred použitím prístroja beurer Velvet Skin Pro urobiť niečo konkrétne?

Pred každým ošetrením s prístrojom beurer Velvet Skin Pro je dôležité, aby ste sa vyhýbali vystaveniu ošetrovanej plochy slnku minimálne po dobu 2 týždňov. Pomôcť pritom môže opaľovací krém s UV filtrom (OF 30+), ako aj odev, ktorý zakrýva ošetrovanú plochu. Ošetrovaná plocha by sa okrem toho mala vyčistiť jemným mydlom a vodou, a chĺpky by sa mali oholiť až na povrch kože.

18. Ako by mala vyzeráť starostlivosť pokožku práve ošetrovanú prístrojom beurer Velvet Skin Pro?

Plocha, ktorá bola ošetrovaná prístrojom beurer Velvet Skin Pro, sa môže vyčistiť a ošetriť produktami na starostlivosť o pleť. Dbajte hlavne na to, aby ste sa vyhli nechránenému pobytu na slnku. Opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom (30+), ako aj zakrývajúci odev tvoria dostatočnú ochranu proti slnku.

12. Likvidácia

Spotrebované, úplne vybité akumulátory je potrebné likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný akumulátory zlikvidovať.

Na akumulátoroch obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,

Cd = batéria obsahuje kadmium,

Hg = batéria obsahuje ortuť.



V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.

Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

Akumulátor prístroja sa musí zlikvidovať osobitne. Akumulátor sa nesmie odhadzovať do domového odpadu.

Informácie o likvidácii získate od autorizovaného predajcu alebo od verejných zariadení alebo v špecializovanej zberni.

13. Technické údaje

Typ	IPL 8800	
Ošetrovaná plocha	4,5 cm ² /presný nastavec 2 cm ²	
Technológia	IPL (Intense Pulsed Light) na súkromné použitie	
Vlnová dĺžka	475 – 1200 nm (veľký nastavec), 550 – 1200 nm (presný nastavec)	
Max. energetická hladina	max. 5 J/cm ²	
Voliteľné energetické stupne	6	
Rýchlosť	1 impulz s odstupom max. 3 sekundy (na najvyššom stupni)	
Max. impulzy v žiarovke	600 000	
Rozmery	cca 17,5 x 6,5 x 20 cm	
Hmotnosť	cca 480g	
Teplota	Prevádzka	10–40 °C
	Skladovanie	-10–70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	Prevádzka	30–70 % rel. vlh.
	Skladovanie	0–90 % rel. vlh. pri 55 °C (bez kondenzácie)
Akumulátor	Lítium-iónový akumulátor, 7,4 V, 2500 mAh	
Impulzy na nabitie	550 impulzov	

Sieťový zdroj

Číslo modelu	YJS024Y-1201800
Vstup	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Výstup	12,0 V === 1,8 A, 21,6 W
Ochrana	dvojitá ochranná izolácia
Polarita	
Klasifikácia	Trieda ochrany II
Priemerná efektívnosť v prevádzke	≥ 86,55 %
Príkion pri nulovom zaťažení	≤ 0,08 W

Technické zmeny vyhradené

14. Záruka/servis

Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len „Beurer“) poskytuje za ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento výrobok.

Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim zostávajú ďalej uvedenými záručnými podmienkami nedotknuté.

Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných záručných predpisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 3 roky od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ a používa ich výlučne na osobné účely v rámci domáceho použitia.

Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa týka funkčnosti, ako chybný podľa nasledujúcich ustanovení, Beurer podľa týchto záručných podmienok bezplatne výrobok vymení alebo vykoná opravu.

Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na miestneho predajcu, pozri priložený zoznam „Service International“ s adresami servisov.

Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam výrobok poslať a aké podklady sú potrebné.

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci predložiť

- kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe
- originálny výrobok spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.




Z tejto záruky sú výslovne vylúčené

- opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou výrobku;
- diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebojú, resp. spotrebujú pri riadnom používaní (napr. batérie, akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nadstavce a príslušenstvo inhalátora);
- výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie používané, čistené, skladované alebo ošetrované, rovnako ako výrobky, ktoré otvoril, opravoval alebo zmenil kupujúci alebo servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer;
- škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcou a zákazníkom, resp. servisom a zákazníkom;
- výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
- následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade však môžu vzniknúť nároky z ručenia za výrobok alebo z iných kogentných zákonných záručných ustanovení).

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú dobu.

Tabuľka barev ochlupení a typů pokožky / Tabuľka farieb chĺpkov a kože

Typ pokožky / Ochĺpení	I	II	III	IV	V	VI
Černé	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Tmavo-hnědė	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Hnědė	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Tmavý blond	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Svėtlý blond	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Zrzavė	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Šedė/bilė	✗	✗	✗	✗	✗	✗

CS * Zvolte stupeň energie především podle svých osobních pocitů.
 ** Čím vyšší bude stupeň energie, tím efektivnější bude ošetření

SK * Zvolte si energetický stupeň predovšetkým podľa vlastného pocitu.
 ** Čím vyšší je energetický stupeň, tým účinnejšie je ošetrovanie

Tělo | Telo



Obličej | Tvár

