

beurer

MP 59



- CS** Odstraňovač ztvrdlé kůže
Návod k použití 2-9
- SK** Odstraňovač hrubej kože
Návod na obsluhu 10-18

CE



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. Použití v souladu s určením	4	6. Uložení a údržba	8
2. Bezpečnostní pokyny	4	7. Likvidace	8
3. Popis přístroje	6	8. Náhradní díly a díly podléhající opotřebením...8	
4. Uvedení do provozu	6	9. Technické údaje	9
5. Ovládání	7	10. Záruka / servis.....	9

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, jemné terapie, masáže, vzduchu, péče o krásu i o dítě. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, uschovejte jej pro pozdější použití, zpřístupněte jej dalším uživatelům a dodržujte uvedené pokyny.

S pozdravem
váš tým Beurer

Obsah balení









- základní přístroj
- hrubý váleček
- jemný váleček
- nabíjecí stojan
- síťový adaptér
- tento návod k použití



VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.

Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:

	VAROVÁNÍ	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
	POZOR	Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.
	Upozornění	Upozornění na důležité informace
	Dodržujte návod k použití	
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)	
	Výrobce	
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.	
	Používejte pouze v uzavřených prostorech.	

	Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí
	Vhodné pro použití ve vaně či ve sprše.

1. Použití v souladu s určením

Pomocí tohoto odstraňovače ztvrdlé kůže můžete rychle, jednoduše a účinně odstraňovat nepříjemnou ztvrdlou kůži, otlaky a hrubá místa.

Součástí balení je hrubý a jemný váleček. S těmito nástavci můžete optimálně ošetřovat postižená místa.

Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

2. Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tento návod k použití! Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věčné škody. Uchovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším uživatelům. Předjte tento návod při předání přístroje jiné osobě.



VAROVÁNÍ

- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Děti musí být při používání přístroje pod dohledem.
- Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.



POZOR

Při používání může na kůži dojít k velkému nárůstu tepla.

- Během ošetřování pravidelně kontrolujte výsledky. To platí zejména pro diabetiky, neboť jsou méně citliví na bolest a mohli by se snadněji poranit. Pracujte vždy opatrně. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.
- Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné.
- Při dlouhotrvajícím intenzivním používání, např. při obrušování ztvrdlé kůže na nohou, se může přístroj více zahřát. Abyste zabránili popáleninám kůže, je třeba mezi jednotlivými aplikacemi dodržovat delší přestávky.
- V zájmu vlastní bezpečnosti neustále kontrolujte zahřívání přístroje. To platí zejména pro osoby, které jsou méně citlivé na teplo.
- Přístroj smí z hygienických důvodů používat pouze jedna osoba.
- V žádném případě se nepokoušejte opravovat přístroj sami!
- Přístroj používejte pouze s dodávaným příslušenstvím.
- Nepoužívejte u drobných ani u větších zvířat.
- Chraňte přístroj před kontaktem se zdroji tepla.
- Přístroj se nesmí používat déle než 15 minut bez přerušení. Po této době je třeba udělat přestávku minimálně na 15 minut, aby nedošlo k přehřátí motoru.
- Přístroj se nesmí používat na citlivých nebo podrážděných místech pokožky.
- Dbejte na to, aby se při používání přístroje do rotujících nástavců nezachytily vaše vlasy. Pro jistotu si upevněte vlasy gumičkou.

- Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Za síťový kabel netahejte, nekrúte s ním a nelámejte ho.
- Dávejte pozor na to, aby kabel neležel na špičatých nebo ostrých předmětech nebo po nich nebyl tažen.
- Síťový adaptér zapojte do zásuvky instalované podle předpisů.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt přístroje.
- Přístroj držte z dosahu špičatých nebo ostrých předmětů.
- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození na základě pádu, nelze ho dál používat.
- Přístroj je třeba vypnout a vytáhnout ze zásuvky po každém použití a před každým čištěním.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento přístroj opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto

- používejte pouze s dodávaným síťovým adaptérem a jen s napětím uvedeným na adaptéru,
- nepoužívejte nikdy, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady,
- nepoužívejte při bouři.

Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám, a odpojte ho od sítě. Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout adaptér ze zásuvky. Přístroj nikdy nadržte nebo nenoste za napájecí kabel. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi kabely a teplými povrchy.

Zajistěte, aby se zástrčka a kabel nedostaly do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.

Nesahejte pro nabíjecí stojan, když spadne do vody a je spojen s adaptérem.



VAROVÁNÍ: Opravy

- Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikovaném servisu.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru

Při nesprávném používání přístroje, popř. při nedodržování tohoto návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!


Přístroj proto

- nenechávejte nikdy bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
- nikdy nezakrývejte, např. dekou, polštářem apod.,
- nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých látek.

i Pokyny pro zacházení s akumulátory

- Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- **⚠ Nebezpečí spolknutí!** Malé děti by mohly akumulátory spolknout a udusit se. Akumulátory proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!
- Chraňte akumulátory před nadměrným teplem.
- **⚠ Nebezpečí výbuchu!** Akumulátory nevhazujte do ohně.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Akumulátory se musí před použitím správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním zcela nabijte akumulátor (viz kapitola 4).
- Pro dosažení co nejdélsí životnosti akumulátoru ho plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.

3. Popis přístroje

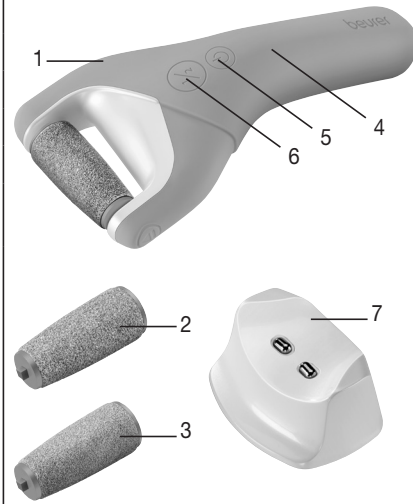	1. Základní přístroj
	2. Hrubý váleček
	3. Jemný váleček
	4. Kontrolka nabíjení
	5. Vypínač
	6. Výběrové tlačítko stupeň rychlosti 1 nebo 2
	7. Nabíjecí stojan

4. Uvedení do provozu

- Odstraňte obal.
- Zkontrolujte, zda přístroj, síťový adaptér nebo kabel nejsou poškozeni.
- Připojte přístroj k síti. Přístroj musí být v tomto okamžiku vypnutý.
- Kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Před prvním použitím přístroj nabíjejte asi 1,5 hodiny. Pomalé blikání kontrolky nabíjení znamená, že se baterie nabíjí. Jestliže kontrolka nepřetržitě svítí, je přístroj plně nabíjený. Pak můžete přístroj použít v provozu na akumulátory.

- Rychlé blikání kontrolky nabíjení během provozu na akumulátor znamená, že akumulátor je prázdný. Přístroj nabijete tak, že ho vložíte kontaktními body na spodní části přístroje do nabíjecího stojanu. Spojte nabíjecí stojan se síťovým kabelem. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky.
- Nabitý akumulátor umožňuje bezdrátový provoz v délce asi 1 hodiny.

POZOR

- Zapnutý přístroj by se neměl dostat do kontaktu s jinými částmi pokožky (např. řasami, vlasy atd.), oděvem a šňůrkami, aby se zamezilo jakémukoliv nebezpečí úrazu, zablokování nebo poškození přístroje.
- Přístroj nepoužívejte na ošetřování podrážděné pokožky, křečových žil, míst s vyrážkou či pupínky, (ochlupených) mateřských znamének nebo ran bez předchozí konzultace s lékařem. Totéž platí pro pacienty s oslabenou imunitou, diabetem a hemofilii.

Upozornění


- Odstraňovač tvrdé kůže můžete používat na suchou i vlhkou pokožku.
- Při používání na suché pokožce je třeba, aby byla pokožka suchá a nemastná.
- Před odstraňováním tvrdé kůže nepoužívejte žádné krémy.
- Neodstraňujte příliš velkou vrstvu tvrdé kůže, jinak by mohla zase rychle narůst.

5. Ovládání

- Dbejte na to, aby byl brusný váleček správně vložen do přístroje.
- Přístroj zapněte stisknutím vypínače na 1 sekundu. Kontrolka nabíjení 3krát zabliká a přístroj se spustí s pomalejší rychlostí.
- Změna stupně rychlosti se provádí krátkým stisknutím tlačítka 1/2.
- Pomocí hrubého brusného válečku nyní můžete odstranit silnou vrstvu tvrdé kůže.
- Při odstraňování nepřilís tvrdých míst nebo při vyhlazování pokožky použijte jemný brusný nástavec.
- Dbejte na to, abyste přístroj nepoužívali na jednom místě déle než 3–4 sekundy.
- Přístroj se automaticky vypne, když je brusný váleček kvůli příliš silnému tlaku během ošetření zablokován cca na 3 sekundy.
- Nepoužívejte odstraňovač tvrdé kůže na podrážděné nebo poraněné pokožce.
- Přejíždějte přístrojem pomalu a pravidelně po tvrdé kůži. Dbejte na to, abyste přístrojem pohybovali svíse pod úhlem 90° vůči tvrdé kůži. Optimálního výsledku dosáhnete, jestliže budete přístrojem přejíždět po tvrdé kůži v různých směrech.

Výměna válečku:

Stiskněte odblokovací tlačítko po straně, přidržte ho a sejměte váleček. Posuňte druhou rukou váleček doprava a vytáhněte ho směrem nahoru.

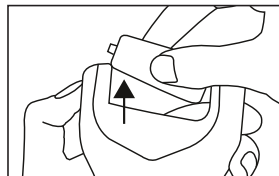

6. Uložení a údržba



VAROVÁNÍ

- Před čištěním vždy vytáhněte přístroj ze zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se do přístroje nebo jeho příslušenství nesmí dostat žádná tekutina.
- Nástavce na tvrdou kůži čistěte čistícím kartáčkem. Doporučujeme kartáček nejprve navlhčit alkoholem, aby bylo zajištěno hygienické čištění.
- Neumývejte přístroj v myčce na nádobí!
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!

Při čištění musí být přístroj odpojený od sítě a vychladlý. Používejte měkkou, navlhčenou utěrku a jemný čisticí prostředek. Poté přístroj otřete do sucha jemnou utěrkou nepouštějící vlákna.

7. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.



Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.

- Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,

Cd = baterie obsahuje kadmium,

Hg = baterie obsahuje rtuť.

Sejměte silikonové pouzdro a otevřete kryt. Vyjměte akumulátor a řádně ho zlikvidujte.



8. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu). Uveďte příslušné objednací číslo.

	Číslo položky nebo objednací číslo
Sada brusných válečků k dokoupení (hrubý, jemný)	571.07

9. Technické údaje

Napájení	vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz výstup: 5 V --- 1 000 mA
Rozměry	17,0 × 8 × 4,5 cm
Hmotnost	cca 184 g
Akumulátor: Kapacita Jmenovité napětí Označení typu	1 000 mAh 3,2 V Li-ion

10. Záruka / servis

Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz seznam „Service international“).

Při zaslání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:

1. Záruční doba produktů BEURER činí 3 roky nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.
Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokladem o koupi nebo fakturou.
2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 - a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 - b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 - c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 - d. Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4. Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Obsah

1. Použitie podľa určenia.....	12	7. Likvidácia	16
2. Bezpečnostné upozornenia.....	12	8. Náhradné diely a diely podliehajúce opo- trebovaniu.....	16
3. Popis prístroja	14	9. Technické údaje	17
4. Uvedenie do prevádzky	14	10. Záruka / servis.....	17
5. Obsluha	15		
6. Údržba a uskladnenie	16		

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy, detí a vzduchu.

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho pre neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer

Obsah balenia









- Hlavný prístroj
- Valček hrubý
- Valček jemný
- Nabíjacia stanica
- Sieťový adaptér
- Návod na obsluhu



VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

Vysvetlenie symbolov

V návode na obsluhu a na typovom štítku sú použité tieto symboly:

	VÝSTRAHA	Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
	POZOR	Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/ príslušenstve.
	Upozornenie	Upozornenie na dôležité informácie.
	Dodržujte návod na obsluhu	
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).	
	Výrobca	
	Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a tým zodpovedá triede ochrany 2.	
	Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.	

	Obal ekologicky zlikvidujte
	Prístroj je vhodný na použitie vo vani alebo sprche.

1. Použitie podľa určenia

Pomocou tohto odstraňovača hrubej kože môžete rýchlo, ľahko a efektívne odstrániť nepríjemnú zrohovatenú kožu, mozole a drsné miesta.

Obsah balenia zahŕňa hrubý a jemný valček. Pomocou týchto nastavcov môžete optimálne ošetrovať postihnuté miesta.

Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

2. Bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu! Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Uchovajte tento návod na obsluhu a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na obsluhu.



VÝSTRAHA

- Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Deti smú používať prístroj iba pod dohľadom.
- Nepoužívajte sieťový adaptér v blízkosti vody.



POZOR

- Pri použití môže na koži dochádzať k výraznej tvorbe tepla.
- Počas ošetrovania pravidelne kontrolujte výsledky. To platí predovšetkým pre diabetikov, pretože sú menej citliví na bolesť a môžu sa ľahko poraniť. Pracujte vždy veľmi opatrne. V prípade pochybností sa poraďte s lekárom.
- Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné.
- Pri dlhodobom intenzívnom použití prístroja, napr. obrusovaní zrohovatej kože na chodidlách, sa prístroj môže viac zahrievať. Aby sa predišlo popáleniu kože, musia sa medzi jednotlivými aplikáciami dodržiavať dlhšie prestávky.
- Pre vlastnú bezpečnosť neustále kontrolujte teplotu prístroja. To platí predovšetkým pre osoby necitlivé na teplo.
- Prístroj smie z hygienických dôvodov používať iba jedna osoba.
- V žiadnom prípade sa prístroj nepokúšajte opraviť samostatne!
- Prístroj používajte len s dodávaným príslušenstvom.
- Nepoužívajte pri drobných zvieratkách/zvieratkách.
- Prístroj uchovávajte mimo zdrojov tepla.
- Prístroj sa nesmie používať nepreerušene dlhšie ako 15 minút. Po uplynutí tohto času je potrebné prerušiť prácu minimálne na 15 minút, aby sa predišlo prehriatiu motora.
- Prístroj sa nesmie používať na citlivé alebo podráždené miesta pokožky.

- Prosím, dbajte na to, aby sa vám pri používaní nezachytili do rotačných nastavcov žiadne vlasy. Pre vlastnú bezpečnosť si vlasy uchyťte gumičkou.
- Pred použitím prístroja sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Napájací kábel neťahajte, neskrúcajte a nelámte.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nekládal alebo neťahal cez ostré alebo špicaté predmety.
- Sieťový adaptér zapojte do elektrickej zásuvky inštalovanej podľa predpisov.
- Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte.
- Prístroj držte mimo dosahu špicatých alebo ostrých predmetov.
- Ak spotrebič spadol alebo ak sa iným spôsobom poškodil, nesmiete takýto prístroj používať.
- Pred každým čistením musíte prístroj vypnúť a vytiahnuť zo zásuvky.



VÝSTRAHA: Zásah elektrickým prúdom

S týmto prístrojom je, rovnako ako s každým elektrickým prístrojom, potrebné zaobchádzať opatrne a obozretne, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

Preto

- používajte prístroj len s dodaným sieťovým zdrojom a so sieťovým napätím uvedeným na sieťovom zdroji,
- nepoužívajte prístroj alebo príslušenstvo pokiaľ sú viditeľne poškodené,
- prístroj nikdy nepoužívajte počas búrky.

Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú poruchy, a odpojte ho od elektriny. Neťahajte za napájací kábel alebo za prístroj, ak chcete sieťový zdroj vytiahnuť zo zásuvky. Nikdy nedržte alebo nenoste prístroj za elektrický kábel. Dodržujte odstup medzi káblami a teplými povrchmi.

Uistite sa, že zástrčka a kábel neprichádzajú do styku s vodou alebo inými tekutinami.

V žiadnom prípade nesiahajte na nabíjaciu stanicu, ak spadla do vody a je pripojená k sieťovému zdroju.



VÝSTRAHA: Oprava

- Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo požiaru

V prípade nesprávneho používania, príp. používania v rozpore s týmto návodom na obsluhu, existuje za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!


Preto

- prístroj nikdy nenechávajte počas používania bez dozoru, predovšetkým, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti,
- prístroj nikdy nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom a pod.,
- prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok.

i Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi

- Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
- ⚠ **Nebezpečenstvo prehltnutia!** Malé deti môžu akumulátory prehltnúť a zadusiť sa nimi. Z toho dôvodu skladujte akumulátory mimo dosahu malých detí!
- Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
- ⚠ **Nebezpečenstvo výbuchu!** Akumulátory nikdy nehádzte do ohňa.
- Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.
- Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu.
- Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje v tomto návode na obsluhu.
- Pred prvým použitím nabite akumulátor doplna (pozri kapitolu 4).
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora nabite akumulátor doplna aspoň 2-krát do roka.

3. Popis prístroja

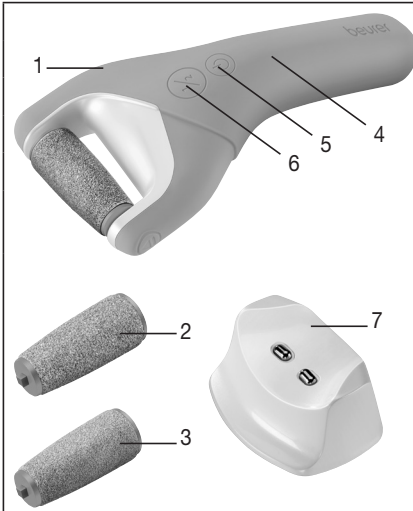	1. Základný prístroj
	2. Valček hrubý
	3. Valček jemný
	4. Indikátor stavu nabitia akumulátora
	5. Zapínač/vypínač
	6. Výberové tlačidlo Úroveň rýchlosti 1 alebo 2
	7. Nabíjacia stanica

4. Uvedenie do prevádzky

- Odstráňte balenie.
- Skontrolujte prístroj, zástrčku a kábel, či nie sú poškodené.
- Zapojte prístroj do elektrickej siete. Prístroj musí byť vo vypnutom stave.
- Kábel uložte tak, aby nehrozilo zakopnutie.
- Pred prvým použitím prístroj 1,5 hodiny nabíjajte. Pomalé blikanie kontrolky stavu nabitia znamená, že sa akumulátor nabíja. Keď indikátor začne svietiť permanentne, prístroj je kompletne nabitý. Následne môžete začať spotrebič používať v akumulátorovej prevádzke.

- Rýchle blikanie kontrolky stavu nabitia počas akumulátorovej prevádzky znamená, že je akumulátor vybitý. Prístroj nabíjajte tak, že ho kontaktnými bodmi na spodnej strane položíte na nabíjajúcu stanicu. Nabíjajúcu stanicu spojte so sieťovým káblom. Zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.
- Jedno nabitie akumulátora stačí na približne 1 hodinu bezkáblovej prevádzky.



POZOR

- Zapnutý prístroj by nemal prísť do kontaktu s inými časťami tela (napr. riasy, vlasy atď.), odevom a šnúrami, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu poranenia a zablokovaniu prístroja alebo jeho poškodeniu.
- Prístroj bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom nepoužívajte pri podráždení pokožky, kŕčových žilách, vyrážkach, (ochlpených) materských znamienkach alebo ranách. To isté platí pre pacientov s oslabenou imunitou, diabetom, hemofiliou a nedostatočnou imunitou.



Upozornenie


- Odstraňovač hrubej kože je možné používať na suchej alebo vlhkej pokožke.
- Pri použití na suchej koži, musí byť koža suchá a nemastná.
- Pred odstraňovaním zrohovatennej kože nepoužívajte žiadne krémy.
- Neodstráňte priveľa zrohovatennej kože, pretože by mohla dorásť zosilnená.

5. Obsluha

- Dbajte na to, aby bolo na prístroji stlačené tlačidlo pre párovanie.
- Prístroj zapnete stlačením zapínača/vypínača na 1 sekundu. Indikátor stavu nabitia 3-krát zabliká a prístroj sa spustí na pomalšom stupni rýchlosti.
- Na prepínanie medzi jednotlivými úrovňami rýchlosti krátko stlačte tlačidlo 1/2.
- S hrubým brúsny kotúčom teraz môžete odstrániť silne zrohovatenú kožu.
- Ak chcete odstrániť mierne zrohovatené miesta alebo vyhladiť časť kože, použite jemný brúsny nadstavec.
- Dávajte pozor, aby ste prístroj nepoužívali dlhšie ako 3 – 4 sekundy na jednom mieste kože.
- Prístroj sa automaticky vypne, keď sa brúsny kotúč pri prílišnom tlaku počas používania zablokuje asi na 3 sekundy.
- Nepoužívajte odstraňovač hrubej kože na podráždenú, boľavú alebo poranenú pokožku.
- Prechádzajte prístrojom pomaly a rovnomerne po zrohovatennej koži. Dbajte na to, aby ste prístroj priložili na zrohovatenú kožu kolmo v 90° uhle. Aby ste dosiahli optimálny výsledok, môže byť užitočné viesť prístroj po zrohovatennej koži rôznymi smermi.

Výmena valčeka:

Odstráňte valček podržaním bočného odblokovacieho spínača. Pomocou druhej ruky posuňte valček doprava a odtiahnite ho nahor.

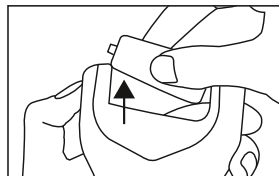

6. Údržba a uskladnenie



VÝSTRAHA

- Prístroj pred každým čistením vytiahnite zo zásuvky.
- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva sa v žiadnom prípade nesmie dostať žiadna kvapalina.
- Nadstavec na odstraňovanie hrubej kože vyčistite pomocou čistiacej kefy. Odporúčame ho najskôr jemne potrieť alkoholom, aby bolo zaručené hygienické vyčistenie.
- Prístroj nečistite v umývačke riadu!
- Nepoužívajte na čistenie agresívne čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!

Odpojený a vychladnutý prístroj čistite mäkkou, vlhkou utierkou a jemným čistiacim prostriedkom. Následne ho osušte jemnou handričkou nepúšťajúcou vlákna.

7. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

Spotrebované, úplne vybité akumulátory je potrebné likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný akumulátory zlikvidovať.

- Na akumulátoroch obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:
 - Pb = batéria obsahuje olovo,
 - Cd = batéria obsahuje kadmium,
 - Hg = batéria obsahuje ortuť.

Odstráňte silikónové puzdro a otvorte kryt. Potom vyberte akumulátor, aby ste ho riadne zlikvidovali.



8. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu je možné zakúpiť na príslušnej servisnej adrese (podľa zoznamu adries servisov). Uveďte príslušné objednávacie číslo.

	Výrobné alebo objednávacie číslo
Dokúpitelná súprava brúsnych kotúčov (hrubý, jemný)	571.07

9. Technické údaje

Napájanie	Vstup: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Výstup: 5 V --- 1000 mA
Rozmery	17,0 × 8 × 4,5 cm
Hmotnosť	cca 184 g
Akumulátor: Kapacita Menovité napätie Typové označenie	1000 mAh 3,2 V Li-iónová

10. Záruka / servis

V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miestne zastúpenie (pozri zoznam „Service international“).

V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:

1. Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba od dátumu kúpy platná v príslušnej krajine.
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu alebo faktúry.
2. Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.
3. Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 - a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 - b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolovaných osôb;
 - c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska;
 - d. záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, batérie atď.).
4. Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené prístrojom, keď sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.

