


# beurer FB 20

CZ

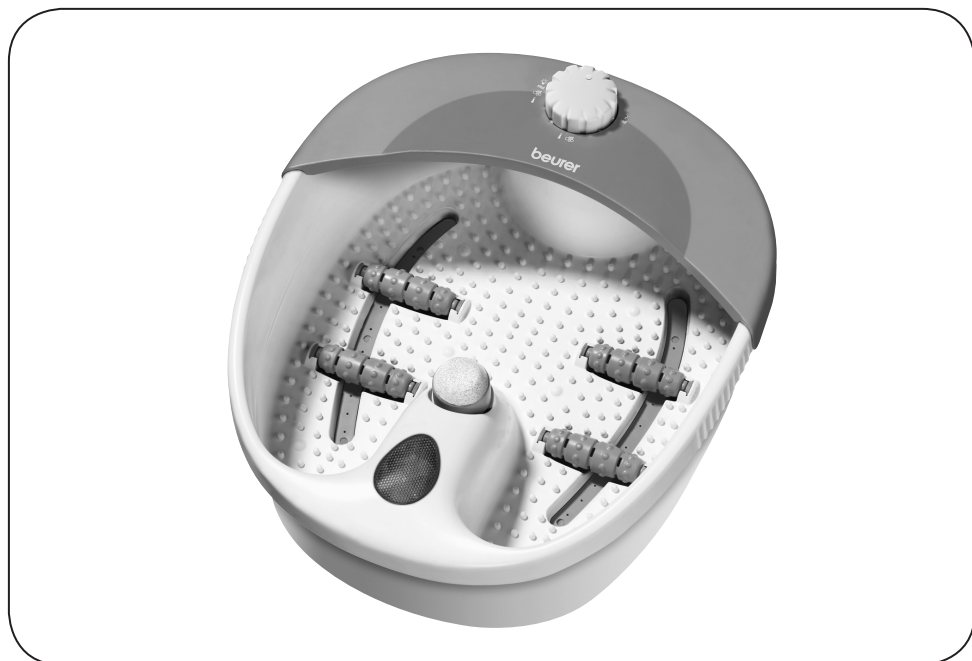

**CZ Koupel nohou**  
Návod k použití

## Vážení zákazníci,

děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem,

Váš tým společnosti Beurer

## Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na typovém štítku jsou použity následující symboly:



**VAROVÁNÍ** Upozornění na nebezpečí poranění nebo ohrožení zdraví.



**POZOR** Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.



**Upozornění** Upozornění na důležité informace.



Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.



Používejte pouze v uzavřených prostorách.

## 1. Seznámení

### Blahodárné pro vaše nohy

Nohy hrají v našem životě nosnou roli – spočívá na nich celá váha našeho těla. Proto vaše nohy potřebují péči. K tomu máte několik rozličných možností:

- **Vany na nohy podle Kneippa:** Studené a teplé střídavé koupele jsou základem léčebné filozofie Sebastiana Kneippa.
- **Masáž reflexních zón na nohou:** Masáž reflexních zón na nohou je velmi oblíbenou masážní technikou, při které má být ovlivňováno celé tělo působením na chodidla.
- **Perličková koupel na nohy:** Jednoduchou a oblíbenou aplikací pro péči o nohy doma je perličková koupel na nohy! Pomocí perličkové koupele na nohy můžete sami aktivně, a tak často, jak chcete, udělat něco dobrého pro své nohy!

Tato perličková koupel na nohy je bohatě vybavena:

- vložka pro podporu masáže,
- 3 vyměnitelné nástavce pro péči o nohy:
  - masážní nástavec,
  - kartáč,
  - odstraňovač zrohovatělé kůže,
- 3 funkční stupně: vibrační masáž, vířivá masáž a ohřev vody,
- Infračervené pole.

Uvolněte sebe a své nohy používáním této vany na nohy. Může rozvíjet následující blahodárné účinky:

- stimulace prokrvení,
- podpora regenerace buněk,
- revitalizace a regenerace nohou,
- uvolnění napjatých svalů.

### **Upozornění**

Teplé koupele na nohy s arnikou, rozmarýnem nebo s extrakty z mořské soli rozhýbou krevní oběh. Vlažné koupele na nohy s levandulí nebo tymiánem jsou blahodárné pro unavené nohy.

## 2. Použití k určenému účelu

Tento přístroj je určen výhradně k péči o nohy.

### **VAROVÁNÍ**

Koupelel nohou nepoužívejte

- při patologických změnách nebo poranění v oblasti nohou (např. otevřené rány, bradavice, mykóza),
- u dětí,
- u zvířat,
- déle než 20 minut (nebezpečí přehřátí) na nechte ji před opětovným použitím nejméně 15 minut vychladnout.

Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo od ní obdržely pokyny, jak mají přístroj používat.

Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.

Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

Před použitím koupelel nohou se dotážete svého lékaře, zejména

- pokud si nejste jisti, zda je pro Vás koupelel nohou vhodná,
- pokud jste těžce nemocní nebo jste absolvovali operaci nohou,
- při cukrovce, trombóze,
- při onemocnění nohou, resp. chodidel (např. křečové žíly, záněty žil),
- při bolestech nejasné příčiny.

Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Tento přístroj je určen pouze k soukromému používání, ne pro komerční využití a používání v lékařských zařízeních.

## 3. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.

### **Upozornění**

- Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Pokud se během použití vyskytne závada, přístroj okamžitě odpojte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístroj sami neopravujte, poraďte se s Beurer zákaznickým servisem. Neodbornými opravami mohou pro uživatele vznikat závažná nebezpečí.
- Netahejte za kabel, nekrňte jím a nepřehýbejte jej. Nezapichujte žádné špendlíky nebo ostré předměty.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl pokládán nebo tažen přes ostré nebo špičaté předměty.
- Zástrčku zapojte do zásuvky chráněné proti vlhkosti a stříkající vodě.
- Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.

- Pro naplnění vany na nohy ji nikdy nesmíte stavět do sprchové vaničky, koupací vany nebo umyvadla.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt.
- Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
- Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.
- Pokud ze zařízení uniká voda, nemělo by být nadále používáno.
- Povrch přístroje je horký. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, musí být při používání opatrné.

## Zásah elektrickým proudem



### **VAROVÁNÍ**

Jako každý elektrický přístroj, také tuto koupel nohou používejte opatrně a uvážlivě, aby bylo zabráněno nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Přístroj proto

- připojte pouze k napětí, které je uvedeno na přístroji,
- nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
- nepoužívejte při bouřce.

V případě závady nebo poruchy provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový kabel. Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem.

Vanu na nohy nikdy nesmíte připojovat do sítě, když už máte nohy ve vodě. Při poškození přístroje může toto vést k životu nebezpečné elektrické ráně.



Zajistěte, aby zástrčka a kabel nepřišly do styku s vodou nebo jinými kapalinami.

Přístroj proto

- používejte pouze v suchých vnitřních místnostech (např. nikdy ve vaně, sauně),
- používejte pouze suchýma rukama.

Přístroj nikdy neponořujte do vody. Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj musí být vybaven ochranným proudovým chráničem RCD 30 mA.

## Nebezpečí požáru



### **VAROVÁNÍ**

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!

Proto přístroj

- neponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
- nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...
- nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.


## Zacházení s přístrojem




### **POZOR**

- Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Chraňte přístroj před vysokými teplotami.
- Nestoupejte si dovnitř do vany na nohy.
- Přístroj nesmí být při naplňování připojen do sítě.
- Přístroj stále vypínejte a vytahujte síťovou zástrčku předtím, než s ním budete pohybovat nebo ho čistit.

## 4. Popis přístroje

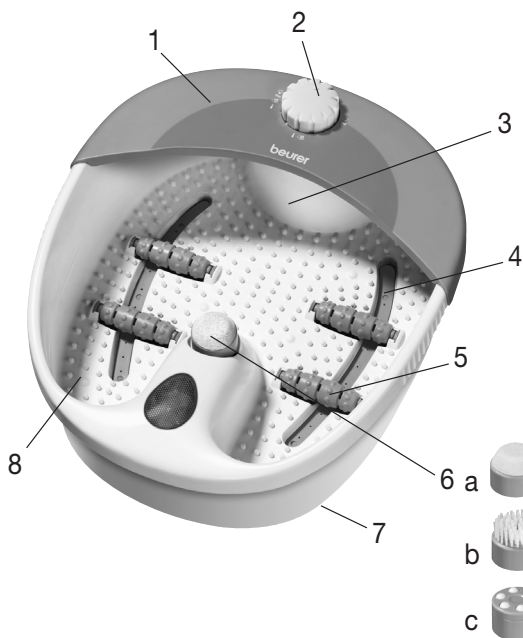

1. Ochrana proti střikající vodě
2. Otočný spínač
3. Značka maximálního množství vody
4. Vířivá lišta
5. Masážní otočný nástavec
6. Vyměnitelné nástavce pro pedikúru
  - a odstraňovač zrohovatělé kůže
  - b kartáč
  - c masážní nástavec
7. Pryžové patky (spodní strana přístroje)
8. Masážní vložka
9. Navíjení kabelu (spodní strana přístroje)

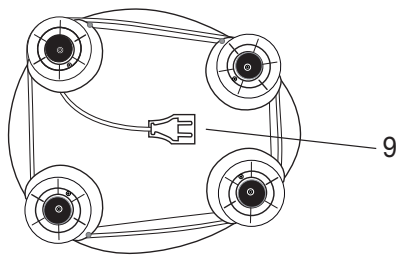

## 5. Obsluha

### Uvedení do provozu



- Sejměte obal.
- Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka nebo kabel poškozen.
- Před zapojením naplňte koupel nohou teplou vodou maximálně po značku maximálního množství vody (cca 4-5 cm vysoko).
- Dbejte na to, aby byl otočný spínač při zapojení přístroje do sítě nastaven do polohy "ⓘ".
- Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.





V pohodlném sedu umístěte nohy s lehkým tlakem na vložku pro podporu masáže. Nestoupejte si však dovnitř do vany na nohy. Sklouznutí přístroje zabraňují gumové nožky na spodní straně přístroje.

Pomocí otočného vypínače nastavte požadovanou funkci:

- Vypnuto ⓘ

- Vibrační masáž + infračervené světlo , 


- Teplá + perličková masáž , 

- Teplá + perličková a vibrační masáž + infračervené světlo , , , 

### Masážní kolečka

Výrazného masážního efektu docílíte pohybem nohou vpřed a vzad po 4 masážních kolečkách integrovaných ve vložce. Masážní kolečka lze volitelně také vyjmout pevným vytazením koleček nahoru.

Dbejte při nasazování válečků na to, aby fixace válečků ukazovala dolů jako na obrázku.

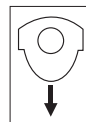

## Vyměnitelné nástavce

Požadovaný nástavec nasadíte příslušné zařízení uprostřed.

**Nástavec s kartáčem** lze použít ke stimulaci reflexních zón v chodidle.

**Masážní nástavec** zajišťuje příjemnou masáž nohou a podporuje prokrvení.

**Odstraňovač zrohovatělé kůže** slouží k odstranění odumřelých kožních buněk a tvrdé kůže.

### Upozornění

- Masáží určitého bodu na chodidle lze ovlivnit funkci různých tělesných orgánů. Doporučujeme však, abyste se před bodovou reflexní masáží informovali v literatuře nebo u lékaře, abyste dosáhli požadovaného efektu.
- Koupel nohou lze použít i bez vody.

Po použití vylijte vodu úzkou stranou koupele nohou.

## 6. Péče a skladování

Po použití přístroj vypláchněte vodou z vodovodu.

Perličkovou masážní koupel na nohy můžete vymýt slabým čisticím prostředkem pro domácnost.

Pro vysušení vzduchových vedení zapněte po čištění stupeň perlení bez vody na cca 1 minutu.

### Upozornění

- Dbejte na to, aby do vnitřku přístroje nevnikla voda!
- Koupel nohou skladujte v originálním obalu na suchém místě.
- Nenechávejte přístroj po delší dobu volně odkrytý.

## 7. Technické údaje

Připojení k síti 220-240 V ~ 50 Hz 120 W

## 8. Likvidace

Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu s nařízením o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.





